

Bedienungsanleitung

Mehrparameter-Messsystem

KM 3000

Hardwareversion 2.0

Achtung!
Geänderte
Anschlussbelegung der
Stromausgänge.

1	Überblick.....	4
2	Sicherheit.....	8
3	Geräteaufbau	10
4	Installation	11
4.1	Klemmkasten KM 3000 – Hardwareversion 2.0	11
4.2	Anschluss externer Module.....	12
4.2.1	Belegungsplan KM3000-E	13
4.2.2	Belegungsplan/Anschluss externes Messmodule.....	14
4.3	Anschlussschema der Sensoren	16
4.3.1	Temperaturfühler.....	16
4.3.2	pH/Redox- und ionenselektive (ISE) Messketten	17
4.3.3	Leitfähigkeits-Messzelle	18
4.3.4	Sauerstoffsensor	19
4.3.5	Chlor-Messzelle, Trübungssonde und Sensor mit analogem Ausgangssignal.....	19
4.3.6	Durchflusssensor.....	19
4.4	Einfluss der Kabellänge	20
5	Grundfunktionen des Messsystems KM 3000.....	20
5.1	Messgrößen	20
5.2	Anzeigeelemente	21
5.3	Menüaufbau	22
5.4	Inbetriebnahme bzw. Ergänzung des Systems	23
6	Einrichtung der Anzeige	23
6.1	Neben-Messgrößen anzeigen/entfernen	23
6.2	Temperaturwert anzeigen/entfernen.....	25
6.3	Individuelle Bezeichnung der Messstelle vergeben.....	25
7	Temperaturkompensation	26
7.1	Allgemeines.....	26
7.2	Einstellen eines Temperaturmesskanals für eine Messstelle	26
7.3	Einstellen einer Festtemperatur für eine Messstelle	26
8	Datenkommunikation/Datensicherung	27
8.1	serielle Schnittstellen	27
8.2	serielle Datenausgabe ASCII.....	27
8.2.1	Freigabe der einzelnen Messwerte zur Datenausgabe	28
8.2.2	Grundeinstellung	29
8.3	serielle Datenausgabe Modbus	29
8.3.1	Protokollaufbau	30
8.3.2	Schnittstellenparameter	32
8.3.3	Einstellung der Parameter.....	33
8.4	Datenlogger.....	33
8.4.1	Freigabe der einzelnen Messwerte zur Datenspeicherung.....	33
8.4.2	Grundeinstellung	34
8.4.3	Kopieren des Datenloggerinhaltes auf einen USB Stick.....	34
8.4.4	Software DataReader.....	35
8.4.5	Anzeige/Suche bestimmter Datensätze	35
8.5	48 Stunden Datenrecorder.....	36
8.6	Justierung individueller Grenzwertbänder.....	36
8.7	Modembetrieb	37
8.7.1	Konfiguration des KM 3000 für den Modembetrieb	37
8.7.2	SMS Service.....	38
8.7.3	SMS Abfrage Service	38
8.8	Ethernet - Einstellung IP-Adresse, Weboberfläche, Modbus TCP/IP.....	40

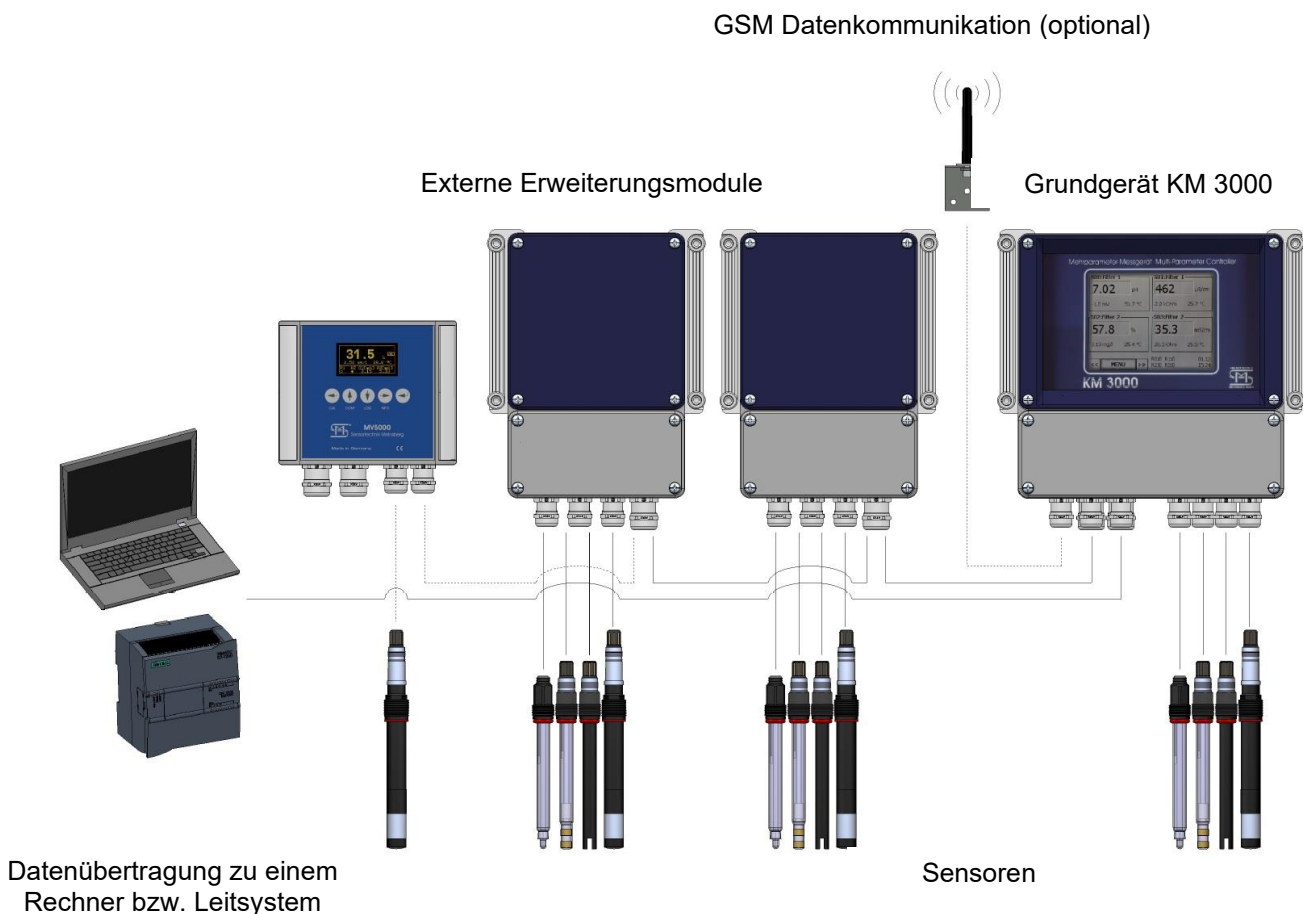
9	Kalibrierung	42
9.1	Kalibrierung einer Messstelle	42
9.2	Kalibrierverfahren	42
9.2.1	Einstellung Temperaturoffset	42
9.2.2	Einpunktkalibrierung	42
9.2.3	Zweipunktkalibrierung	43
9.2.4	Automatische Kalibrierung	43
9.2.5	Dateneingabe	44
10	Schalt- und Stromausgänge	45
10.1	Konfigurieren eines Relaisausganges	45
10.1.1	Interne Relaisausgänge	45
10.1.2	Externe Relaisausgänge	46
10.1.3	Konfigurieren eines Timerrelais	46
10.1.4	Manuelle Auslösung der Relaisfunktion	47
10.2	Konfigurieren eines Stromausganges	47
11	Regler	48
11.1	Grundlegende Informationen	48
11.2	Konfigurieren eines Impulslängenreglers	49
11.3	Konfigurieren eines Impulsfrequenzreglers	50
11.4	Konfigurieren eines Analogreglers	51
12	Berechnung virtueller Messwerte	53
12.1	Berechnung virtueller Messwerte durch Addition/Subtraktion	53
12.2	Berechnung freies Chlor als virtueller Messwert	54
12.2.1	Chlormessung mit automatischer pH-Wert-Kompensation	54
12.2.2	Einrichten des virtuellen Kanals für freies Chlor	55
12.3	Berechnung virtueller Messwerte mittels Polynom	55
13	Systeminformationen und Servicefunktionen	57
13.1	Information	57
13.2	Ändern der Slavenummer (ID von Mess- und Aktormodulen)	57
13.3	Logbuch	58
13.4	Allgemeine Einstellungen	58
13.5	Hold	59
13.6	Update der Gerätesoftware	60
14	Wartung, Entsorgung	60
15	Technische Daten	61
15.1	Mehrparameter-Messgerät KM 3000	61
15.2	Externe Mess- und Aktormodule	62
15.3	Messmodule	63
15.4	Gehäuse Maßzeichnungen	64
16	Gerätekonfiguration	66
17	Anhang – Auszug aus der BA der Vorgängerversion	69
18	Serviceadresse	70

1 Überblick

Das Mehrparameter-Messgerät KM 3000 ist die individuelle Komplettlösung für Mess-, Steuer- und Regelaufgaben in der Analysentechnik. Mittels bis zu 16 Messmodule können in beliebiger Kombination pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Redoxpotential, Temperatur, Chlorgehalt, Trübung und weitere Messgrößen ermittelt werden. Grundlage hierfür ist eine modulare, busfähige Systemstruktur mit Mess- und Aktormodulen, die über eine Busverbindung miteinander und mit der Zentraleinheit verknüpft sind. Vier der Messmodule können in der Zentraleinheit, dem eigentlichen Messgerät KM 3000, angeordnet werden. Weitere 12 Messmodule werden über externe Module und das Bussystem mit dem KM 3000 verbunden. Damit können die Messmodule auch als Vorverstärker für die räumlich getrennte Anordnung der Messstellen genutzt werden. Aktormodule sind Interface-Module zur Messwertausgabe, DAC-Module zur Realisierung von Stromausgängen 0(4)...20 mA entsprechend dem Messsignal und Relais-Module für Schalt-, Alarm- und Steuerungsaufgaben.

Die wesentlichsten funktionellen Einheiten des Mehrparameter-Messsystems KM 3000 sind:

- Mehrparameter-Messgerät KM 3000 mit Stromversorgung, Touchscreen-Anzeige, internen Modulen, Datenlogger und Logbuch, diverse digitale Schnittstellen wie RS232, RS485, USB und Ethernet, Erweiterung durch integriertes GSM Modem möglich
- Externe Mess- und Aktormodule
- PC-Visualisierungsprogramm
- Sensoren und Armaturen



Mehrparameter-Messgerät KM 3000

Das Mehrparameter-Messgerät KM 3000 als Zentraleinheit des Messsystems beinhaltet Stromversorgung, Touchscreen-Anzeige, bis zu 4 interne Messmodule sowie Ausgangssignal- und Relais-Baugruppen. Der übersichtliche Klemmkasten des KM 3000 stellt die Schnittstelle zur Stromversorgung, zu den Sensoren und zur Messwertausgabe bzw. den Regelausgängen dar. Äußerlich hervorstechendes Merkmal der neuen Generation von Mehrparameter-Messsystemen ist die farbige Touchscreen-Anzeige, die entscheidend die Bedienung, Konfiguration und Kalibrierung des Messsystems vereinfacht. Hier wird die Bedienung des Messgerätes durch selbsterklärende Piktogramme unterstützt. Es werden immer nur die Funktionen, Bedienelemente und Statusinformationen dargestellt, die für die jeweilige Aufgabenstellung relevant sind. Bis zu vier Messwerte mit ihren Einheiten, ihren Temperaturwerten, einem möglichen Zweitwert sowie einer individuellen Bezeichnung können gleichzeitig auf einer Anzeigeseite dargestellt werden. Insgesamt 4 Seiten ermöglichen die übersichtliche Anzeige der Messwerte aller 16 Messmodule einschließlich Statussignalen. Zusätzlich steht noch eine fünfte Anzeigeseite zur Verfügung, auf der virtuelle Messwerte durch mathematische Verknüpfungen (z. B. Differenzmessung) dargestellt werden. Das KM 3000 bietet Platz für bis zu vier Messmodule in beliebiger Kombination und ein DAC 3000-Modul für vier konfigurier- und skalierbare Stromausgänge 0(4)...20 mA. Alle Messmodule beinhalten eine Temperaturmessung für einen Temperaturfühler Pt 1000. Die Zuordnung der Temperaturmessung zur automatischen Kompensation der Parameter ist vom Anwender frei wählbar.

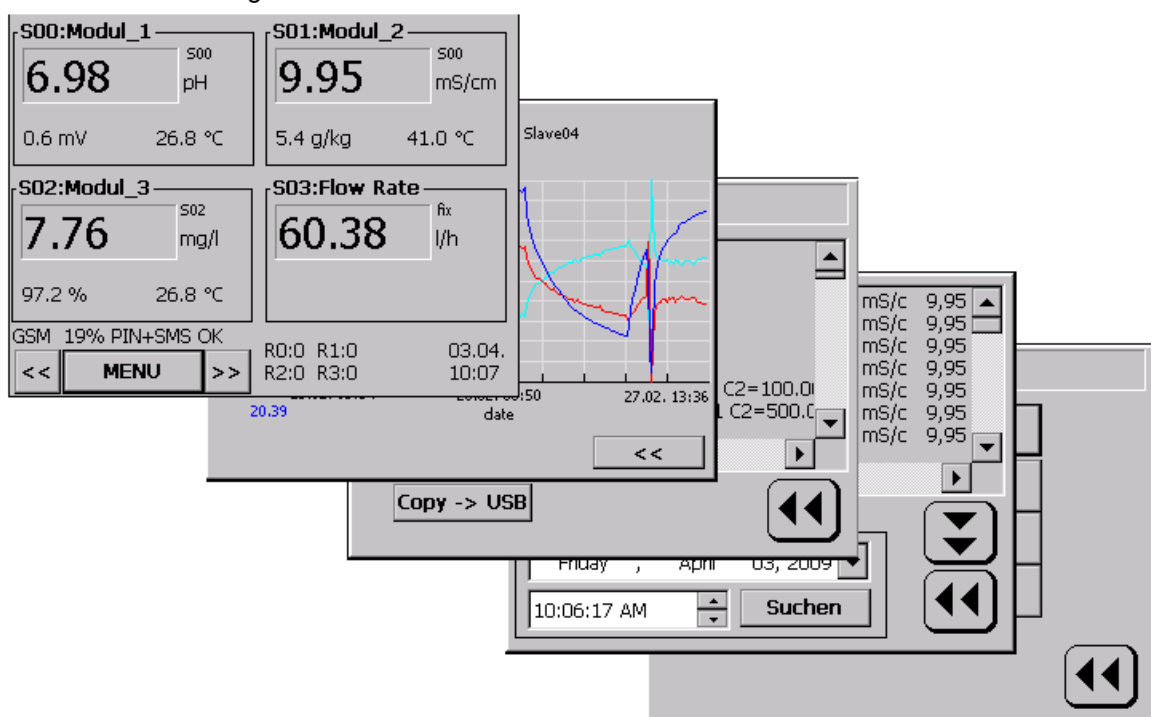
Eine Vielzahl praktisch relevanter Kalibrieralgorithmen und Methoden zur Temperaturkompensation wird vom KM 3000 unterstützt. Serienmäßig sind vier Grenzwertrelais für einfache Steuerungs-, Regelungs- oder Alarmierungsaufgaben integriert. Die Zuordnung der Kontakte zu den Messwerten, zu den Schaltwerten sowie eine Hysterese sind vom Anwender justierbar. Für komplexe Regelaufgaben wird das Reglermodul mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden PID-Reglern aktiviert. Die Regler können beliebigen Messgrößen zugeordnet werden und arbeiten als Analog-, Impulslängen- oder Impulsfrequenzregler unter Nutzung der analogen Stromausgänge bzw. der Relaisausgänge des Messgerätes.

Alle Werte können über die serielle bidirektionale Schnittstelle RS-232 oder RS-485 in Verbindung mit dem PC-Visualisierungsprogramm MVremote zyklisch ausgegeben und grafisch angezeigt werden. Das Programm MVremote beinhaltet gleichzeitig alle Funktionen zum Auslesen und zur Konfiguration des Datenloggers. Auch ohne das Programm MVremote kann entweder mittels des einfachen Softwareprogramms DataReader, der Datenlogger über die RS-232 Schnittstelle genutzt werden oder die Daten direkt auf einen USB-Stick übertragen werden. Der Datenlogger ist als Ringspeicher oder endlicher Speicher mit einstellbarer Abtastzeit konfigurierbar und arbeitet unabhängig von der Datenausgabe.

Der Datenrecorder stellt den Messwertverlauf der Messgrößen jedes Messmoduls über die letzten 48 Stunden auf dem Touchscreen grafisch dar. Diese Darstellung gibt dem Betreiber einen raschen Überblick über die Messwertentwicklung unter Angabe von Mittelwert, Maxima und Minima.

Einen großen Vorteil stellt auch die Aktualisierung der Gerätesoftware durch ein Update dar. Diese kann auf einen USB-Stick gespeichert werden und dann über eine Update-Funktion in das Gerät übertragen werden. Somit können mögliche Softwareerweiterungen schnell durch den Nutzer selbst erfolgen.

Die Geräte sind bei der Auslieferung ab Werk entsprechend Ihrem Auftrag voreingestellt und mit einem Netzanschlusskabel ausgerüstet.




Externe Mess- und Aktormodule

Neben den 4 internen Messmodulen können weitere bis zu 12 Messmodule in beliebiger Reihenfolge und Auswahl mit dem Messgerät KM 3000 verbunden werden. Zusätzlich stehen bis zu 4 externe DAC 3000 CAN-Module mit jeweils 4 Stromausgängen 0(4)...20 mA zur Verfügung, um alle Messwerte (auch virtuelle Messwerte) als Stromsignale für eine weitere Verarbeitung zu nutzen. Bis zu 4 externe Relaismodule REL 2000 CAN mit jeweils 4 Relais ergänzen die 4 internen Relaisausgänge des Messgerätes auf insgesamt 20 Relaisausgänge. Das Messgerät KM 3000 stellt die Stromversorgung für die Mess- und Aktormodule bereit und erkennt automatisch die angeschlossenen Module.

PC-Visualisierungsprogramm

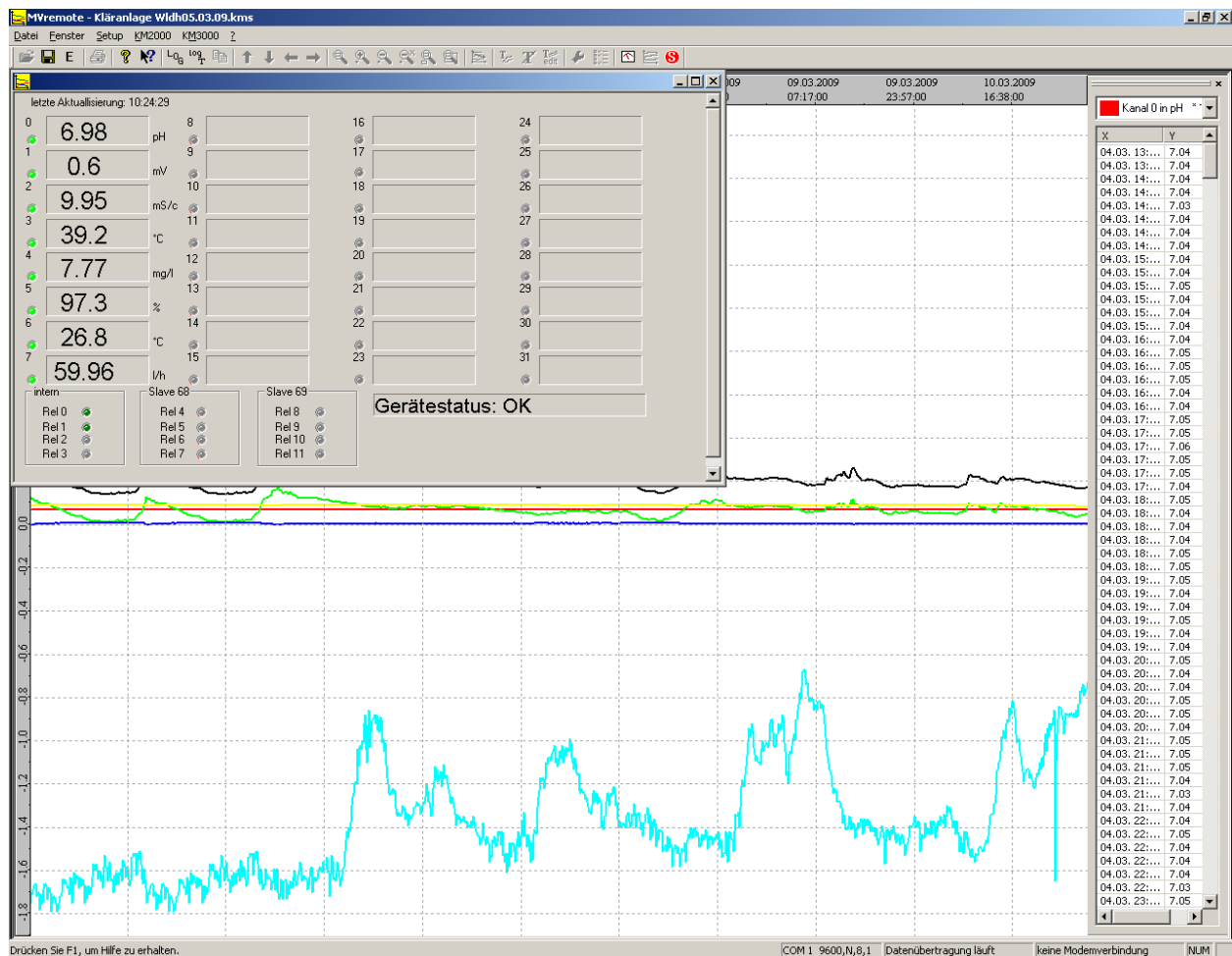Das optionale PC-Visualisierungsprogramm MVremote ermöglicht die komfortable Darstellung, Konfiguration und Speicherung der Messwerte des Mehrparameter-Messsystems KM 3000 auf einem externen PC. Die Konfiguration kann per RS-232 erfolgen, bearbeitet und gedruckt werden. Es ist aber auch möglich, Konfigurationen unabhängig von einer Datenverbindung zum KM 3000 zu erstellen, zu bearbeiten und abzuspeichern. Mittels USB-Stick können diese Konfigurationen dann in das Gerät übertragen werden. Weiterhin können Datenlogger und Logbuch ausgelesen und konfiguriert werden.




Sensoren und Armaturen

Ein besonderer Vorteil des Mehrparameter-Messsystems KM 3000 ist der Anschluss konventioneller Elektroden und Sensoren (pH- und Redox-Elektroden, Leitfähigkeits-Messzellen, Sauerstoffsensoren usw.) ohne integrierte Vorverstärker oder Elektronik. Damit steht das komplette Programm von Elektroden, Sensoren und Armaturen für die Verbindung mit dem Mehrparameter-Messsystem zur Verfügung. Spezielle Messmodule mit linearer Übertragungskennlinie und galvanischer Trennung sind für den Anschluss von Sensoren mit integrierter Messwertverarbeitung vorgesehen. Neben Chlor-Messzellen (Modul MVM 2260 bzw. MV 2260) können Durchfluss-, Füllstand- oder weitere Sensoren mit einem Ausgangssignal 0...5 V DC (MVM 2260 A bzw. MV 2260 A) oder 0(4)...20 mA (MVM 2260 B bzw. MV 2260 B) in das Mehrparameter-Messsystem integriert werden.

Webserver / Weboberfläche

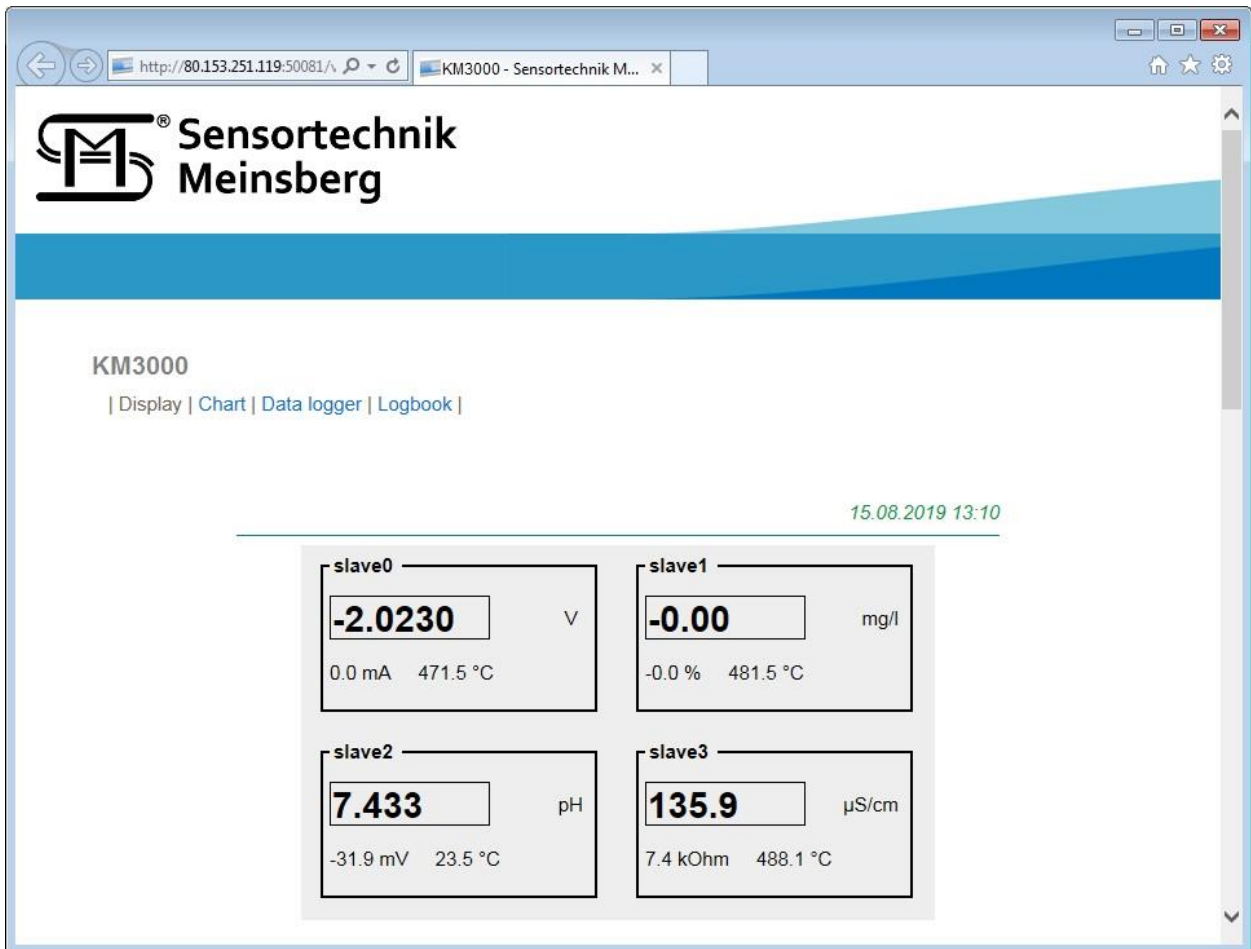Messwerte, Diagramme und weitere Informationen der einzelnen Slaves lassen sich bequem in einem Internetbrowser anzeigen. Auch das Auslesen des Datenloggers kann über die Weboberfläche geschehen.




The screenshot shows a web browser window displaying the Sensortechnik Meinsberg KM3000 interface. The browser address bar shows the URL `http://80.153.251.119:50081/`. The page header features the company logo and name. Below the header, the device name 'KM3000' is displayed, along with navigation links for 'Display', 'Chart', 'Data logger', and 'Logbook'. A timestamp '15.08.2019 13:10' is shown in the top right. The main content area displays four sensor data cards for 'slave0', 'slave1', 'slave2', and 'slave3'. Each card shows a primary value in a large font, a unit, and two secondary values.

Slave	Primary Value	Unit	Secondary Value 1	Secondary Value 2
slave0	-2.0230	V	0.0 mA	471.5 °C
slave1	-0.00	mg/l	-0.0 %	481.5 °C
slave2	7.433	pH	-31.9 mV	23.5 °C
slave3	135.9	μS/cm	7.4 kOhm	488.1 °C

2 Sicherheit



Diese Bedienungsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Mehrparameter-Messgerätes KM 3000 zu beachten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt vor den Arbeiten vom Bediener vollständig zu lesen.

Das Symbol  „Allgemeines Warnzeichen“ kennzeichnet in der Bedienungsanleitung besonders zu beachtende Warnhinweise.

Benutzerqualifikation



Das Mehrparameter-Messgerät und das komplette Messsystem wurde für die Mehrparametermessung in der Analysentechnik entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass der Betreiber/Bediener und das Wartungspersonal auf Grund seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung die Spezifik von Analysen-Messsystemen kennt, den sicheren Umgang mit Chemikalien z. B. bei der Wartung von Elektroden/Sensoren beherrscht und die hiervon ausgehenden Gefährdungen einschätzen kann. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die nationalen Gesetze und Richtlinien zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum Umgang mit Chemikalien eingehalten werden.

Elektrische Installationsarbeiten



Das Mehrparameter-Messgerät wird betriebsbereit mit einem Netzanschlusskabel geliefert. Der Stecker darf nur in eine frei zugängliche Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden und muss immer gut erreichbar sein. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden. Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb



oder außerhalb des Gerätes kann dazu führen, dass beim Auftreten eines weiteren Fehlers Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses ersetzt werden.

Die Anforderungen an das zu verwendende Netzkabel für eine Festinstallation entnehmen Sie bitte dem Kapitel 15 TECHNISCHE DATEN. Zusätzlich wird bei einer Festverkabelung eine externe Netztrennung / ein externer Leistungsschalter benötigt. Diese Absicherung sollte maximal 10A (träge) betragen. Der externe Trennschalter muss nach IEC 60947-1 und EN 60947-3 geeignet und für das Messgerät gekennzeichnet sein.

Beim Öffnen des Gerätes werden spannungsführende Teile freigelegt. Der Klemmenkasten des Gerätes darf nur im spannungslosen Zustand (Ziehen des Netzsteckers / Trennen der Festverkabelung von der Versorgungsspannung) zum Anschluss der Sensoren und sonstiger peripherer Einheiten geöffnet werden. Diese Arbeiten sind durch eine Fachkraft durchzuführen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist. Beim Entfernen des Displaydeckels werden „gefährlich aktive“ spannungsführende Teile freigelegt. Das Öffnen bzw. Entfernen des Displaydeckels ist untersagt! Eingriffe in das Gerät haben den Verlust der Gewährleistung zur Folge.

Installation und Inbetriebnahme



Die Installation des Messgerätes und der externen Module hat so zu erfolgen, dass unter allen Bedingungen die in den Technischen Daten genannten Bedingungen eingehalten werden. Die Gehäuse erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP 65. Voraussetzung hierfür ist jedoch die ordnungsgemäße Montage des Gehäusedeckels des Klemmenkastens und der Dichtungen. Ebenso sind die Kabel in den Kabelverschraubungen ordnungsgemäß zu montieren und nicht benutze Kabelverschraubungen dicht zu verschließen. Für den Außeneinsatz des Messgerätes KM 3000 wird die Verwendung von Standsäulen und Wetterschutzdächern empfohlen. Die Bohrlochabstände finden Sie in der Maßzeichnung im Kapitel 15 TECHNISCHE DATEN.

Verwenden Sie zur Wandmontage das zur Wandbeschaffenheit passende Material (Schrauben, Dübel, etc.). Die Wandmontage muss DIN-gerecht ausgeführt werden, d.h. die Aufhängung muss das 4-fache Gewicht des Gerätes (15 TECHNISCHE DATEN) tragen.

Es sind ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Sensorkabel einzusetzen. Für die Sensoren und Armaturen gelten die Hinweise und Festlegungen in den jeweiligen Bedienungsanleitungen und Datenblättern. Da das Messsystem für die Messung, Steuerung und Regelung von Analysenparametern vorgesehen ist, ist zu beachten, dass eine regelmäßige Kalibrierung und Wartung der Sensoren erforderlich ist.

Um im Fall eines externen Kurzschlusses im Lastkreis eine Zerstörung der Relaisausgänge zu verhindern, sollte der Lastkreis auf den maximal zulässigen Ausgangsstrom abgesichert sein.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Das Mehrparameter-Messgerät KM 3000 ist zum Messen, Steuern und Regeln von Analysenparametern im Nicht-Ex-Bereich vorgesehen. Die Steuer- und Regelausgänge dürfen nicht für Schutz- oder Sicherheitsschaltungen verwendet werden. Unter Beachtung der Technischen Daten in Kapitel 15 ist ausschließlich das Bedienen und Betreiben des Messgerätes für diesen Einsatz der bestimmungsgemäße Gebrauch. Jede darüber hinausgehende Verwendung sowie eigene Veränderungen oder Erweiterungen sind nicht bestimmungsgemäß und führen zum Verlust des Anspruchs auf Gewährleistung. Bei der Verbindung des Messgerätes mit elektrochemischen Sensoren sind prinzipiell deren begrenzte Lebensdauer und natürlicher Verschleiß zu beachten, da sich hieraus Fehlfunktionen des Messsystems und der damit verbundenen Regelung oder Steuerung ergeben können. Der Betreiber hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um schädliche Auswirkungen derartiger Fehlfunktionen zu begrenzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Die Mehrparameter-Messgerät KM 3000 sind gemäß den einschlägigen Richtlinien und Normen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft. Sie haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät darf ausschließlich durch herstellereigene Werkstätten repariert werden.

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit der Messgeräte und der zugehörigen Komponenten ist nur dann gewährleistet, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die speziellen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung und in den Bedienungsanleitungen der Komponenten beachtet werden.

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb des Messgerätes oder seiner Komponenten nicht mehr möglich ist, so sind das Messgerät und die Komponenten außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Messgerät oder Komponenten:

- eine Transportbeschädigung aufweisen
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurden
- sichtbare Beschädigungen aufweisen
- nicht mehr wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben arbeiten



Warnung vor elektrischer Spannung! Beim Öffnen des Gerätes werden spannungsführende Teile freigelegt.

Setzen Sie sich in Zweifelsfällen mit dem Lieferanten in Verbindung.

3 Geräteaufbau



- 1 Netzklemmen
- 2 Relaisklemmen
- 3 Stromausgänge / Hold
- 4 CAN-Bus
- 5 Serielle Kommunikation
- 6 Störmelderelais
- 7 PE-Klemmen
- 8 USB und Ethernet
- 9 Sensoranschlussklemmen

4 Installation

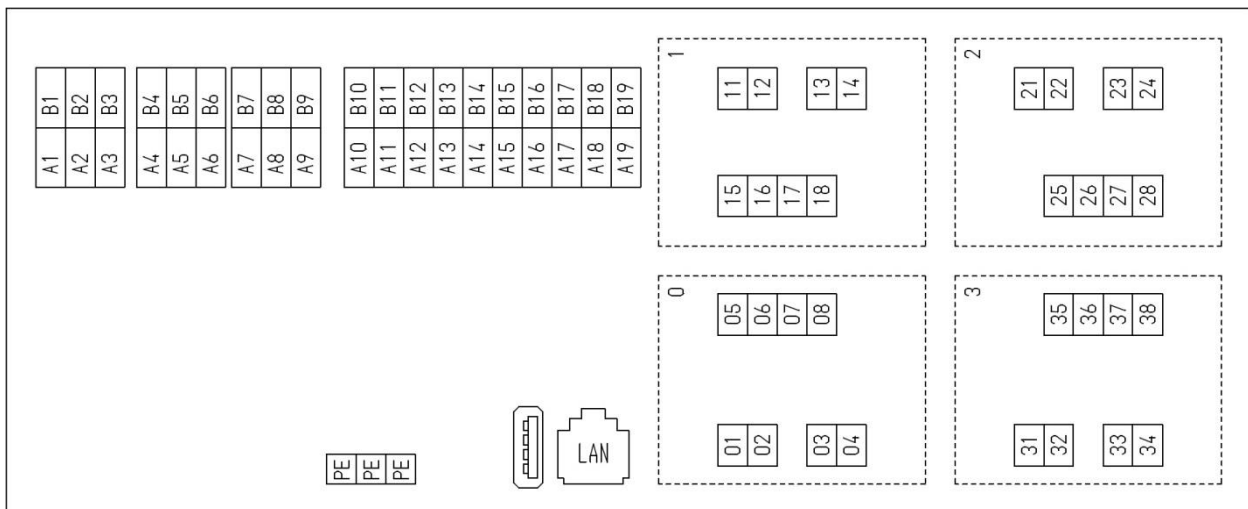
Das Mehrparameter-Messgerät KM 3000 einschließlich der zugehörigen Module wird betriebsbereit geliefert und entsprechend dem Auftrag voreingestellt. Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile für die Montage und Inbetriebnahme enthalten, mit Ausnahme des Materials zur Montage der Geräte an einer Wand oder einer Standsäule. Diese können beim Hersteller oder Händler separat bestellt werden. Die interne Hardwarekonfiguration des Messgerätes KM 3000 wird vom Hersteller entsprechend der Aufgabenstellung festgelegt. Das komplette Messsystem kann durch den Betreiber mittels externer Mess- und Aktormodule unter Beachtung der Hinweise in dieser Bedienungsanleitung auch nachträglich ergänzt werden.

Der jeweilige Standort aller Komponenten des Messsystems muss die in den Technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen erfüllen. Da das Messsystem für die Messung, Steuerung und Regelung von Analysenparametern vorgesehen ist, ist zu beachten, dass im Zusammenwirken zwischen Messmodul und Messgerät KM 3000 eine regelmäßige Kalibrierung und Wartung der Sensoren erforderlich ist.



Die Steuer- und Regelausgänge dürfen nicht für Schutz- oder Sicherheitsschaltungen verwendet werden. Einige Bereiche des Gerätes sind Passwort geschützt.
Bei der Auslieferung ist das Passwort immer „1“.

4.1 Klemmkasten KM 3000 – [Hardwareversion 2.0](#)



Klemme	Bezeichnung	Klemme	Bezeichnung
A1 & B1	Netzversorgung L1-Leiter	A1 & B1	GND (nur bei 24V-Version)
A2 & B2	Netzversorgung PE-Leiter	A2 & B2	Netzversorgung PE-Leiter
A3 & B3	Netzversorgung L2-Leiter	A3 & B3	18...36 VDC (nur bei 24V-Version)
A4	Relais 0 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)	B4	Relais 0 Öffner
A5	Relais 0 Schließer	B5	Relais 1 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)
A6	Relais 1 Öffner	B6	Relais 1 Schließer
A7	Relais 2 Öffner	B7	Relais 2 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)
A8	Relais 3 Öffner	B8	Relais 2 Schließer
A9	Relais 3 Schließer	B9	Relais 3 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)
A10	Masse Stromausgang 0	B10	Stromausgang 0
A11	Masse Stromausgang 1	B11	Stromausgang 1
A12	Hold	B12	Stromausgang 2
A13	Hold	B13	Stromausgang 3
A14	+12V Versorgungsspannung CAN	B14	CAN L
A15	-12V Versorgungsspannung CAN	B15	CAN H
A16	B(-) RS485	B16	Relais 4 Schließer
A17	TxD - RS232	B17	Masse RS232/RS485
A18	A(+) RS485	B18	RxD - RS232
A19	Relais 4 Öffner	B19	Relais 4 Wechsler (max. 24 V AC/DC, 0,3 A)

Die Masseanschlüsse der Stromausgänge sind alle auf das gleiche Potential bezogen

Den Anschlussplan der Vorgängerversion entnehmen Sie dem Anhang!

Sensoreingänge KM 3000

Klemme	Potentiometrische Sensoren (z. B. pH-/Redox-/ISE-Messketten)	Amperometrische und konduktive Sensoren (z. B. Sauerstoff- sensoren, Leitfähig- keits-Messzellen)	Spannungs-/Strom- Eingangssignal (lineare Kennlinie)	Durchflusssensor
X.1	Messelektrode	Signalleiter	Signalleiter +	frei
X.2	frei	Schirm	Signalleiter -	frei
X.3	Schirm/ Bezugselektrode	frei	frei	frei
X.4	Schirm/ Bezugselektrode	frei	frei	frei
X.5	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	GND
X.6	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Frequenzausgangs- signal von Durchfluss- sensor
X.7	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	GND
X.8	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	+5 V Versorgungs- spannung für Sensor

X bezeichnet die jeweilige Positionsnummer (0-3) des Sensors

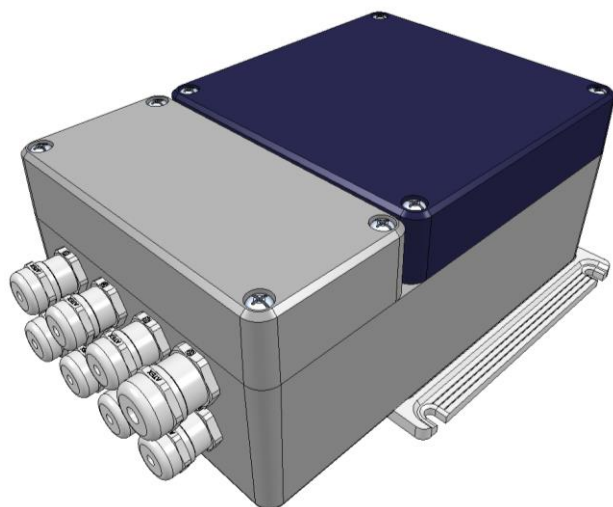


Die Messeingänge müssen potentialfrei sein und dürfen keine Verbindung zu netzspannungsführenden Potentialen haben. Alle Eingänge dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Sensoren betrieben werden. Direktes Anschließen von artfremden Signalen ist nicht erlaubt.


4.2 Anschluss externer Module

Das Messsystem KM 3000 ist so ausgelegt, dass Sie weitere Messverstärker bzw. Stromausgänge anschließen können. Der Aufbau des Bussystems erfordert eine Reihenschaltung der Module, wobei die Busleitung durch das externe Modul gebrückt werden kann.

Nehmen Sie Ihre Anlage für den Zeitraum der Installation außer Betrieb!




KM3000-E
(Erweiterungsmodul für bis zu 5 Messmodule)

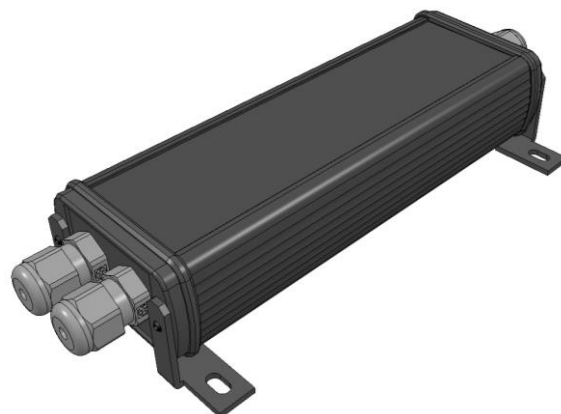

externes Messmodul
(max. 1 Parameter)
nicht mehr lieferbar

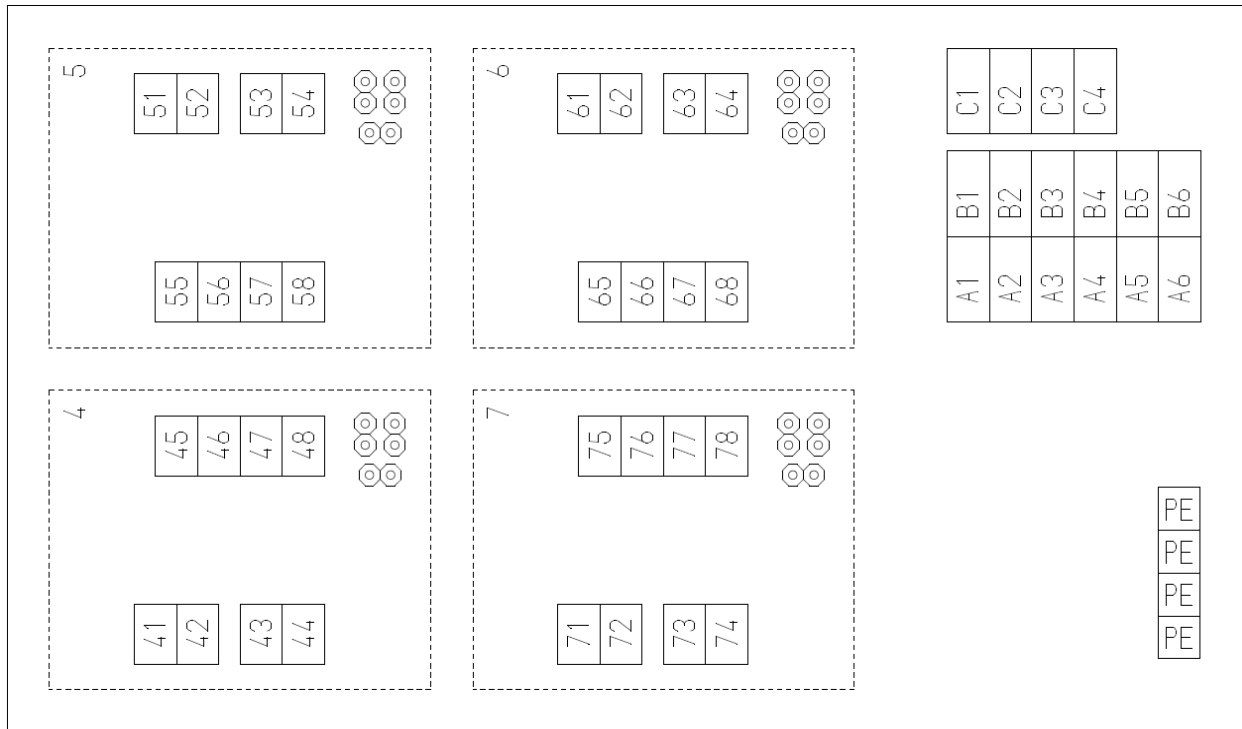4.2.1 Belegungsplan KM3000-E



Klemme	Bezeichnung	Klemme	Bezeichnung
A1	+12V Versorgungsspannung CAN	B1	CAN L
A2	-12V Versorgungsspannung CAN	B2	CAN H
A3	Relais 0 (max. 24 V DC, 5 A)	B3	Relais 0 (max. 24 V DC, 5 A)
A4	Relais 1 (max. 24 V DC, 5 A)	B4	Relais 1 (max. 24 V DC, 5 A)
A5	Relais 2 (max. 24 V DC, 5 A)	B5	Relais 2 (max. 24 V DC, 5 A)
A6	Relais 3 (max. 24 V DC, 5 A)	B6	Relais 3 (max. 24 V DC, 5 A)
C1	CAN L	C3	+12V Versorgungsspannung CAN
C2	CAN H	C4	-12V Versorgungsspannung CAN

Klemme	Potentiometrische Sensoren (z. B. pH-/Redox-/ISE-Messketten)	Amperometrische und konduktive Sensoren (z. B. Sauerstoff- sensoren, Leitfähig- keits-Messzellen)	Spannungs-/Strom- Eingangssignal (lineare Kennlinie)	Durchflusssensor
X.1	Messelektrode	Signalleiter	Signalleiter +	frei
X.2	frei	Schirm	Signalleiter -	frei
X.3	Schirm/ Bezugselektrode	frei	frei	frei
X.4	Schirm/ Bezugselektrode	frei	frei	frei
X.5	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	GND
X.6	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Frequenzausgangs- signal von Durchfluss- sensor

X.7	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	GND
X.8	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	+5 V Versorgungsspannung für Sensor

X bezeichnet die jeweilige Positionsnummer (4-7) des Sensors

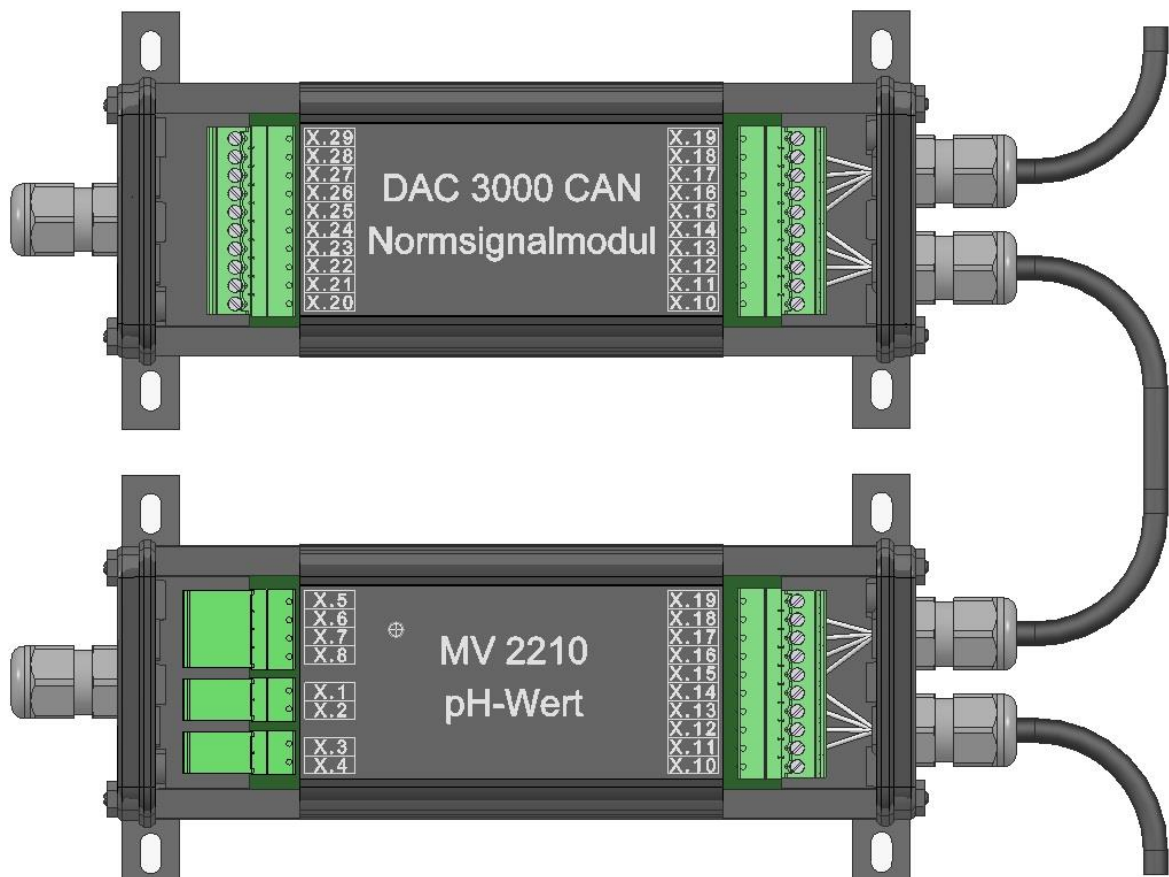


Die Messeingänge müssen potentialfrei sein und dürfen keine Verbindung zu netzspannungsführenden Potentialen haben. Alle Eingänge dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Sensoren betrieben werden. Direktes Anschließen von artfremden Signalen ist nicht erlaubt.

4.2.2 Belegungsplan/Anschluss externes Messmodule

Öffnen Sie das Modul an der Seite für den Busanschluss (2 Schrauben unter den Abdichtkappen). Falls das Modul schon verkabelt ist, dann lösen Sie die PG Verschraubungen, um den Deckel abzuziehen zu können. Ziehen Sie nun den Steckverbinder ab. Verbinden Sie das Buskabel mit dem Messverstärker. Achten Sie auf die richtige Polarität der Versorgungsspannung sowie den richtigen Anschluss der Signalleitungen CAN-H und CAN-L. Sollte das neue Modul das letzte in der Kette sein, hat also nur einseitig den Buseingang, dann muss unbedingt an der offenen Busseite zwischen CAN-H und CAN-L ein Abschlusswiderstand (120 Ohm) eingefügt werden. Mittels Erdungsschraube wird jeweils der Schirm des Kabels am Deckel des Moduls befestigt. Damit wird das Gehäuse geerdet und innerhalb der Kette an das nächste Modul übertragen. Im Messgerät KM 3000 ist der Schirm auf einen der PE-Kontakte (PE 1 ... 4) zu klemmen. Stecken Sie den Steckverbinder wieder zusammen. Schrauben Sie nun den Deckel wieder auf das Modul. Achten Sie auf den richtigen Sitz des Dichtgummis. Die PG Verschraubung muss nun noch angezogen und die beiden Blenden für die Schrauben angebracht werden.

Nun können Sie das Netz wieder zuschalten. Wenn die Verkabelung ordnungsgemäß durchgeführt wurde, sehen Sie im ersten Anzeigefenster, wo alle angeschlossenen Module automatisch erkannt werden, das neu angeschlossene Modul. Nun können Sie alle weiteren Einstellungen vornehmen.



Sensoreingänge externe Messmodule

Klemme	Potentiometrische Sensoren (z. B. pH-/Redox-/ISE-Messketten)	Amperometrische und konduktive Sensoren (z. B. Sauerstoffsensoren, Leitfähigkeits-Messzellen)	Spannungs-/Strom-Eingangssignal (lineare Kennlinie)	Durchflusssensor
X.1	Messelektrode	Signalleiter	Signalleiter +	frei
X.2	frei	Schirm	Signalleiter -	frei
X.3	Schirm/Bezugselektrode	frei	frei	frei
X.4	Schirm/Bezugselektrode	frei	frei	frei
X.5	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	GND
X.6	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Temperaturfühler Anschluss 1	Frequenzgangssignal von Durchflusssensor
X.7	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	GND
X.8	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	Temperaturfühler Anschluss 2	+5 V Versorgungsspannung für Sensor

X bezeichnet die jeweilige Messverstärkernummer (Slave 0 – Slave 15)



Die Messeingänge müssen potentialfrei sein und dürfen keine Verbindung zu netzspannungsführenden Potentialen haben. Alle Eingänge dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Sensoren betrieben werden. Direktes Anschließen von artfremden Signalen ist nicht erlaubt.

Stromversorgung und Busverbindung Mess- und Aktormodule

Klemme	Bezeichnung / Funktion
X.10	frei
X.11	+12V Versorgungsspannung CAN
X.12	-12V Versorgungsspannung CAN
X.13	CAN L
X.14	CAN H
X.15	CAN L
X.16	CAN H
X.17	+12V Versorgungsspannung CAN
X.18	-12V Versorgungsspannung CAN
X.19	frei

Stromausgänge Normsignalmodul DAC 3000 CAN

Klemme	Bezeichnung / Funktion
X.20	frei
X.21	Stromausgang 0
X.22	Masse Stromausgang 0
X.23	Stromausgang 1
X.24	Masse Stromausgang 1
X.25	Stromausgang 2
X.26	Masse Stromausgang 2
X.27	Stromausgang 3
X.28	Masse Stromausgang 3
X.29	frei

X bezeichnet die jeweilige DAC 3000 CAN Nummer (Slave 64 – Slave 67)
Alle Massen (0-4) sind auf das gleiche Potential bezogen.



Relaisausgänge Aktormodul REL 2000 CAN

Klemme	Bezeichnung / Funktion
X.30	Relais 3
X.31	Relais 3
X.32	Relais 2
X.33	Relais 2
X.34	Relais 1
X.35	Relais 1
X.36	Relais 0
X.37	Relais 0

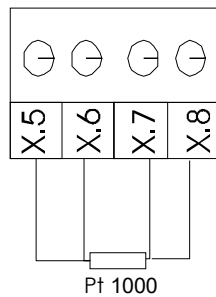
X bezeichnet die jeweilige REL 2000 CAN Nummer (Slave 68 oder Slave 69)

Kontakte sind Schließer, die mit max. $I \leq 5 \text{ A}$, $U \leq 24 \text{ V DC}$ (ohmsche Last) belastet werden können.

4.3 Anschlussschema der Sensoren


4.3.1 Temperaturfühler

Vierleiterschaltung




	X.5	X.6	X.7	X.8
	PT1000-1	PT1000-1	PT1000-2	PT1000-2
Messkabel K 43-PT/...	Seele	Seele	Schirm	Schirm

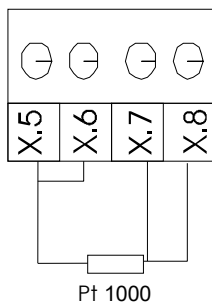Dreleiterschaltung




Zweleiterschaltung

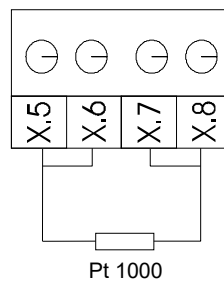


4.3.2 pH/Redox- und ionenselektive (ISE) Messketten

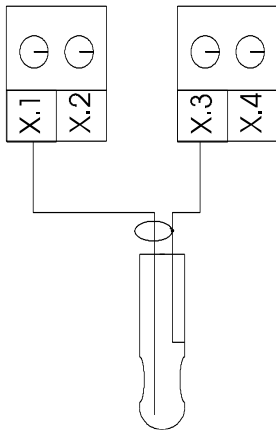Einstabmesskette




	X.1 pH-Signal	X.2	X.3 Referenz	X.4 Referenz
Messkabel K 43/...	Seele	-	Schirm	-

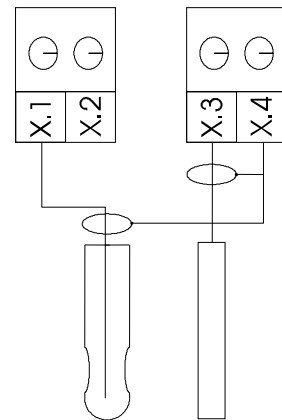Getrennte Messkette




	X.1 pH-Signal	X.2	X.3 Referenz	X.4 Referenz
pH-Sensor	Seele	-	-	Schirm
Bezugselektrode	-	-	Seele	Schirm

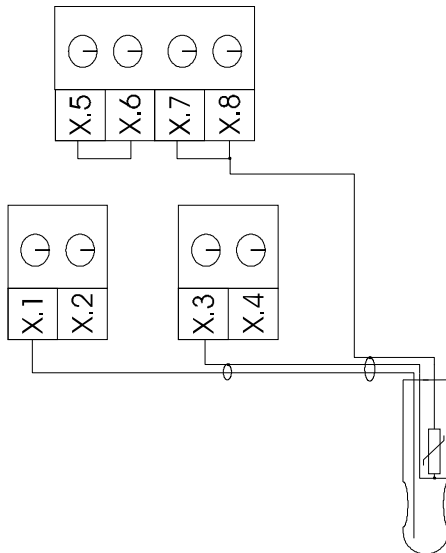pH-Einstabmesskette
mit integriertem Temperaturfühler
(Triaxialkabel K 54)



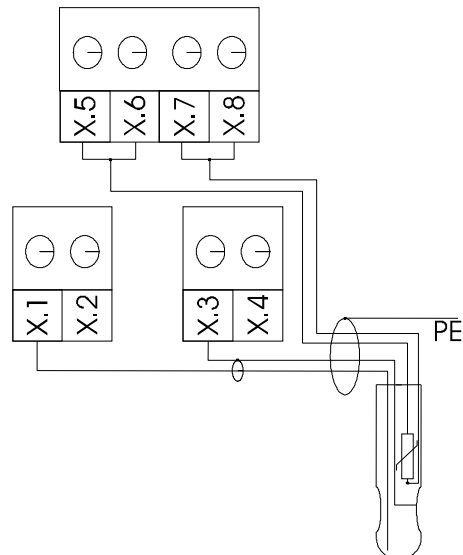
pH-Einstabmesskette
mit integriertem Temperaturfühler
(Messkabel K 19)



	X.1 pH-Signal	X.2 -	X.3 Referenz	X.4 Referenz	X.5 PT1000-1	X.6 PT1000-1	X.7 PT1000-2	X.8 PT1000-2
Messkabel K 54/...	Seele (blau)	-	inn.Schirm (rot)	-	Brücke zu X.6	Brücke zu X.5	Brücke zu X.8	äuß.Schirm (gr)
Messkabel K 19/...	Seele	-	Schirm	-	grün	braun	gelb	weiß
Messkabel K-VP/...	Seele	-	Schirm (rot)	-	grau	weiß	grün	rosa
Messkabel K19-VP/...	Seele	-	Schirm (rot)	-	grün	grün	braun	braun


4.3.3 Leitfähigkeits-Messzelle

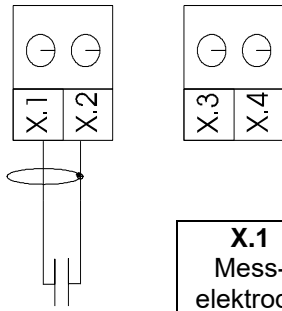2-Elektroden Leitfähigkeits-Messzelle




	X.1 Mess- elektrode	X.2 Mess- elektrode	X.3 -	X.4 -	X.5 PT1000-1	X.6 PT1000-1	X.7 PT1000-2	X.8 PT1000-2
Messkabel K 43/...	Seele	Schirm	-	-	-	-	-	-
Messkabel K 18/...	weiß	Schirm	-	-	grau	grün	braun	rosa
Messkabel K-VP/...	Seele	blau	-	-	grau	weiß	grün	rosa
Messkabel K19-VP/...	Seele	weiß	-	-	grün	grün	braun	braun

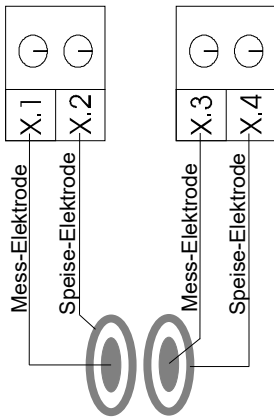4-Elektroden Leitfähigkeits-Messzelle



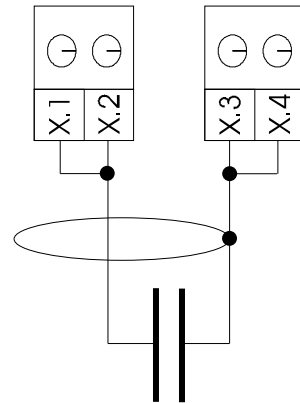
2-Elektroden Leitfähigkeits-Messzelle
an MVM2225



	X.1 Mes- selektro- de	X.2 Speisee- lektrode	X.3 Mes- selektro- de	X.4 Speisee- lektrode	X.5 PT1000-1	X.6 PT1000-1	X.7 PT1000-2	X.8 PT1000-2
Messkabel K 17/...	rosa	braun	grau	grün	Schirm	weiß	gelb	blau
Messkabel K-VPLF4/	Seele	Schirm (rot)	grau	blau	weiß	weiß	grün	rosa
Messkabel K19-VP/...	Seele	Schirm (rot)	gelb	weiß	grün	grün	braun	braun

4.3.4 Sauerstoffsensor

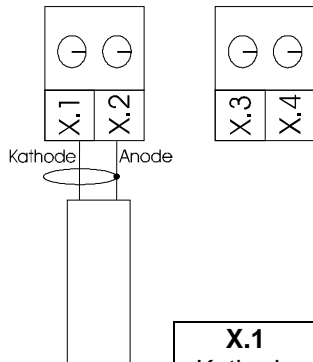
Membranbedeckter amperometrischer Sauerstoffsensor




	X.1 Kathode	X.2 Anode	X.3 -	X.4 -	X.5 PT1000-1	X.6 PT1000-1	X.7 PT1000-2	X.8 PT1000-2
Messkabel K 39/...	weiß	Schirm	-	-	grau	braun	grün	rosa
MF 41-N, MF 441 Festkabel	weiß	Schirm	-	-	grau	grün	braun	gelb
Messkabel K-VP	Seele	Schirm (rot)	-	-	grau	weiß	grün	rosa
Messkabel K19-VP/...	Seele	Schirm (rot)	-	-	grün	grün	braun	braun

4.3.5 Chlor-Messzelle, Trübungssonde und Sensor mit analogem Ausgangssignal

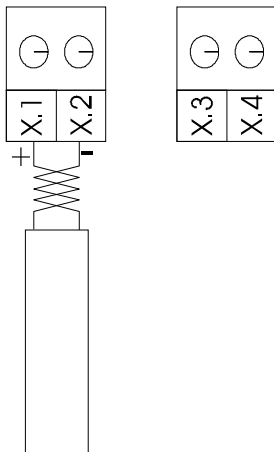
Chlor-Messzelle



Trübungssonde

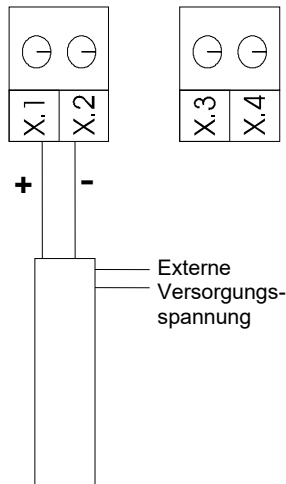


Sensor mit analogem Ausgangssignal

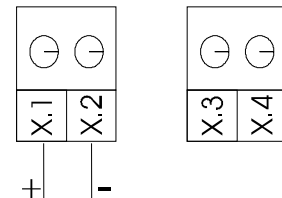

Ein Temperaturfühler kann entspr. Pkt. 4.3.1 angeschlossen werden.

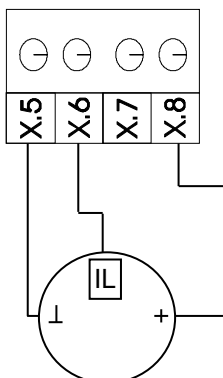4.3.6 Durchflusssensor



4.4 Einfluss der Kabellänge

Die Busverbindung zwischen den Modulen und zum KM 3000 und die individuelle Stromversorgung der Module ermöglicht Kabellängen bis max. 800 m. Zur Verbindung zwischen den Modulen und zum KM 3000 ist unbedingt spezielles, dafür vorgesehenes Kabel verwenden. Setzen Sie sich dazu mit dem Hersteller oder Lieferanten Ihres Messsystems in Verbindung. Der Anschluss ist einfach zu realisieren. Für bis zu max. 12 externe Messmodule wird die Versorgungsspannung der Module vom KM 3000 bereitgestellt. Im letzten Modul der Kette ist ein Abschlusswiderstand an der offenen Busverbindung zwischen CAN-H und CAN-L entspr. Pkt. 4.2 einzufügen. Die Module können entweder direkt in der Nähe des KM 3000 oder als Vorverstärker in der Nähe der Sensoren angeordnet werden. Die Reihenschaltung ermöglicht ebenso problemlos eine nachträgliche Erweiterung des Messsystems um ein oder mehrere Module. Ohne Einsatz eines Impedanzwandlers sollte die Sensorleitung für potentiometrische Sensoren 10 m nicht übersteigen. Für konduktometrische und amperometrische Sensoren und Messzellen sind die max. Sensorleitung auf 20 m begrenzt. Detaillierte Informationen finden Sie in den Datenblättern und technischen Hinweisen zu den Sensoren.

5 Grundfunktionen des Messsystems KM 3000

5.1 Messgrößen

Jeder Messmodul ist dafür ausgelegt, eine Haupt-Messgröße und die Temperatur zu erfassen. Darüber hinaus werden zu jeder Haupt-Messgröße eine oder mehrere sogenannte Neben-Messgrößen berechnet bzw. direkt gemessen. Auch diese Neben-Messgrößen können ausgewählt und auf der Anzeige dargestellt werden (siehe 5.2 Anzeigeelemente).

Temperatur

Jeder Messmodul verfügt über einen eigenen Eingang zum Anschluss eines Temperaturfühlers Pt 1000. Diese Temperaturmessung kann für die automatische Temperaturkompensation des Messparameters oder anderer Messparameter benutzt werden. Als Kalibrierung ist die Eingabe einer additiven linearen Nullpunktverschiebung (Offset) möglich. Die Anzeige des Temperaturwertes kann individuell festgelegt werden. Prinzipiell erfolgt die Temperaturmessung im Bereich -10 bis 130 °C. Für die automatische Temperaturkompensation stehen jedoch in Abhängigkeit der verwendeten Sensoren nur eingeschränkte Wertebereiche zur Verfügung.

Redoxpotential

Die Spannungsdifferenz zwischen Mess- und Bezugselektrode wird bei der Redoxpotentialmessung direkt angezeigt. Als Neben-Messgröße wird die Umrechnung des Redoxpotentials auf das Potential der Standardwasserstoffelektrode nach DIN 38404 Teil 6 angeboten. Hierzu ist eine Temperatureingabe oder die Nutzung einer Temperaturmessung erforderlich. Als Kalibrierung ist die Eingabe einer additiven linearen Nullpunktverschiebung (Offset) möglich. Die Breite des Eingangsspannungsbereichs beträgt ± 2000 mV.

pH-Wert

Haupt-Messgröße ist der pH-Wert, der aus der direkt gemessenen Kettenspannung (Neben-Messgröße) der Messkette berechnet wird. Zur genauen Ermittlung des pH-Wertes ist eine Kalibrierung d. h. die Anpassung der Messung an die spezifischen Kenndaten der Messkette erforderlich. Die Steilheit der pH-Messkette gibt die Änderung der Spannung in Abhängigkeit vom pH-Wert an (mV/pH). Der zweite Parameter ist die Offsetspannung beim Kettennullpunkt pH 7 (Asymmetriespannung). Die temperaturabhängige Änderung der Steilheit der Messkette kann automatisch kompensiert werden (automatische Temperaturkompensation ATC). Das KM 3000 unterstützt Einpunkt-, Zweipunkt- oder automatische Kalibrierung mit vorgegeben bzw. frei auswählbaren pH-Pufferlösungen.

Leitfähigkeit

Die Messbereiche für die Leitfähigkeitsmessung mit konduktometrischen Zwei-Elektroden-Messzellen betragen 0 bis 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 bis 2 mS/cm , 0 bis 20 mS/cm und 0 bis 100 mS/cm . Für die Messung von Leitfähigkeiten bis zu 500 mS/cm steht ein Vier-Elektroden Messmodul und eine dazugehörige Elektrode zur Auswahl. Die nutzbaren Messbereiche sind abhängig von der Zellkonstante der verwendeten Messzelle. Eine automatische Temperaturkompensation erfolgt über die Temperaturmessung z. B. mit dem in der Messzelle integrierten Temperaturfühler. Das KM 3000 Messsystem unterstützt die nichtlineare (nlf) automatische Temperaturkompensation, die lineare automatische Temperaturkompensation mit einstellbarem Temperaturkoeffizienten, beide bezogen auf die Referenztemperatur 25 °C, und die Messung

ohne Temperaturkompensation. Die Kalibrierung zur Ermittlung der Zellkonstante der Leitfähigkeits-Messzelle erfolgt entsprechend Abschnitt 9.2.2.

Als berechnete Nebenmessgrößen werden Widerstand und Salinität angeboten. Die Salinität ist ein Summenparameter speziell für Meerwasser. Grundlage für die Berechnung der Salinität aus dem temperaturkompensierten Leitfähigkeits-Messwert sind die Tabellen des National Institute of Oceanography of Great Britain and UNESCO. Diese Tabellen definieren die Salinität in einem Bereich von 2 bis 42 g/kg. Deshalb erfolgt nur in den Leitfähigkeitsbereichen 0 bis 20 mS/cm und 0 bis 100 mS/cm bzw. 0 bis 500 mS/cm beim Vierpol- Messmodul eine diesbezügliche Berechnung. In den Messbereichen 0 bis 200 µS/cm und 0 bis 2 mS/cm wird die Salinität immer mit 0 ausgegeben. Zur Temperaturkompensation wird eine spezielle nicht lineare Funktion für Seewasser verwendet. Die Kalibrierung zur Ermittlung der Zellkonstante der Leitfähigkeits-Messzelle erfolgt entsprechend Abschnitt 9.2.2.

Sauerstoffgehalt

Die Sauerstoffmessung ist auf membranbedeckte amperometrische Sensoren mit integriertem Temperaturfühler aus der Fertigung des Geräteherstellers abgestimmt (Einsatz anderer Sensoren auf Anfrage). Messsignal ist der Diffusionsgrenzstrom des Sensors beim Anlegen einer geeigneten Polarisationsspannung. Aus dem Diffusionsstrom werden Sauerstoffpartialdruck, prozentuale Luft-Sättigung (Sauerstoffsättigungsindex nach DIN 38404 Teil 23) sowie der Sauerstoffgehalt als Massekonzentration (mg/l) des gelösten Sauerstoffs in wässrigen Medien berechnet. Bei Messungen in Gasen wird der Messwert in Volumenkonzentration (Vol. %) dargestellt (Sonderausführung). Das Messsystem KM 3000 unterstützt eine Einpunktkalibrierung durch Vergleich mit bekannten Messwerten oder eine automatische Luftkalibrierung.

Chlor (freies Chlor, Gesamtchlor, Chlordioxid, Ozon und weitere Desinfektionsmittel)

Die verwendeten Sensoren zur Erfassung der Konzentration von Desinfektionsmitteln liefern einen normierten Ausgangsstrom (4...20 mA). Das Messsignal wird in der Messzelle temperaturkompensiert. Der entsprechende Messmodul gewährleistet die Stromversorgung der Messzelle über eine Zweidrahtverbindung einschließlich galvanischer Trennung. Eine Einpunktkalibrierung durch Vergleich mit bekannten Messwerten ist in regelmäßigen Zeitabständen erforderlich.

Trübung

Für die Messung der Trübung ist eine spezielle Messsonde erforderlich. Die Messkurve wird mittels der Eingabe von zwei Werten, die für jede Sonde festgelegt sind, genau beschrieben. Die Trübungssonde erfordert eine externe Stromversorgung, die zusammen mit der Sonde geliefert wird.

Allgemeine lineare und logarithmische Kennlinie

Als zusätzliche Option werden Messmodule für analoge Strom- oder Spannungs-Eingangssignale bereitgestellt. Über die lineare Kennlinie kann der Verlauf der Messkurve fest eingestellt oder durch Zweipunktkalibrierung ermittelt werden. Diese Module ermöglichen die Einbindung externer Messgeräte und den Anschluss von Sensoren mit integrierter Elektronik.

Eine weitere Option ist die logarithmische Kennlinie. Dadurch können Eingangssignale verarbeitet werden, bei denen der Zusammenhang zwischen Messgröße und Sensorsignal folgender Gleichung entspricht:

$$U = U_0 + S \cdot \lg MW$$

MW: Messwert



U: Ausgangsspannung des Messmoduls / Sensors

U₀: Konstante

S: Steilheit

Die Verwendung der logarithmischen Kurve setzt immer eine vorhergehende Zweipunktkalibrierung voraus. Die logarithmische Kennlinie ermöglicht in Verbindung mit dem Messmodul MV 2216 bzw. MVM 2216 die Umrechnung und Anzeige des Messsignals ionenselektiver Elektroden in Konzentrationseinheiten entspr. der Kalibrierung.

5.2 Anzeigeelemente

Nach dem Anlegen der Netzspannung an das KM 3000 wird das Gerät initialisiert. Danach werden alle möglichen Slaves (Messmodule) gesucht, die sich am CAN-Bus befinden können. Die angeschlossenen Messmodule werden automatisch erkannt und mit Ihrem Typ dargestellt. Nachdem alle Module erkannt worden sind, wechselt das Gerät sofort in die Messwertanzeige. Alle freigegebenen Ausgänge, wie Relais, Stromtreiber, Schnittstellenkommunikation und Datenloggerspeicherung sind nun aktiv. Mit den Pfeiltasten   können Sie sich nun zur gewünschten Anzeigeseite durchblättern. Die Darstellung der

einzelnen Messwerte kann individuell konfiguriert werden. So kann zu jeder Messgröße noch je ein von ihr abgeleiteter Messwert angezeigt werden.

S00 Ein- S00 93.5 % 9.3 21.2 °C	S01 S00 103 µS 21.2 °C
S02 fix -273 mV	S03 AUS- S00 7.03 pH 18.5 °C
GSM 29% PIN + SMS OK	
<<	MENU >>
R0:0 R1:1 23.01	

Die Zustände der internen Relais sind in einem Statusfeld unten rechts dargestellt. Der Zustand aktiv wird durch eine „1“ signalisiert. Befindet sich das Gerät im Zustand Hold (Timer bzw. manuelles Hold), so erfolgt im Wechsel mit der Relaisanzeige die Anzeige „Hold“. Zum Anzeigen des Status der externen Relais, wenn ein oder mehrere Relais-Module vom Typ REL 2000 CAN vorhanden sind, kann durch Berühren dieser Anzeigefläche umgeschaltet werden. Die Information „LIMIT“ erscheint im Wechsel mit der jeweiligen Statusinformation wenn der Messwert eines Messkanals außerhalb des Grenzwertbandes liegt (siehe Abs. 8.6). Ist ein GSM-Modem installiert, erfolgt eine Meldung über den Betriebszustand und die Stärke des Funksignals in der Statuszeile oberhalb der Menu Leiste. Jeder Messkanal verfügt über eine automatische Temperaturkompensation. Die Verknüpfung dieser Kompensation wird oberhalb der Einheit der Hauptgröße angezeigt. Sollte die Temperaturkompensation auf einen festen Temperaturwert eingestellt sein, wird „fix“ angezeigt.

Beispiele für Messwertdarstellungen

Messmodul	Haupt-Messgröße	Beispiele Neben-Messgrößen
MV 2210 / MVM 2210	pH-Wert	Kettenspannung in mV
MV 2215 / MVM 2215	Redox-Spannung in mV	Redox-Spannung in mV bezogen auf die Standardwasserstoffelektrode
MV 2216 / MVM 2216	Ionenkonzentration in Konzentrations-einheiten entspr. Sensorspezifikation (ISE) und Kalibrierung	Kettenspannung der ISE in mV
MV 2220 / MVM 2220	Leitfähigkeit in mS/cm, µS/cm	Widerstandswert in Ohm oder Salinität in g/kg
MV 2230 / MVM 2230	Sauerstoffsättigung in %	Sauerstoffkonzentration in mg/l

Ebenso kann bei Verwendung der Temperaturmessung des Moduls auch diese zur Anzeige gebracht werden.

Um zu erkennen, zu welchem Modul der Messwert gehört, wird die Messstellennummer immer in der linken oberen Ecke angezeigt. Damit der Überblick über die Messstellen nicht verloren geht, können noch individuelle Bezeichnungen (max. 10 Zeichen) vergeben werden.

Zusätzlich ist noch die aktuelle Uhrzeit auf jeder Anzeigeseite angeordnet.

Die Hintergrundbeleuchtung kann durch berühren der Uhr – Schaltfläche ausgeschaltet werden. Ein Berühren der Touch Anzeige schaltet die Hintergrundbeleuchtung wieder ein.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt durch das direkte Berühren der entsprechenden Schaltelemente bzw. Symbole.

5.3 Menüaufbau

Um von den einzelnen Menüpunkten wieder zur Messwertanzeige zu gelangen, müssen diese Menüs der Reihe nach geschlossen werden. Alle Menüpunkte des Gerätes, mit deren Hilfe gerätespezifische oder

sensorspezifische Daten justiert werden können, sind so aufgebaut, dass die geänderten Daten gespeichert oder verworfen werden können. Dazu stehen 2 Schaltflächen zur Verfügung:

Speichern und zurück



zurück ohne Speichern



Alle gerätespezifischen Daten können über den Menüpunkt **MENU** eingestellt werden. Dies sind alle Ausgabemöglichkeiten wie Stromausgabe, serielle Datenausgabe, Regler und Grenzwerte sowie bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten des Gerätes selbst. Diese Menüs sind mit einem Passwort geschützt.

Alle sensorspezifischen Einstellungen erfolgen in den Menüs zum Sensor (Messmodul). Diese Menüpunkte werden aufgerufen durch das Berühren der Anzeigefläche des jeweiligen Sensors (Messmodul). Als erstes erscheint eine Übersichtsseite zu den aktuellen Daten/Einstellungen der Messstelle. Alle Kalibrierdaten des Sensors, der Zeitpunkt der letzten Kalibrierung, die verwendete Temperaturkompensation, die Bezeichnung der Messstelle sowie Datenlogger und serielle Ausgabe werden angezeigt. Entsprechende Änderungen dieser Daten sind nur mit einem Passwort (**das Passwort bei Auslieferung ist „1“**) möglich.

5.4 Inbetriebnahme bzw. Ergänzung des Systems

1. Gerät einschalten.
2. Prüfen, ob alle Module (Slaves) erkannt werden.
3. Einrichten der Anzeige (Abschnitt 6).
4. Temperaturkompensation einstellen (Abschnitt 7 Temperaturkompensation).
5. Datenausgabe bzw. Datensicherung einstellen (Abschnitt 8 Datenkommunikation/Datensicherung).
6. Kalibrieren des Sensors (Abschnitt 9 Kalibrierung).
7. Stromausgänge, Grenzwerte, Regler einstellen (Abschnitte 10 Schalt- und Stromausgänge und 11 Regler).

6 Einrichtung der Anzeige

6.1 Neben-Messgrößen anzeigen/entfernen

1. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
2. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
3. Berühren Sie die Schaltfläche:



4. Geben Sie Ihr Passwort ein.
5. Wählen Sie den Menüpunkt **Anzeige Setup** aus.
6. Um Messwerte der Neben-Messgröße (Messwert 2) anzuzeigen, sollte ein \checkmark vor „MW2 anzeigen“ gesetzt sein. Um diesen Wert nicht anzuzeigen muss das Häkchen entfernt werden. Durch Berühren dieser Schaltfläche wechseln Sie zwischen beiden Werten.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder werfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Ein besonderes Leistungsmerkmal der Leitfähigkeitsmodule ist die Möglichkeit als Neben-Messgröße wahlweise den zugehörigen Widerstandswert oder die Salinität anzuzeigen. Dafür sind folgende Schritte notwendig:

1. Suchen Sie die Leitfähigkeits-Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
2. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
3. Berühren Sie die Schaltfläche:



4. Geben Sie Ihr Passwort ein.
5. Wählen Sie durch Berühren der Schaltfläche **Messwert 2** Widerstand oder Salinität aus. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Weiterhin besteht bei den Leitfähigkeitsmodulen für den Anschluss einer Zwei- oder Vierpol- Zelle die Möglichkeit den Messbereich auszuwählen. Dabei kann sowohl ein einzelner Messbereich aber auch eine automatische Umschaltung bei Messbereichsüberschreitung ausgewählt werden. Dafür sind folgende Schritte notwendig:

1. Suchen Sie die Leitfähigkeits-Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
2. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
3. Berühren Sie die Schaltfläche:



4. Geben Sie Ihr Passwort ein.
5. Durch Berühren der Schaltfläche **LF Messbereiche** wird ein Dialog geöffnet, der die aktuelle Auswahl anzeigt. Wählen Sie nun die gewünschte Einstellung aus. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Bei dem Sauerstoffmodul ist ein Umschalten der Hauptmessgröße möglich. Somit kann zwischen Prozent Sättigung oder Löslichkeit gewählt werden. Dafür sind folgende Schritte notwendig:

1. Suchen Sie die Sauerstoff-Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
2. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
3. Berühren Sie die Schaltfläche:



4. Geben Sie Ihr Passwort ein.
5. Wählen Sie durch Berühren der Schaltfläche **mg/l** oder **%** den entsprechenden Messwert aus. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



6.2 Temperaturwert anzeigen/entfernen

1. Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



5. Geben Sie Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie den Menüpunkt **Anzeige Setup** aus.
7. Um den Temperaturwert anzuzeigen, sollte ein \surd vor „Anzeige Temp“ gesetzt sein. Um diesen Wert nicht anzuzeigen muss das Häkchen entfernt werden. Durch Berühren dieser Schaltfläche wechseln Sie zwischen beiden Werten.
8. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:




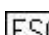


6.3 Individuelle Bezeichnung der Messstelle vergeben

1. Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



5. Geben Sie Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie den Menüpunkt **Anzeige Setup** aus.
7. Berühren Sie die Schaltfläche **Bezeichnung**.
8. Mit der angezeigten Tastatur können Sie nun einen beliebigen Text mit max. 10 Zeichen eingeben. Wichtige Tasten sind:

Tasten	Bedeutung
	SHIFT Umschaltung auf die 2. Tastaturebene
	ENTER Beenden mit Übernahme des Textes
	DELETE Löschen des letzten Zeichens
	ESCAPE Beenden ohne Übernahme des Textes

9. Beenden Sie die Eingabe des Textes mit ENTER. Die Schaltfläche **Bezeichnung** zeigt nun in der 2. Zeile Ihren eingegebenen Text an. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



7 Temperaturkompensation

7.1 Allgemeines

Das Messsystem KM 3000 ermöglicht mit einer Temperaturmessung die automatische Temperaturkompensation weiterer Messkanäle des Messsystem. Dazu müssen sich der jeweilige Messfühler und der Temperaturfühler Pt 1000 (Sonderversion: O₂-Messverstärker mit Temperatureingang für NTC 30 kΩ) im gleichen Messmedium befinden (Temperaturausgleich beachten). Unter Beachtung dieser Forderung ist es möglich, mittels einer einzelnen Temperaturmessung mehrere Messgrößen zu kompensieren. Die jeweilige Verknüpfung der Temperaturkompensation wird in der Anzeige oberhalb der Einheit des Hauptmesswertes angezeigt. Es ist aber auch möglich, für jeden Messkanal eine Festtemperatur zur Kompensation einzustellen. Ist ein Festwert eingestellt, erscheint die Anzeige „fix“.

Beachten Sie, wenn ein Temperaturfühler bzw. Sensor zur Temperaturkompensation eines anderen Sensors benutzt wird, dass dieser beim Kalibrieren mit in die Kalibrierlösung getaucht werden muss, um auch beim Kalibrieren den Temperaturausgleich bzw. die Temperaturkompensation zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass auch bei Übernahme der Temperaturmessung für eine Messstelle zur Temperaturkompensation entspr. 7.2 die Temperaturanzeige für diese Messstelle den Wert entsprechend dem für diese Messstelle angeschlossenen Temperaturfühler anzeigt. Ist kein Temperaturfühler angeschlossen, ist die Temperaturanzeige dieser Messstelle entspr. Pkt. 6.2 auszuschalten.

7.2 Einstellen eines Temperaturmesskanals für eine Messstelle

1. Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



5. Geben Sie Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie den Menüpunkt **Temperatur Setup** aus.
7. Die Schaltfläche **Festtemperatur** muss „N“ anzeigen. Ist dies nicht der Fall, dann berühren Sie diese Schaltfläche einmal, s. d. diese auf „N“ wechselt.
8. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Temp. SlaveX** und suchen Sie den Slave aus, der das Temperatursignal für die Kompensation bereitstellt.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



7.3 Einstellen einer Festtemperatur für eine Messstelle

1. Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



5. Geben Sie Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie den Menüpunkt **Temperatur Setup** aus.
7. Die Schaltfläche **Festtemperatur** muss „Y“ anzeigen. Ist dies nicht der Fall, dann berühren Sie diese Schaltfläche einmal, s. d. diese auf „Y“ wechselt.
8. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Festtemperatur**, und geben Sie im folgenden Eingabedialog den Temperaturwert ein. Beenden Sie diesen Dialog mit Enter.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



8 Datenkommunikation/Datensicherung

8.1 serielle Schnittstellen

Das Mehrparameter-Messgerät KM 3000 verfügt über zwei serielle Schnittstelle, eine RS-232 und eine RS-485 Schnittstelle. Beides Schnittstellen können individuell konfiguriert werden und können als Protokoll sowohl ein zyklisches ASCII-Protokoll zur Verfügung stellen als auch über ein Modbusprotokoll kommunizieren.

Zur komfortablen Datenaufzeichnung und –auswertung auf einen PC kann das ASCII Protokoll in Verbindung mit dem Visualisierungsprogramm MVremote benutzt werden. Gleichzeitig gewährleistet dieses Programm die Auswertung des Datenloggers und die Änderung von Konfigurationen (diese Funktion ist nur über die RS232 Schnittstelle verfügbar) des KM 3000.

Beide Schnittstellen arbeiten unabhängig voneinander und können somit parallel betrieben werden. Vor dem Anschluss der Verbindungskabel ist das Gerät vom Netz zu trennen.

Je nach Art der Schnittstelle sind folgende Klemmstellen zu benutzen:

serielle Schnittstelle RS-232

Klemmstelle	RS232 Bezeichnung
B18	RxD
A17	TxD
B17	GND

serielle Schnittstelle RS-485

Klemmstelle	RS485 Bezeichnung
A18	A(+)
A16	B(-)
B17	GND

120 Ohm Abschlusswiderstand erforderlich

8.2 serielle Datenausgabe ASCII

Um einen Messwert zyklisch auf der Schnittstelle ausgeben zu können, sind 2 Einstellungen nötig. Zum einen ist das die Grundeinstellung des Gerätes, wo der Ausgabezyklus festgelegt wird. Zum anderen müssen die einzelnen Messstellen der Reihe nach für die Datenausgabe freigegeben werden.

Die einzelnen Datenblöcke bestehen immer aus 10 Byte Länge. Jede Zeile beginnt mit einer Startsequenz sowie Datum und Uhrzeit und gibt dann alle freigegebenen Messkanäle hintereinander aus. Die Datenübertragungsrate kann individuell angepasst werden von 9600 Baud bis 38400 Baud, 1Stopp Bit und keine Parität. Alle Ausgabebezeichnungen sind ASCII Format. Dieses Protokoll kann sowohl über die RS232 als auch über die RS485 kommunizieren. Es ist vollständig kompatibel zum ASCII Protokoll des Vorgängergerätes KM 2000.

Statusinformationen übertragen:

Relaisausgänge können für die Überwachung von Grenzwerten oder Alarmzuständen und die Schaltung bestimmter Funktionen genutzt werden. In diesem Fall kann es vorteilhaft sein, den Zustand der Relais über die serielle Schnittstelle mit zu übertragen. Die Konfiguration der Relaisausgänge erfolgt am KM 3000 entsprechend Abschnitt 10.1 „Konfigurieren eines Relaisausganges“.

Darüber hinaus ist es in bestimmten Anwendungen vorteilhaft, Grenzwerte für die Eigenüberwachung des Messsystems einschließlich Diagnosefunktion festzulegen. Hier kann der Anwender die vorhandenen Erfahrungen über den Bereich, in dem sich die Messwerte üblicherweise bewegen, nutzen und individuelle Grenzwerte definieren, bei deren Über- oder Unterschreitung Wartungsanforderungen ausgelöst werden. (siehe Abschnitt 8.6 „Justierung individueller Grenzwertbänder“).

Weiterhin werden bestimmte Zustände des Systems mit übertragen.

Die serielle Ausgabe der Zustände aller am Gerät verfügbaren Relais, der Messbereichsgrenzen sowie der Statusinformationen erfordert die Freigabe zur seriellen Datenausgabe in der Grundeinstellung (siehe

Abschnitt 8.2.2. „Grundeinstellung“). Die Statusinformationen werden nach dem letzten übertragenen Wert an das Protokoll angehängt.

Die Ausgabe erfolgt in folgender Form:

Bezeichnung	Start Zeile	Datum/Uhrzeit	Wert 1	Wert x
Daten	0x13 0x10	ddmmyyhhminmin	EEEEWWWWWW	EEEEWWWWWW
Datenlänge in Byte	2	10	10	10

Statusinformationen:

Start	Status Relais	Trennzeichen	Status Messwerte	Status
STATUS	RRRRRRRRRRRR		LLLLLLLLLLLLLLLL	SSSS
7	12	1	16	4

dd 2 Byte Tag
 mm 2 Byte Monat
 yy 2 Byte Jahr
 hh 2 Byte Stunde
 minmin 2 Byte Minute
 EEEE 4 Byte Einheit zum Messwert
 WWWWWW 6 Byte Meßwert
 R 1 Byte Status Relais
 L 1 Byte Status Messwerte
 SSSS 4 Byte Status Gerät

R- Status: 0: Relaiskontakt offen
 1: Relaiskontakt geschlossen
 3: Relais ist für diese Funktion nicht freigegeben

L- Status: 0: Messwert im Bereich
 1: Messbereichsunterschreitung
 2: Messbereichsüberschreitung
 3: Slave ist nicht verfügbar

Status Code	Bedeutung
0000	Gerät läuft ohne Beanstandung
0001	HOLD manuell ausgelöst
0002	HOLD durch Kalibriermodus
0003	HOLD durch Timer

Auch während des Zustandes HOLD findet eine Datenübertragung statt. Somit kann ein nachfolgendes System den Zustand des Gerätes überwachen.

Die Reihenfolge der Wertausgabe ist wie folgt festgelegt:

Hauptmesswert Slave0, Nebennesswert Slave0, Temperaturwert Slave0

Als nächstes folgen die 3 Werte für Slave1 bis Slave15 und im Anschluss daran die 4 virtuellen Kanäle mit je einem Wert. Alle nicht freigegeben Slaves bzw. Messwerte werden auch nicht ausgegeben. Im Anschluss an alle Daten folgen die Statusinformationen, wenn diese freigegeben sind.

Um alle Funktionen der Software „MVremote“ in Verbindung mit dem KM 3000 nutzen zu können, ist die Kommunikation über die RS232 erforderlich. Bei der Kommunikation über die RS485 lassen sich die Konfigurationseinstellungen, die Datenloggerfunktionen und die Logbuchfunktion nicht anwenden.

8.2.1 Freigabe der einzelnen Messwerte zur Datenausgabe

Vor der Grundeinstellung müssen die einzelnen Messwerte zur Datenausgabe freigegeben werden. Die Ausgabereihenfolge wird durch die Slave Nummer festgelegt.

- Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
- Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
- Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
- Berühren Sie die Schaltfläche:



- Geben Sie Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Datenausgabe** aus.

7. Vor der Schaltfläche „seriell MW“ muss das Häkchen gesetzt sein, damit dieser Wert ausgegeben wird. Um diesen Wert nicht auszugeben muss das Häkchen entfernt werden. Durch Berühren dieser Schaltfläche wechseln Sie zwischen beiden Werten.
8. Genau so können Sie die beiden anderen Messwerte, Messwert 2 bzw. Temperaturwert, für die Ausgabe freigeben.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



8.2.2 Grundeinstellung

Mit der Grundeinstellung wird das Zeitintervall eingestellt, aller wie viel Minuten/Sekunden die Messwerte ausgegeben werden sollen, sowie die Baudrate, der Schnittstellentyp (RS232 oder RS485), das Anhängen der Statusinformation und die allgemeine Freigabe des ASCII Protokolls festgelegt.

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **ASCII Protokoll**.
5. Stellen Sie die Baudrate auf den gewünschten Wert ein, indem Sie den Button **9600 / 19200 / 38400** so oft berühren, bis dieser auf der gewünschten Einstellung steht.
6. Stellen Sie den Schnittstellentyp auf RS232 oder RS485, indem Sie den Button **RS232/RS485** so oft berühren, bis dieser auf der gewünschten Einstellung steht.
7. Nun können Sie mit den Schaltflächen Minute und Sekunde das Zeitintervall einstellen.
8. Sollen die Zustände der Relais übertragen werden, dann ist die Schaltfläche **Statusinfo** auf „enable“ zu setzen.
9. Geben Sie die Kommunikation frei, indem Sie den Button **enable / disable** auf enable stellen.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Der Button **Ausgabe aller Werte disable** dient dazu, die im Abschnitt 8.2.1 gemachten Einstellungen für alle Slaves gleichzeitig auf den Wert disable zu setzen, s. d. kein Wert übertragen wird und die Einstellungen neu getroffen werden müssen. Die Verwendung dieses Buttons kann sinnvoll sein, wenn eine neue Grundeinstellung der auszugebenden Werte durchgeführt werden soll.

8.3 serielle Datenausgabe Modbus

Das KM 3000 ermöglicht die Einbindung in ein Modbus-System. Dabei ist es möglich die RS232 oder RS485 als Übertragungsmedium zu verwenden. Informationen zur Verwendung von Modbus TCP/IP (Modbus via Ethernet) finden Sie im Kapitel ETHERNET. Die Datensätze der Sensoren werden dabei in einem Sensordatenblock zur Verfügung gestellt. Die Datenübertragung erfolgt über Abfrage- und Antworttelegramme. Die Form der Telegramme legt das Modbus RTU-Protokoll fest. Der Modbus-Master sendet ein Anfragetelegramm mit einem Modbus Befehl an den Modbus-Slave. Dieser sendet dann entsprechend der Registerauswahl ein Antworttelegramm mit den angeforderten Daten.

Das Modbus- Protokoll des KM 3000 ist kompatibel zum Protokoll des KM 2000, s. d. bestehende Applikationen auf das KM 3000 problemlos angewendet werden können.

8.3.1 Protokollaufbau

Folgende Modbus Befehle können verwendet werden:

Funktion	Funktionsnummer
Lesen von n (max. 16) Worten, Read Input Register	0x04
Lesen von n (max. 16) Worten, Read Holding Register	0x03

Die Zuordnung der Registerblöcke erfolgt analog der Slave ID der Messstelle. Slave 0 wird somit mit den Registern 1 - 8, Slave 1 mit den Registern 9 – 16, u.s.w. angesprochen. Ein Register besteht dabei immer aus 2 Byte.

Die Aufteilung der Register im Datenblock ist wie folgt:

Slave ID	Register	Beschreibung	Datentyp
Slave 0	0001 Bit 7...0	Sensornummer (Slave ID)	Byte
	0001 Bit 15...8	Sensorstatus	Byte
	0002 Bit 7...0	Sensortyp	Byte
	0002 Bit 15...8	Gerätestatus	Byte
	0003 Bit 31...16	Temperaturmesswert	Float 32
	0004 Bit 15...0	Temperaturmesswert	
	0005 Bit 31...16	Hauptmesswert	Float 32
	0006 Bit 15...0	Hauptmesswert	
	0007 Bit 31...16	Nebemesswert	Float 32
	0008 Bit 15...0	Nebemesswert	
Slave 1	0009 Bit 7...0	Sensornummer (Slave ID)	Byte
	0009 Bit 15...8	Sensorstatus	Byte
	0010 Bit 7...0	Sensortyp	Byte
	0010 Bit 15...8	Gerätestatus	Byte
	0011 Bit 31...16	Temperaturmesswert	Float 32
	0012 Bit 15...8	Temperaturmesswert	
	0013 Bit 31...16	Hauptmesswert	Float 32
	0014 Bit 15...0	Hauptmesswert	
	0015 Bit 31...16	Nebemesswert	Float 32
	0016 Bit 15...0	Nebemesswert	
Slave 15	0121 Bit 7...0	Sensornummer (Slave ID)	Byte
	0121 Bit 15...8	Sensorstatus	Byte
	0122 Bit 7...0	Sensortyp	Byte
	0122 Bit 15...8	Gerätestatus	Byte
	0123 Bit 31...16	Temperaturmesswert	Float 32
	0124 Bit 15...0	Temperaturmesswert	
	0125 Bit 31...16	Hauptmesswert	Float 32
	0126 Bit 15...0	Hauptmesswert	
	0127 Bit 31...16	Nebemesswert	Float 32
	0128 Bit 15...0	Nebemesswert	
Relais	0129 Bit 7...0	Relaisstatus intern	Byte
	0129 Bit 15...8	Relaisstatus extern	Byte

Relaisstatus: Die Bits 0 bis 3 kennzeichnen den Zustand der KM 3000 internen Relais.
Die Bits 8 bis 15 kennzeichnen den Zustand zusätzlicher externer Relais.

Sensorstatus: 00: Messwert im Bereich
01: Messbereichsunterschreitung
02: Messbereichsüberschreitung

Gerätestatus: 00: Gerät läuft ohne Beanstandung
01: HOLD manuell ausgelöst
02: HOLD durch Kalibriermodus
03: HOLD durch Timer
04: CAL Fehler

Sensortyp	hex
pH Messverstärker	01
Redox	02
LF 0...200 μ S	03
LF 0...2mS	04
LF 0...20mS	05
LF 0...100mS	06
O2 Sauerstoff	08
Linear	09
ISE Ionenselektiv	0A
CL2 freies Chlor	0B
aLF 0...200 μ S	0C
aLF 0...2mS	0D
aLF 0...20mS	0E
aLF 0...100mS	0F
Freq.-Zähler	12
LF 0...200 μ S(4-Pol)	15
LF 0...2mS(4-Pol)	16
LF 0...20mS(4-Pol)	17
LF 0...500mS(4-Pol)	18
aLF 0...200 μ S(4-Pol)	19
aLF 0...2mS(4-Pol)	1A
aLF 0...20mS(4-Pol)	1B
aLF 0...500mS(4-Pol)	1C
LF 0...20 μ S ZK=0,1cm-1	1F
LF 0...2 μ S ZK=0,01cm-1	20
LF 0...200 μ S ZK=0,1cm-1	21
LF 0...20 μ S ZK=0,01cm-1	22

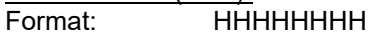
0x03...0x06 und 0x15 bis 0x18 sind feste Messbereiche Leitfähigkeit
0x0C...0x0F und 0x19 bis 0x1C sind automatische Messbereiche LF

Zahlenformate:

Float 32 Format nach IEE 754:




BYTE Format (8 Bit):



Datenverkehr und Timeout:

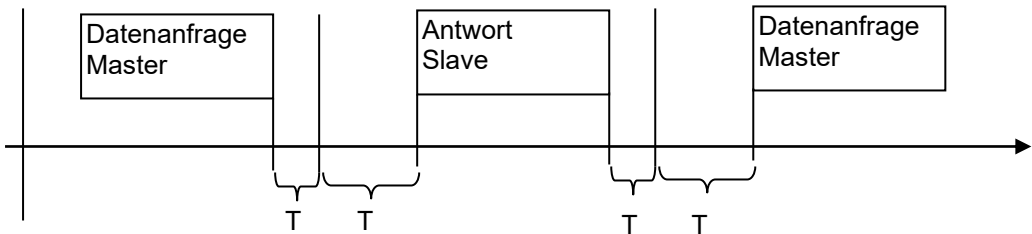Einer Datenanfrage vom Master folgt immer die Antwort vom Slave. Dabei sind bestimmte Timeout Zeiten einzuhalten.



- T1: Enderkennung Anfrageprotokoll (Achtung abhängig von der Baudrate, immer 3 Zeichen lang)
- T2: Bearbeitungszeit vom Slave (max. 100mS), während dieser Zeit darf sich keine weitere Datenanfrage auf dem Bus befinden.
- T3: Umschaltzeit vom Senden auf Empfang (nur bei RS485) max. 10 mS

T1 für unterschiedliche Baudraten:

Baudrate	T1 in mS Endekennung
9600	4,2
19200	2,18
38400	1,15

Beispiel:

Lesen der jeweils 8 Registern des Slave 0 und Slave 1 mit einer Datenabfrage.

Datenanfrage:

Slave-Adresse 1 Byte	Funktion 1 Byte	Anzahl Bytes 2 Byte		Wortanzahl 2 Bytes		Checksumme 2 Byte	
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x10	0x44	0x06

Antwort:

Slave-Adresse 1 Byte	Funktion 1 Byte	Anzahl Bytes 1 Byte	Datenblock x Bytes	Checksumme 2 Byte	
0x01	0x03	0x20	Siehe Tabelle	0x5A	0x09

Datenblock:

Slave ID	Register	Beschreibung	Datentyp		
Slave 0 8Register = 16 Byte	0x00	0001 Bit 0...7	Sensornummer (Slave ID)	Byte	Slave 0
	0x00	0001 Bit 8...15	Sensorstatus	Byte	Messwert im Bereich
	0x04	0002 Bit 0...7	Sensortyp	Byte	MB 0...200µS
	0x00	0002 Bit 8...15	Gerätstatus	Byte	ohne Beanstandung
	0x41,0xC5	0003 Bit 16...31	Temperaturmesswert	Float 32	24,7 °C
	0x7F,0x4A	0004 Bit 0...15	Temperaturmesswert	Float 32	
	0x42,0xC4	0005 Bit 16...31	Hauptmesswert	Float 32	98,1 µS
	0x35,0xBD	0006 Bit 0...15	Hauptmesswert	Float 32	
	0x41,0x23	0007 Bit 16...31	Nebemesswert	Float 32	10,2 kOhm
0x17,0x34	0008 Bit 0...15	Nebemesswert	Float 32		
Slave 1 8Register = 16 Byte	0x01	0009 Bit 0...7	Sensornummer (Slave ID)	Byte	Slave 1
	0x00	0009 Bit 8...15	Sensorstatus	Byte	Messwert im Bereich
	0x01	0010 Bit 0...7	Sensortyp	Byte	pH- Wert
	0x00	0010 Bit 8...15	Gerätstatus	Byte	ohne Beanstandung
	0x42,0x71	0011 Bit 16...31	Temperaturmesswert	Float 32	60,3 °C
	0x36,0x5D	0012 Bit 0...15	Temperaturmesswert	Float 32	
	0x40,0x9C	0013 Bit 16...31	Hauptmesswert	Float 32	8,89 pH
	0x7E,0xCE	0014 Bit 0...15	Hauptmesswert	Float 32	
	0x43,0x0B	0015 Bit 16...31	Nebemesswert	Float 32	139,9 mV
0xE8,0x1C	0016 Bit 0...15	Nebemesswert	Float 32		

8.3.2 Schnittstellenparameter

Mit der Grundeinstellung werden die Schnittstellenparameter eingestellt. Dazu zählen die Baudrate, die Parität/Stopp Bit und die Geräteadresse des KM 3000. Mögliche Schnittstellenparameter sind:

Baudrate:

- 9600
- 19200
- 38400

Parität und Stopp Bit:

- keine Parität 1 Stopp Bit (none 1stop)
- keine Parität 2 Stopp Bits (none 2stop)
- gerade Parität 1 Stopp Bit (even 1stop)
- gerade Parität 2 Stopp Bit (even 2stop)
- ungerade Parität 1 Stopp Bit (odd 1stop)
- ungerade Parität 2 Stopp Bit (odd 2stop)

Modbusadresse: 1...247

8.3.3 Einstellung der Parameter

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passwordeingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **MODBUS**.
5. Stellen Sie den Schnittstellentyp auf RS232 oder RS485, indem Sie den Button **RS232/RS485** so oft berühren, bis dieser auf der gewünschten Einstellung steht.
6. Nun können Sie die Schnittstelleparameter wie die Baudrate und die Parität einstellen, indem Sie den entsprechenden Button z. B. **9600 / 19200 / 38400** so oft berühren, bis dieser auf der gewünschten Einstellung steht.
7. Stellen Sie die Modbusadresse mit dem entsprechenden Button ein und geben Sie die Kommunikation frei, indem Sie den Button **enable / disable** auf enable stellen.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



8.4 Datenlogger

Der Datenlogger speichert alle für die Speicherung freigegebenen Messwerte inkl. Datum und Uhrzeit. Es können so ca. 100.000 Werte abgelegt werden. Das Abrufen dieser Werte kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die einfachste Möglichkeit ist die Übertragung des Datenloggerinhaltes auf einen USB Stick, der dazu auf die USB Schnittstelle aufgesteckt werden muss. Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung der Daten mittels RS232 Schnittstelle und den Ausleseprogramm DataReader oder komfortabel mit der Visualisierungssoftware MVremote. Mit der Software MVremote ist es auch möglich per Fernübertragung den Datenlogger auszulesen, wenn das KM 3000 über ein GSM Modem Modul verfügt und die SIM-Karte Datenübertragungen zulässt.

8.4.1 Freigabe der einzelnen Messwerte zur Datenspeicherung

Nach der Grundeinstellung müssen nun noch die einzelnen Messwerte zur Speicherung freigegeben werden. Die Ausgabereihenfolge wird durch die Slave Nummer festgelegt.

1. Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



5. Geben Sie Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie den Menüpunkt **Datenausgabe** aus.
7. Vor der Schaltfläche „Datenlog. MW“ muss das Häkchen gesetzt sein, damit dieser Wert ausgegeben wird. Um diesen Wert nicht auszugeben muss das Häkchen entfernt werden. Durch Berühren dieser Schaltfläche wechseln Sie zwischen beiden Werten.
8. Genau so können Sie die beiden anderen Messwerte, Messwert 2 bzw. Temperaturwert, für die Datenspeicherung freigeben.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



8.4.2 Grundeinstellung

Mit der Grundeinstellung wird die Abtastzeit d. h. das Zeitintervall für die Speicherung der Messwerte eingestellt. Sie legen fest, aller wie viel Minuten/Sekunden die Messwerte gespeichert werden sollen. Außerdem lässt sich noch die Art der Speicherverwaltung festlegen. Ringspeicher bedeutet, wenn der Speicher voll ist, wird die Datenaufzeichnung am Beginn des Speichers fortgesetzt. Dagegen beendet der endliche Datenlogger beim Erreichen des Speicherendes die Datenaufzeichnung. Eine RESET Schaltfläche kann genutzt werden, um den Datenspeicher zu löschen.

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Datenlogger**.
5. Legen Sie die Art der Datenspeicherung fest. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **endlich/Ringspeicher** so oft, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
6. Mit den Schaltflächen Minute und Sekunde können Sie das Zeitintervall einstellen. Im oberen Teil des Dialoges sehen Sie sofort, wie lange der Datenlogger mit den gemachten Einstellungen für einen Durchlauf die Daten aufzeichnen würde, bzw. welche Restlaufzeit noch zu erwarten ist.
7. Geben Sie den Datenlogger frei, indem Sie den Button **enable / disable** auf enable stellen.
8. Soll der Datenlogger gelöscht werden, verwenden Sie dazu den Button **RESET**. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Der Button **Ausgabe aller Werte disable** dient dazu, die im Abschnitt 8.4.1 gemachten Einstellungen für alle Slaves gleichzeitig auf den Wert disable zu setzen, so dass kein Wert gespeichert wird und die Einstellungen neu getroffen werden müssen. Die Verwendung dieses Buttons kann sinnvoll sein, wenn eine neue Grundeinstellung der zu speichernden Werte durchgeführt werden soll.

8.4.3 Kopieren des Datenloggerinhaltes auf einen USB Stick

Die einfachste Möglichkeit den Datenloggerinhalt auszulesen und die Daten mit einem Kalkulationsprogramm weiter zu bearbeiten ist es, diese Daten auf einen USB Stick zu kopieren. Zur Übertragung der Daten gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie dazu den Anschlusskasten des Gerätes und stecken Sie einen USB Stick auf die USB Schnittstelle. Achten Sie auf ausreichend freien Platz auf dem Stick. Bei einem vollen Datenlogger werden ca. 1,5 MB benötigt.
2. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie die Schaltfläche **Datenlogger**. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Copy → USB**. Die Aufbereitung der Daten und die Übertragung des gesamten Datenloggerinhaltes von 1 MB auf den USB Stick beträgt ca. 7 Minuten. Während dieser Zeit darf der USB Stick nicht abgezogen werden, sonst kann es zu Datenverlust auf dem Stick kommen bzw. zum Programmabsturz des KM 3000. Die Übertragung wird mit einem Fortschrittsbalken angezeigt. Nach Beendigung des Dialoges kann der Stick entfernt werden. Das Datenformat der Text- Tab Datei ist gleich dem Format beim Datentransfer mittels DataReader (siehe Abschnitt 8.4.5). Der Name der Datei auf dem Stick wird wie folgt festgelegt: dl_{Gerätenummer}.txt. Bitte beachten Sie vorhergehende Datendateien mit gleichem Namen überschrieben werden!

8.4.4 Software DataReader

Zum Auslesen des Datenloggers wird das Programm DataReader mitgeliefert. Mit diesem Programm kann der Datenlogger auch ohne das Visualisierungsprogramm MVremote über die RS-232-Schnittstelle ausgelesen werden. Der Anschluss des Schnittstellenkabels wird im Abschnitt „8.1 serielle Schnittstelle“ beschrieben. Die Software läuft ab Windows 95 und ist sehr einfach zu bedienen. Installieren Sie die Software, indem Sie auf der Installationsdiskette setup.exe starten. Nun werden Sie durch den Installationsprozess geführt. Ist dies ordnungsgemäß beendet, können Sie das Programm sofort benutzen. Stellen Sie zuerst mittels Button „Setup“ die Schnittstelle Ihres Rechners ein, die für die Datenübertragung genutzt werden soll. Verbinden Sie das KM 3000 über ein geeignetes Kabel mit dem PC. Befinden sich Daten im Datenlogger, so werden diese nach Betätigung des Buttons „Auslesen“ übertragen und in der zuvor ausgewählten Textdatei gespeichert. Alle Datensätze sind durch TAB getrennt.

Dateiaufbau:

Datum TAB Uhrzeit TAB Einheit 1.Wert TAB 1.Wert TAB Einheit 2.Wert TAB 2.Wert TAB...

Beispiel:

29.11.01	15:16	pH	6,99	µS	1961	°C	25,4
29.11.01	15:17	pH	6,99	µS	1961	°C	25,4

Damit ist es einfach möglich die Textdatei in ein anderes Programm zu importieren.

Eine weitaus komfortablere Lösung den Datenlogger auszulesen und zu konfigurieren, beinhaltet das Visualisierungsprogramm MVremote. Damit werden die Daten ausgelesen und gleich in einer Grafik dargestellt. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Lieferanten Ihres Messsystems.

8.4.5 Anzeige/Suche bestimmter Datensätze

Um sich vor Ort einen schnellen Überblick über Datensätze zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen, kann nach diesen im Datenlogger gesucht werden. Beachten Sie dabei, dass der Datenlogger konfiguriert und die entsprechenden Messwerte freigegeben sein müssen.


Folgende Vorgehensweise ist dazu erforderlich.

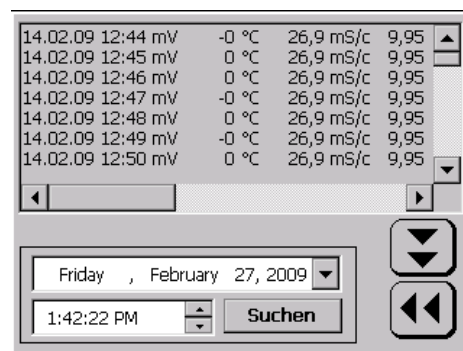
1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie die Schaltfläche **Datenlogger**. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Datensätze lesen**, im folgenden Dialogfeld kann ein Datum und eine Uhrzeit eingestellt werden. Mit dem Button „Suchen“ wird nach einem Datensatz zu diesem Zeitpunkt gesucht. Ist an dem angegebenen Zeitpunkt (mindestens an dem Tag muss ein Datensatz vorhanden sein) ein Datensatz vorhanden, wird dieser




und die folgenden max. 50 Datensätze angezeigt. Mit dem Button  können die folgenden max. 50 Datensätze angezeigt werden.



8.5 48 Stunden Datenrecorder

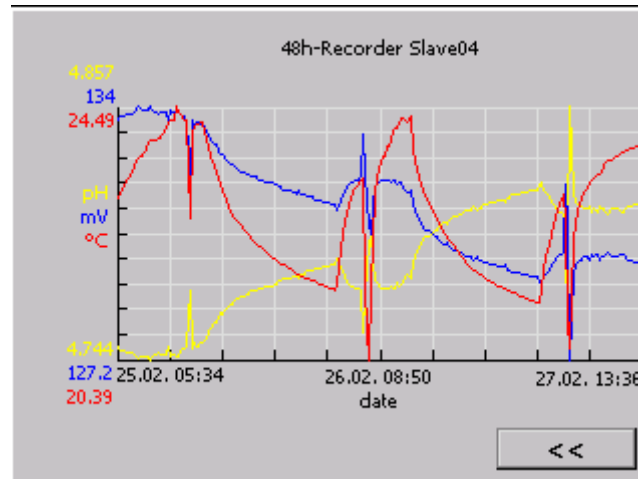Mit dem Datenrecorder kann grafisch der Messwertverlauf der Hauptmessgröße eines jeden Slaves während der letzten 48 Stunden auf dem Touchscreen Display dargestellt werden. Die Messwerte werden in einem Intervall von 12 Minuten aufgezeichnet. Die Achsen werden immer automatisch je nach Messwert zwischen Minimum und Maximum skaliert. Die entsprechenden Werte sind an der y-Achse aufgetragen. Die Darstellung der Hauptmessgröße erfolgt in gelber Farbe. Der Messwert2 wird blau und die Temperatur rot aufgetragen. Der Datenrecorder ist ohne Passworteingabe wie folgt zu erreichen:



1. Suchen Sie die Anzeigeseite des darzustellenden Messwertes.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



Beachten Sie, dass nach dem Einschalten des Gerätes die angezeigten Werte älteren Ursprungs sein können. Diese werden dann im Verlauf der nächsten 48 Stunden nach dem Einschalten überschrieben.

8.6 Justierung individueller Grenzwertbänder

Diese Einstellungen ermöglichen eine Überwachung des Messwertes (nur Haupt-Messgröße) hinsichtlich der Einhaltung individuell zu justierender Grenzen. Es wird dabei geprüft, ob der Messwert innerhalb der oberen bzw. unteren Grenze liegt. Diese Statusinformation wird bei der Datenübertragung seriell ausgegeben und kann vom Leitsystem weiterverarbeitet werden (siehe Pkt. 8.2).

Befindet sich ein Messkanal außerhalb des jeweiligen voreingestellten Grenzwertbandes, erscheint "LIMIT" im Wechsel mit der Relay- oder der "HOLD"- Statusinformation. Weiterhin blinkt in der entsprechenden Messwertanzeige nach dem Messwert die Information "Lim". Zur Überwachung der Grenzwertbänder steht auch die Funktion SMS Service zur Verfügung. Ist das KM 3000 mit einem GSM-Modem (siehe Abs. 8.7) verbunden und die Funktion SMS Service (siehe Abs. 8.7.2) ist freigegeben, wird bei Über- oder Unterschreitung eines Grenzwertbandes eine SMS-Nachricht an ein Mobiltelefon verschickt.

Für die Einstellung der individuellen Grenzwertbänder sind folgende Schritte notwendig:

1. Suchen Sie die Messwertanzeigeseite, wo die Einstellung vorgenommen werden soll.
2. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes.
3. Jetzt sehen Sie die aktuellen Einstellungen zur Messstelle.
4. Berühren Sie die Schaltfläche:



5. Geben Sie Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie den Menüpunkt **MB Grenzen Setup** aus.
7. Berühren Sie die entsprechende Schaltfläche für **obere Grenze** bzw. **untere Grenze** und geben Sie die entsprechenden Werte ein.
Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



8.7 Modembetrieb

Das KM 3000 ist so ausgelegt, dass ein GSM Modem Modul (GSM3000) in das Gerät integriert werden kann. Die Antenne wird über die PG Verschraubungen nach außen geführt. Mit dem integrierten Modem sind folgende Funktionen möglich:

- Datenfernabfrage (Auslesen Datenlogger und Logbuch) und Konfiguration des KM 3000 mit Hilfe des Visualisierungsprogramms MVremote
- Fernabfrage der aktuellen Messwerte
- Benachrichtigung bei Limitüberschreitung

Ist diese Modemfunktion im KM 3000 freigegeben, sucht das Gerät in der Initialisierungsphase nach dem angeschlossenen Modem. Wird das Modem gefunden, werden alle Funktionen freigeschaltet. Durch ein integriertes GSM Modem kann die Funktion SMS-Service genutzt werden. Damit kann eine SMS-Nachricht zu einem Funktelefon versandt werden, wenn sich ein Messkanal außerhalb seines Grenzwertbandes befindet. (siehe Abs. 8.7.2 und 8.7.3).

Zu beachten ist bei der Benutzung eines Funkmodems, dass ein entsprechender Datentarif (mit separater Telefonnummer für Datenkommunikation) verwendet werden muss, will man eine Datenverbindung zum Gerät herstellen.

8.7.1 Konfiguration des KM 3000 für den Modembetrieb

Ist ein Modemmodul GSM3000 vorhanden, kann das KM 3000 für den Modembetrieb konfiguriert werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworтеingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Modem**.
5. Setzen Sie das Modem auf **GSM**, indem Sie die Schaltfläche **off** berühren.
6. Menüpunkt **PIN** aufrufen und den PIN ihrer SIM-Karte korrekt eingeben und mit ENTER bestätigen.
!!! (Bei 3-maligem Neustart des KM 3000 mit falscher SIM-PIN wird der SIM-PIN gesperrt → Freischaltung nur mit PUK + Mobiltelefon möglich)
7. Um bei mehreren Geräten die Nachrichten beim SMS Empfang zuordnen zu können, kann dem KM 3000 ein individueller Name vergeben werden. Dazu die Schaltfläche **Bezeichnung** betätigen und einen Namen vergeben.
8. Beim Abrufen von Messwerten oder beim Überwachen des Gerätes mittels Limit SMS können max. 2 Rufnummern eingestellt werden, an die die entsprechenden Nachrichten verschickt werden. Bleibt eine Telefonnummer frei, wird die Nachricht nur an einen Teilnehmer verschickt. Zur Eingabe der Nummer wird der entsprechende Button **Telefonnummer** betätigt und die Rufnummer eingegeben.
9. Soll eine Benachrichtigung bei Grenzwertüberschreitung erfolgen (Einstellung des Grenzwertbandes siehe Abschnitt 8.6) muss der Button **Limit SMS enable** anzeigen.
10. Speichern der Auswahl



Damit die geänderten Einstellungen wirksam werden, muss das KM 3000 neu gestartet werden. Dazu können Sie die RESET Funktion (siehe Abschnitt: 13.4) verwenden oder das Gerät kurz vom Netz tren-

nen. Nach erfolgreichem Neustart und erfolgreicher Modem Initialisierung kann der aktuelle Status des Modems in der dafür vorgesehenen Statuszeile im Messwertfenster abgelesen werden. Weitere Informationen zur Modemfunktion entnehmen Sie bitte der Ergänzungsbedienungsanleitung **“Datenübertragung per Modem / SMS Service”**.

8.7.2 SMS Service

Beim KM 3000 mit integriertem GSM Modem Modul GSM3000 kann die Funktion SMS-Service genutzt werden. Verlässt der Messwert eines Messkanals einen vorher festgelegten Messbereich (Limit = Grenzwertband) wird eine entsprechende SMS-Kurznachricht an max. zwei voreingestellte Telefonnummern gesendet. Dies ist eine einfache Möglichkeit über aktuelle Probleme im Prozess informiert zu werden. Dazu muss für jeden Messwert das entsprechende Grenzwertband konfiguriert werden (siehe Abs. 8.6). Soll dieser Service für einzelne Messwerte nicht genutzt werden, so müssen deren Grenzwertbänder auf den Anfang und das Ende des Messbereiches gesetzt werden. Eine SMS-Benachrichtigung erfolgt nur bei Unter- oder Überschreitung des eingestellten Grenzwertbandes. Pro Messwert wird nur einmal eine SMS-Nachricht abgeschickt. Nach Erhalt dieser muss der SMS-Status im KM 3000 zurückgesetzt (Reset) werden. Danach ist der Service wieder für alle Messwerte frei geschaltet. Wird der SMS-Status im KM 3000 nicht zurückgesetzt, werden nur noch Nachrichten von Messkanälen verschickt, welche noch keine SMS-Nachricht verschickt haben.

Die SMS-Nachricht beinhaltet „KM3000“ + eine Information (frei wählbar → max. 10 Zeichen, z. B. den Standort des KM 3000) und den aktuellen Messwert mit Einheit welcher das Grenzwertband verlassen hat.

Beispiel:



Zum Einrichten dieses Services folgen Sie den Anweisungen, die im Abschnitt 8.7.1 erläutert sind. Da pro Messwert nur einmalig eine Limitüberschreitung gemeldet wird, muss diese im Gerät zurückgesetzt werden. Folgende Schritte sind dazu notwendig:

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Modem**.
5. Wurde mindestens eine Grenzwertüberschreitung per SMS verschickt, so ist der Button **Reset Limit SMS** zu sehen. Betätigen Sie diesen Button und die Signalisierung der Grenzwertüberschreitung per SMS ist wieder freigegeben. Der Button ist nach erfolgreichem Reset nicht mehr sichtbar.
6. Dialogfeld verlassen ohne zu speichern



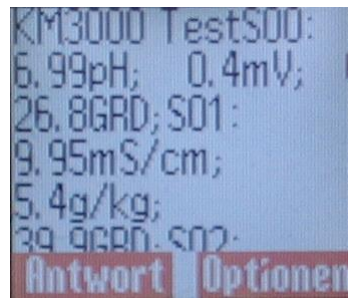
Weitere Informationen zum SMS Service entnehmen Sie bitte unserer Ergänzungsbedienungsanleitung **“Datenübertragung per Modem / SMS Service”**.

8.7.3 SMS Abfrage Service

Beim KM 3000 mit integriertem GSM-Modem Modul GSM3000 kann des Weiteren die Funktion SMS-Abfrage-Service genutzt werden. Dieser Service bietet eine einfache Möglichkeit per Funktelefon die aktuellen Messwerte eines KM 3000 abzufragen. Dazu ist es notwendig dem KM 3000 eine SMS-Kurznachricht zu senden. Das KM 3000 verschickt nach Erhalt dieser ebenfalls eine SMS-Kurznachricht

mit allen aktuell angezeigten Messwerten an die im KM 3000 / SMS-Service voreingestellten Telefonnummern.

Beispiel:



Voraussetzung für die Nutzung des SMS-Abfrage-Service ist ein ordnungsgemäß konfiguriertes GSM-Modem. Die Freigabe des SMS-Service (LIMIT) →ENABLE ist nicht notwendig. Das KM 3000 unterstützt den SMS-Abfrage-Service auch bei ausgeschalteten SMS-Service → DISABLE.

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passwordeingabe.
2. Eingabe des richtigen Passwortes.
3. Berühren der Schaltfläche „Daten“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Modem**.
5. Falls nicht schon bei einer vorherigen Konfiguration durchgeführt, Menüpunkt **PIN** aufrufen und den PIN ihrer SIM-Karte korrekt eingeben und mit ENTER bestätigen.

!!! (Bei 3-maligem Neustart des KM 3000 mit falscher SIM-PIN wird der SIM-PIN gesperrt → Freischaltung nur mit PUK + Mobiltelefon möglich)

6. Um bei mehreren Geräten die Nachrichten beim SMS Empfang zuordnen zu können, kann dem KM 3000 ein individueller Name vergeben werden. Dazu die Schaltfläche **Bezeichnung** betätigen und einen Namen vergeben.
7. Beim Abrufen von Messwerten oder beim Überwachen des Gerätes mittels Limit SMS können max. 2 Rufnummern eingestellt werden, an die die entsprechenden Nachrichten verschickt werden. Bleibt eine Telefonnummer frei, wird die Nachricht nur an einen Teilnehmer verschickt. Zur Eingabe der Nummer wird der entsprechende Button **Telefonnummer** betätigt und die Rufnummer eingegeben.
8. Soll zusätzlich eine Benachrichtigung bei Grenzwertüberschreitung erfolgen (Einstellung des Grenzwertbandes siehe Abschnitt 8.6), muss der Button **Limit SMS enable** anzeigen.
9. Speichern der Auswahl



Sollte die Pin geändert worden sein, muss, damit die geänderten Einstellungen wirksam werden, das KM 3000 neu gestartet werden. Dazu können Sie die RESET Funktion (siehe Abschnitt: 13.4) verwenden oder das Gerät kurz vom Netz trennen. Nach erfolgreichem Neustart und erfolgreicher Modem Initialisierung kann der aktuelle Status des Modems in der dafür vorgesehenen Statuszeile im Messwertfenster abgelesen werden.

Die notwendigen Schritte für die Einrichtung SMS-Abfrage-Service entnehmen Sie bitte unserer Ergänzungsbedienungsanleitung **“Datenübertragung per Modem / SMS Service”**.

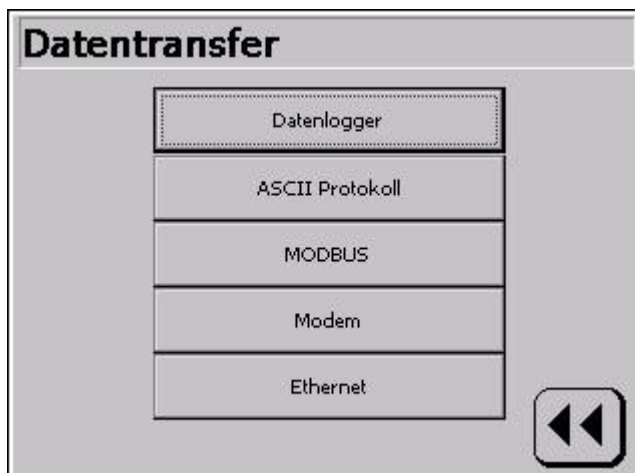
8.8 Ethernet - Einstellung IP-Adresse, Weboberfläche, Modbus TCP/IP

Die Messwerte des KM 3000 lassen sich auch in einem Internetbrowser anzeigen


1. Betätigen Sie im Menu den Button **Daten**




2. Im folgenden Bild wählen Sie **Ethernet**



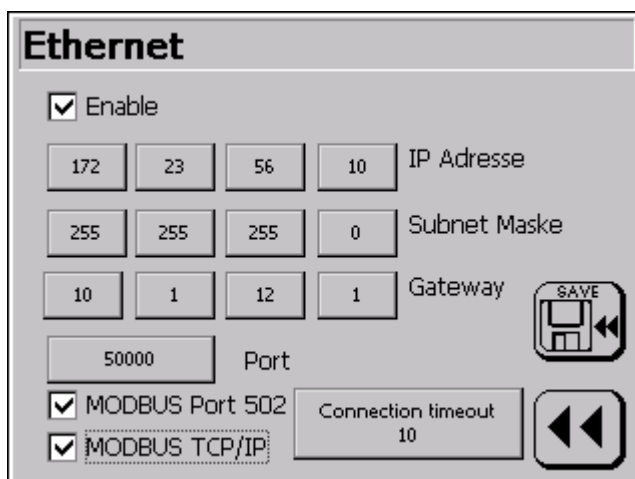3. Ändern Sie die Einstellungen entsprechend Ihres Netzwerkes.
4. Zur Aktivierung setzen Sie das Häkchen bei **Enable**.



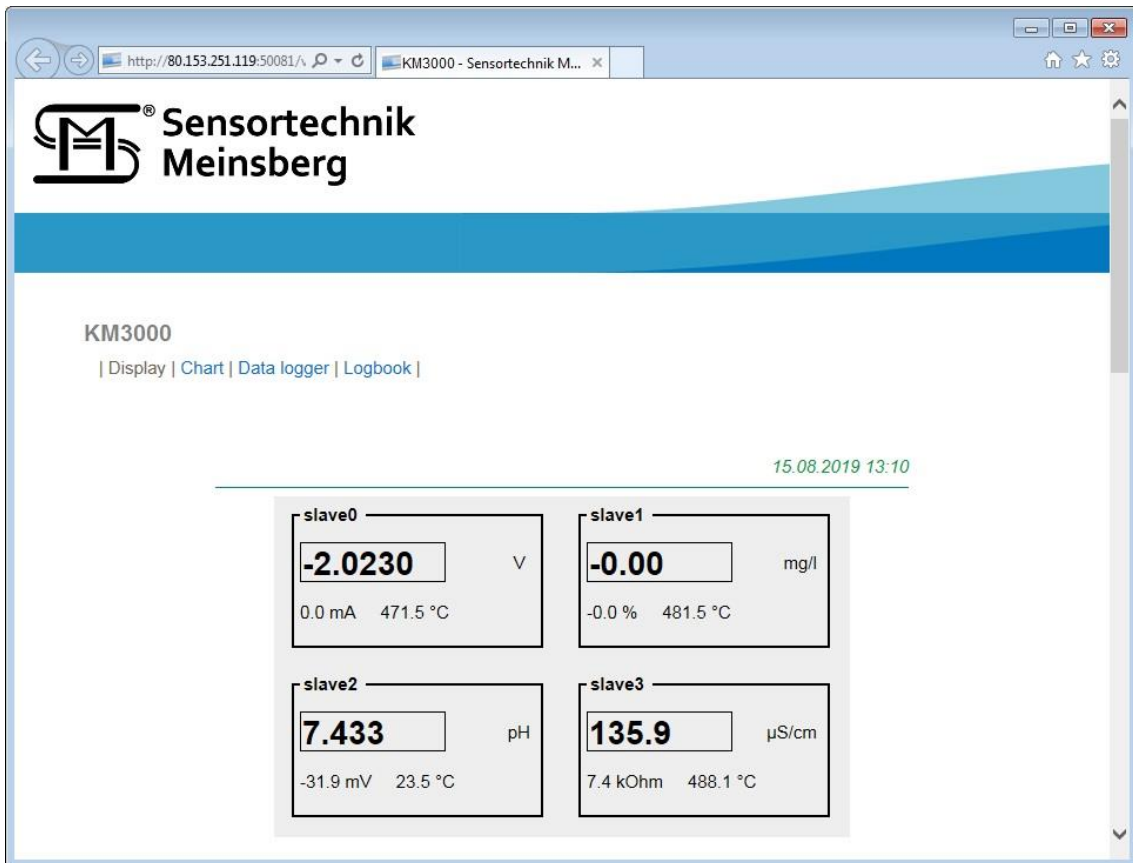
- Wenn Sie nun in Ihrem Browser die IP-Adresse des KM 3000 eingeben, werden die Daten online angezeigt. (Beispiel: 172.23.56.10/values.html)



9 Kalibrierung

9.1 Kalibrierung einer Messstelle

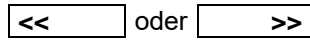1. Suchen Sie die Anzeigeseite mit der zu kalibrierenden Messstelle.
Suchen Sie mit den Tasten



die Anzeigeseite, wo der Messwert der zu kalibrierenden Messstelle angezeigt wird.

2. Berühren Sie die zu kalibrierende Messstelle.
Es werden nun alle Einstellungen dieser Messstelle ausgegeben. Aktuelle Kalibrierdaten, Einstellungen zur Temperaturkompensation sowie die Datensicherung (Datenlogger) und Datenausgabe (seriell) werden angezeigt.
3. Berühren Sie das Kalibriersymbol.



4. Geben Sie das korrekte Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „ENTER“ (Korrekturen können mit der Taste „DEL“ durchgeführt werden.).
5. Wählen Sie das Kalibrierverfahren aus.
Alle möglichen Kalibrierverfahren für den jeweiligen Messstellentyp werden angezeigt. Suchen Sie Ihr gewünschtes Kalibrierverfahren durch drücken auf das entsprechende Symbol aus. Die Erläuterung der einzelnen Kalibrierverfahren erfolgt im Abschnitt 9.2 Kalibrierverfahren.
6. Zurück zur Messung.

Nach Abschluss des Kalibriervorganges berühren Sie die Taste



so oft, bis die Messwerteseite wieder angezeigt wird.

9.2 Kalibrierverfahren

Beachten Sie bei allen Kalibrierverfahren die Temperaturkompensation. D. h., wenn Messwerte mittels Temperaturmessung kompensiert werden, muss auch immer der zugeordnete Temperaturfühler in das Kalibriermedium eintauchen, um die exakte Temperatur bestimmen zu können.

9.2.1 Einstellung Temperaturoffset



Mit diesem Menüpunkt wird die Einstellung einer Offsetverschiebung für den Temperaturwert ermöglicht. Berühren Sie dazu die Schaltfläche, die den aktuell eingestellten Offset anzeigt. Es wird nun ein Eingabedialog angezeigt, der die Einstellung ermöglicht. Der Offset kann positiv oder negativ sein.

Mit der Taste „ENT“ wird der Eingabewert bestätigt. „ESC“ bricht den Eingabedialog ohne Übernahme des Wertes ab und „DEL“ dient der Korrektur eingegebener Werte.

Der geänderte Wert wird nun in dem entsprechenden Feld angezeigt. Weitere Änderungen können erfolgen.

Um die Wertänderung zu speichern, müssen Sie das Dialogfeld „Dateneingabe“ durch berühren des Buttons:



beenden. Soll der geänderte Wert nicht gespeichert werden, verlassen Sie den Dialog „Dateneingabe“ durch berühren des Buttons:



9.2.2 Einpunktkalibrierung



Mittels einer definierten Kalibrierlösung oder einem bekannten Sollwert, z. B. durch ein unabhängiges Verfahren oder mit einem Labor-/Feldgerät ermittelt, wird das Messsignal an diesem einen Punkt kalibriert. Dazu werden Sie zuerst aufgefordert, den Sensor in das entsprechende Kalibriermedium zu tauchen. Ist dies erfolgt, bestätigen Sie den Dialog mit **OK**. Jetzt wird der aktuell gemessene Wert angezeigt. Ist der Messwert in einem stabilen Zustand dann bestätigen Sie das Dialogfeld abermals mit **OK**. Sie werden nun aufgefordert den Sollwert einzugeben.

Mit der Taste **ENT** wird der Eingabewert bestätigt. **ESC** bricht den Eingabedialog ohne Übernahme des Wertes ab und **DEL** dient der Korrektur eingegebener Werte.

Als Ergebnis erhalten Sie nun die neuen Kalibrierwerte, die Sie speichern („SAVE“) oder verwerfen (**CANCEL**) können.

Die Kalibrierung von Messmodulen mit linearer Übertragungskennlinie zur Erfassung von freiem oder Gesamtchlor (MVM 2260 bzw. MV 2260) in Verbindung mit den entsprechenden Messzellen erfolgt durch Einpunktkalibrierung im Vergleich mit photometrisch bestimmten Labordaten. Chlor-Messzellen verfügen über eine in der Messzelle integrierte automatische Temperaturkompensation. Der bei der Kalibrierung angezeigte Temperaturwert ist deshalb auf eine Festtemperatur (z. B. 25 °C) einzustellen und bleibt unberücksichtigt.

Zusätzlich ermöglicht das KM 3000 die Berechnung des freien Chlors als virtueller Messwert mit automatischer pH-Wert-Kompensation. Hierzu wird das Messsignal eines Moduls zur Erfassung von Chlor in Verbindung mit einer Chlor-Messzelle, die ausschließlich unterchlorige Säure HOCl erfasst (Messzelle Cl 4), mit dem Messsignal eines pH-Messmoduls verknüpft, so dass in einem vorgegebenen pH-Bereich die Konzentration an freiem Chlor als virtueller Messwert berechnet wird. Die Berechnung virtueller Messwerte ist im Abschnitt 12. beschrieben. Für die Kalibrierung des virtuellen Messwertes freies Chlor sind besondere Bedingungen zu beachten, die im Abschnitt 12.2 beschreiben werden.

9.2.3 Zweipunktkalibrierung



Mittels zweier definierter Kalibrierlösungen oder bekannter Sollwerte wird der Sensor an zwei voneinander verschiedenen Punkten kalibriert. Die Kalibrierpunkte sollen den Messbereich bzw. die zu erwartenden Messwerte einschließen. Die Reihenfolge der Kalibrierlösungen bzw. Sollwerte ist beliebig.

Zuerst werden Sie aufgefordert, den Sensor in das erste Kalibriermedium zu tauchen. Ist dies erfolgt, bestätigen Sie den Dialog mit **OK**. Jetzt wird der aktuell gemessene Wert angezeigt. Ist der Messwert in einem stabilen Zustand, bestätigen Sie das Dialogfeld mit **OK**. Sie werden nun aufgefordert den zugehörigen Sollwert einzugeben.

Mit der Taste **ENT** wird der Eingabewert bestätigt. **ESC** bricht den Eingabedialog ohne Übernahme des Wertes ab und **DEL** dient der Korrektur eingegebener Werte.

Im folgenden Dialogfeld werden Sie nun aufgefordert, den Sensor in das zweite Kalibriermedium zu tauchen. Nachdem Sie dies bestätigen, erfolgt auch hier die Anzeige des aktuell gemessenen Wertes. Den stabilen Messwert bestätigen Sie nun nochmals mit **OK** und Sie werden aufgefordert, den zugehörigen Sollwert einzugeben.

Als Ergebnis erhalten Sie nun die neuen Kalibrierwerte, die Sie speichern (**SAVE**) oder verwerfen (**CANCEL**) können.

9.2.4 Automatische Kalibrierung



Bei dieser Kalibrierung erkennt das Messgerät automatisch den Wert der verwendeten Kalibrierlösung unter Beachtung der Temperatur der Kalibrierlösungen. Die automatische Kalibrierung kann eine Ein- oder Zweipunktkalibrierung sein und ist auf die im Messgerät gespeicherten Kalibrierlösungen begrenzt. Angewendet wird diese Art der Kalibrierung nur bei der pH-, Leitfähigkeits- und Sauerstoff-Messung.

Leitfähigkeit

Die automatische Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessung ist eine Einpunktkalibrierung und erfordert entweder eine 0,01 molare (1,41 mS/cm bei 25 °C) oder eine 0,1 molare (12,9 mS/cm bei 25 °C) KCl Lösung. Der Temperaturgang dieser beiden Kalibrierlösungen ist im Gerät gespeichert. Das Gerät erkennt automatisch, welche Kalibrierlösung Sie verwenden (Messbereich beachten). Weitere Bedingungen und Hinweise sind der Sensorspezifikation zu entnehmen.

Als erstes werden Sie aufgefordert, den Sensor in die Kalibrierlösung zu tauchen. Bestätigen Sie diesen Dialog mit **OK**. Nun erscheint ein Ausgabefenster, das den aktuellen Messwert anzeigt. Ist der Wert stabil, so berühren Sie die **OK** Taste.

pH-Wert

Die automatische Kalibrierung der pH- Messung ist eine Zweipunktkalibrierung und erfordert die Kenntnis, welche Pufferlösungen Sie für die Kalibrierung verwenden wollen. Das Mehrparameter-Messgerät KM 3000 bietet zur Kalibrierung folgende Puffersätze an:

NBS-Standard- Pufferlösung nach DIN 19266:	pH-Wert bei 25 °C 1,68 / 4,01 / 6,86 / 9,18 / 12,45
Technische Pufferlösung nach DIN 19267:	pH-Wert bei 25 °C 1,09 / 3,06 / 4,65 / 6,79 / 9,23
Knick/Mettler-Toledo/Ingold-Pufferlösung:	pH-Wert bei 25 °C 2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21
Labor Pufferlösung:	pH-Wert bei 25 °C 2,00 / 4,01 / 6,98 / 8,95 / 11,88

Im ersten Dialogfeld müssen Sie diese Auswahl treffen. Die Reihenfolge der Pufferlösungen ist auch hier beliebig. Weitere Bedingungen und Hinweise sind der Sensorspezifikation zu entnehmen.

Der folgende Dialog fordert Sie auf, den Sensor in die 1. Pufferlösung zu tauchen. Bestätigen Sie dies mit **OK**. Nun wird der aktuelle Messwert angezeigt. Wenn die Anzeige einen stabilen Wert ausgibt, berühren Sie die Taste **OK**. Nun erfolgt der gleiche Ablauf (Sensor in Puffer 2, stabile Wertanzeige abwarten) wie beim 1. Puffer für den 2. Puffer.

Als Ergebnis erhalten Sie nun die neuen Kalibrierwerte, die Sie speichern (**SAVE**) oder verwerfen (**CANCEL**) können.

Sauerstoffgehalt

Die automatische Kalibrierung der Sauerstoffmessung ist eine Einpunktkalibrierung an Umgebungsluft. Der Sensor wird aus dem Messmedium entnommen und der Umgebungsluft ausgesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass weder erhebliche Luftströmungen noch direkte Sonneneinstrahlung auf den Sensor die Kalibrierung beeinflussen. Weitere Bedingungen und Hinweise sind der Sensorspezifikation zu entnehmen. Der aktuelle Messwert wird angezeigt. Wenn die Anzeige einen stabilen Wert ausgibt, berühren Sie die Taste **OK**. Der Temperatenausgleich erfordert hier besondere Beachtung und kann bis zu 30 Minuten Einstellzeit erfordern.

Ist die Kalibrierung erfolgt, werden die neuen Kalibrierwerte angezeigt. Sie können nun entscheiden, ob Sie die neuen Kalibrierwerte speichern (**SAVE**) oder verwerfen (**CANCEL**) wollen.

9.2.5 Dateneingabe

Dateneingabe bedeutet die Eingabe der spezifischen Kenndaten des angeschlossenen Sensors, die z. B. vorher im Labor bestimmt wurden.



Wählen Sie den entsprechenden Kalibrierwert durch Berühren des Feldes aus, für den die Einstellungen geändert werden sollen. Ein Eingabedialog ermöglicht nun das Verändern des Wertes in entsprechenden Grenzen. Werden diese überschritten erfolgt eine Fehlermeldung, die Sie auffordert, einen Wert innerhalb der festgelegten Grenzen einzugeben. Mit der Taste **ENT** wird der Eingabewert bestätigt. **ESC** bricht den Eingabedialog ohne Übernahme des Wertes ab und **DEL** dient der Korrektur eingegebener Werte.

Der geänderte Wert wird nun in dem entsprechenden Feld angezeigt. Weitere Änderungen können erfolgen.

Um die Wertänderung zu speichern, müssen Sie das Dialogfeld „Dateneingabe“ durch berühren des Buttons:



beenden. Soll der geänderte Wert nicht gespeichert werden, verlassen Sie den Dialog „Dateneingabe“ durch Berühren des Buttons:



Die Kalibrierung ist nun erfolgt und die neuen Kalibrierwerte werden angezeigt. Sie können nun entscheiden, ob Sie die neuen Kalibrierwerte speichern („SAVE“) oder verwerfen („CANCEL“) wollen.

Unter dem Menüpunkt Leitfähigkeit (LF) – Kalibrieren – Dateneingabe ist der Kalibrierwert Kabeloffset hinzugefügt. Dieser erlaubt eine Werteingabe (Offset) zum Korrigieren des Kabelwiderstandes. Dazu wird in den Messbereichen 20 mS/cm und 100 mS/cm der Kabelwiderstand in Ohm eingegeben.

Messmodule mit linearer Übertragungskennlinie werden durch die Festlegung von zwei definierten Punkten der linearen Übertragungskennlinie kalibriert. Alternativ zur Zweipunktkalibrierung kann dafür die Dateneingabe an zwei Punkten der Übertragungskennlinie genutzt werden. Es ist der Messwert einzugeben, der dem vorgegebenen Eingangssignal (Ausgangssignal des Sensors/Messgerätes) entspricht. Das Modul MV 2270 bzw. MVM 2270 ist ebenfalls ein Messmodul mit linearer Kennlinie, jedoch für ein Zählersignal (Frequenzen bis 1.5kHz).

Messmodul MVM 2260 A bzw. MV 2260 A: Dateneingabe für Eingangssignal 1 V DC bzw. 5 V DC
Messmodul MVM 2260 B bzw. MV 2260 B: Dateneingabe für Eingangssignal 4 mA bzw. 20 mA
Messmodul MVM 2270: Dateneingabe für Eingangssignal 100 Hz und 500 Hz

10 Schalt- und Stromausgänge

10.1 Konfigurieren eines Relaisausganges

Das KM 3000 ist intern mit 4 Relais zur Nutzung als Grenzwert-, Alarm-, Timer- oder Reglerausgang ausgestattet. Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration eines Relaisausganges als Grenzwert- oder Alarmschaltung bzw. die Konfiguration eines Relais als einstellbaren Timer z. B. für einen automatischen Wasch- oder Spülkontakt. Die Konfiguration von Reglerfunktionen wird in Abschnitt 11 beschrieben.

Jedes Relais kann individuell jedem Messwert zugeordnet werden. Weiterhin ist es durch Einsatz von bis zu 4 externen Relaismodulen (REL 2000 CAN) möglich, das System um weitere 16 Relaisausgänge zu erweitern. Das Messgerät KM 3000 stellt die Stromversorgung für die externen Module bereit und erkennt automatisch die angeschlossenen Module. Mit den 4 internen Relais können somit maximal 20 Relaisausgänge pro Messsystem KM 3000 realisiert werden. Die externen Relaismodule besitzen die Identifikationsnummern 68 oder 69. Der Anschluss erfolgt per CAN-Bus und ist im Abschnitt 4.2 „Anschluss externer Module“ beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass das zu konfigurierende Relais nicht bereits mit einer Timer- oder Reglerfunktion belegt ist.

10.1.1 Interne Relaisausgänge

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration der vier im Messgerät KM 3000 standardmäßig integrierten Relais als Grenzwert- oder Alarmausgang.

Verknüpfen eines Relais mit einem Messwert

1. Über das Tastenfeld **MENU** auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Grenzwert“.



4. Berühren Sie die Schaltfläche **Setup Grenzwert**.
5. Um ein internes Relais zu konfigurieren, berühren Sie die Schaltfläche **interne Relais**.
6. Nun können Sie Ihr gewünschtes Relais durch Berühren der entsprechenden Fläche auswählen. Sie erhalten einen Überblick über die momentanen Einstellungen des gewählten Relais.
7. Wählen Sie zuerst den Messwert aus, dem Sie den Grenzwert zuordnen wollen. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **1.Slave**. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave anzeigt, den Sie verwenden wollen. Im folgenden Dialog muss die Auswahl getroffen werden, welchen Wert des Slaves Sie als Grenzwert ausgeben wollen. Messwert1 ist die Hauptgröße und Messwert2 die Nebengröße (siehe Abschnitt 5.2 „Anzeige“).
8. Ändern Sie die Werte für den Grenzwert sowie für die Hysterese. Berühren Sie die jeweilige Schaltfläche und geben Sie die Werte nach Ihren Wünschen ein.
9. Stellen Sie die Grenzwertart mit der Schaltfläche **MINIMUM** bzw. **MAXIMUM** ein.
10. Zum Schluss muss das Relais noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche **Disable** bzw. **Enable** den Wert **Enable** anzeigen.
Übernehmen Sie diese Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



10.1.2 Externe Relaisausgänge

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration der maximal 16 Relais, die mittels zweier zusätzlicher Aktor-Relaismodule (REL 2000 CAN) extern an das Messgerät KM 3000 angeschlossen werden können, als Grenzwert- oder Alarmausgang.

Die externen Aktormodule für zusätzliche Relaisausgänge (REL 2000 CAN) haben die Identifikationsnummern 68 und 69. Diese werden auch so im Auswahlm Menü (siehe Abschnitt 5) kenntlich gemacht. Es werden aber nur die Module angezeigt, die auch vorhanden sind. Alle weiteren Einstellungen sind gleich den Einstellungen für die internen Relaisausgänge (siehe Abschnitt 10.1.1 interne Relaisausgänge).

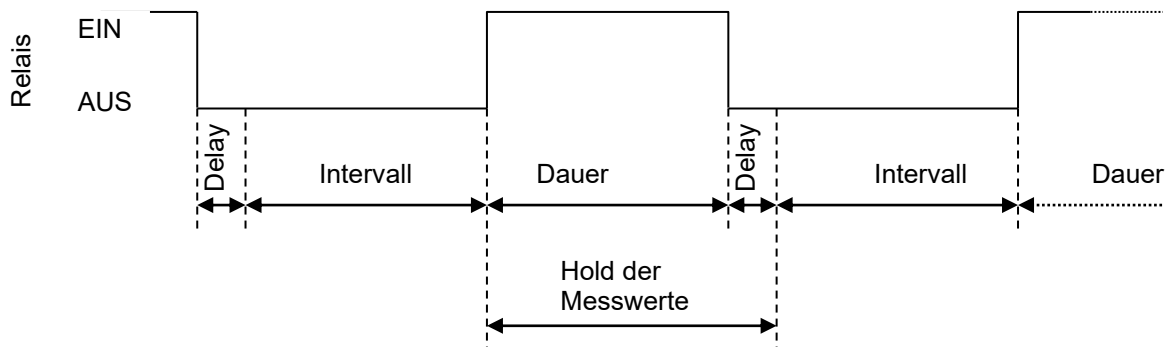
10.1.3 Konfigurieren eines Timerrelais

Das KM 3000 bietet Ihnen die Möglichkeit ein Relais mittels einer integrierten Timerfunktion zeitgesteuert zu schalten, um z. B. Wasch- und Spülvorgänge für Elektroden/Sensoren in Verbindung mit entsprechenden Pumpen und Ventilen automatisch durchzuführen.

Sie können jedes interne oder externe Relais mit dieser Funktion verknüpfen. Zu beachten ist nur, dass sich nicht gleichzeitig eine andere Funktion (PID Regler oder Grenzwert Ausgabe) auf dieses Relais bezieht. In diesem Menü werden zwei Zeiten zur Steuerung der Timerfunktion festgelegt.

Der Einschaltzeitpunkt wird als Intervall-Zeit eingestellt. Die Einschaltdauer gibt an, wie lange das Relais im Zustand Ein bleibt. Für den Zeitraum in dem das Relais eingeschaltet ist, werden alle Messwerte für die Stromausgänge und die Relaisfunktionen eingefroren (Holdfunktion).

Zusätzlich kann eine Verzögerungszeit (Delay time) justiert werden. Die Verzögerungszeit hat keinen Einfluss auf das Schaltverhalten des Timer-Relais, sondern beeinflusst ausschließlich die Holdfunktion für das „Einfrieren“ der Messwerte für Strom- und Relaisausgänge. Damit können Einstellvorgänge der Sensoren/Elektroden nach dem Ende des Wasch- bzw. Spülzyklus berücksichtigt werden, die das Verhalten der Strom- und Relaisausgänge nicht beeinflussen sollen.



Verknüpfen eines Relais mit der Timerfunktion

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Grenzwert“.



4. Berühren Sie die Schaltfläche **Timer**.
5. Ändern Sie die Werte für Intervall, Dauer und Verzögern. Berühren Sie die jeweilige Schaltfläche und geben Sie die Werte nach Ihren Wünschen ein. Die Zeiten sind in Stunden einzugeben.
6. Suchen Sie durch Berühren der Schaltfläche **Relais** den gewünschten Schaltausgang aus. Sie können hier alle zur Verfügung stehenden Relais (interne oder externe Relais) verwenden. Beachten Sie nur, dass das Relais nicht schon durch den PID Regler oder als Grenzwert verwendet wird.
7. Zum Schluss muss der Timer noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche **Disable** bzw. **Enable** den Wert **Enable** anzeigen.

Übernehmen Sie diese Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



10.1.4 Manuelle Auslösung der Relaisfunktion

Für Service- und Wartungsarbeiten können die Relaisfunktionen manuell ausgelöst bzw. überprüft werden. In dieses Menü gelangen Sie über die Schaltflächen „Grenzwert“



und **Manuell**.

10.2 Konfigurieren eines Stromausganges

Generell ist es möglich, jeden Messwert auf jedem vorhandenen Stromausgang auszugeben. Bei den Stromausgängen werden 2 Möglichkeiten unterschieden. 4 interne Stromausgänge stehen über den Klemmkasten des KM 3000 zur Verfügung, dazu kann ein DAC 3000 Modul im KM 3000 eingebaut werden. Zusätzlich kann das System auf bis zu vier Normsignalmodule DAC 3000 CAN mit jeweils vier Stromausgängen 0(4)...20 mA erweitert werden, um alle Messwerte (auch virtuelle Messwerte) als Stromsignale für eine weitere Verarbeitung zu nutzen. Das Messgerät KM 3000 stellt die Stromversorgung für die externen Module bereit und erkennt automatisch die angeschlossenen Module. Insgesamt können somit maximal 16 Stromausgänge realisiert werden. Die Strommodule DAC 3000 bzw. DAC 3000 CAN besitzen die Identifikationsnummern 64, 65, 66 oder 67. Der Anschluss erfolgt per CAN-Bus und ist im Abschnitt 4.2 „Anschluss externer Module“ beschrieben.

Verknüpfen eines Stromausgangs mit einem Messwert

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Strom“.



4. Hier stehen Ihnen nun alle am CAN-Bus angeschlossenen Module mit ihren Identifikationsnummern zur Auswahl. Betätigen Sie nun den Button des Moduls, das Sie einstellen möchten.
5. Nun können Sie Ihren Ausgang durch Berühren der entsprechenden Fläche auswählen. Sie erhalten einen Überblick über die momentanen Einstellungen des gewählten Ausganges.
6. Wählen Sie zuerst den Messwert aus, den Sie ausgeben wollen. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **1.Slave**. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave anzeigt, den Sie verwenden wollen. Im folgenden Dialog muss die Auswahl getroffen werden, welchen Wert des Slaves sie ausgeben wollen. Messwert1 ist die Hauptgröße und Messwert2 die Nebengröße (siehe Abschnitt 5.2 „Anzeige“).
7. Ändern Sie die Wertebereiche für den 0/4 mA Startwert sowie für den 20 mA Endwert. Berühren Sie die jeweilige Schaltfläche und geben Sie die Werte ein.
8. Stellen Sie den Strombereich mit der Schaltfläche **0...20 mA** bzw. **4...20 mA** ein.
9. Zum Schluss muss die Ausgabe noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche **Disable** bzw. **Enable** den Wert **Enable** anzeigen.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



11 Regler

11.1 Grundlegende Informationen

Für komplexe Regelaufgaben wird der Reglermodul mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden PID-Reglern aktiviert. Die Regler können beliebigen Messgrößen zugeordnet werden und arbeiten als Analog-, Impulslängen-(PWM-Regler) oder Impulsfrequenzregler unter Nutzung der analogen Stromausgänge bzw. der Relaisausgänge des Messgerätes. Vor der erstmaligen Benutzung des Reglers muss dieser (nur bei nachträglichem Erwerb dieser Funktion) mit einem Passwort freigegeben werden. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

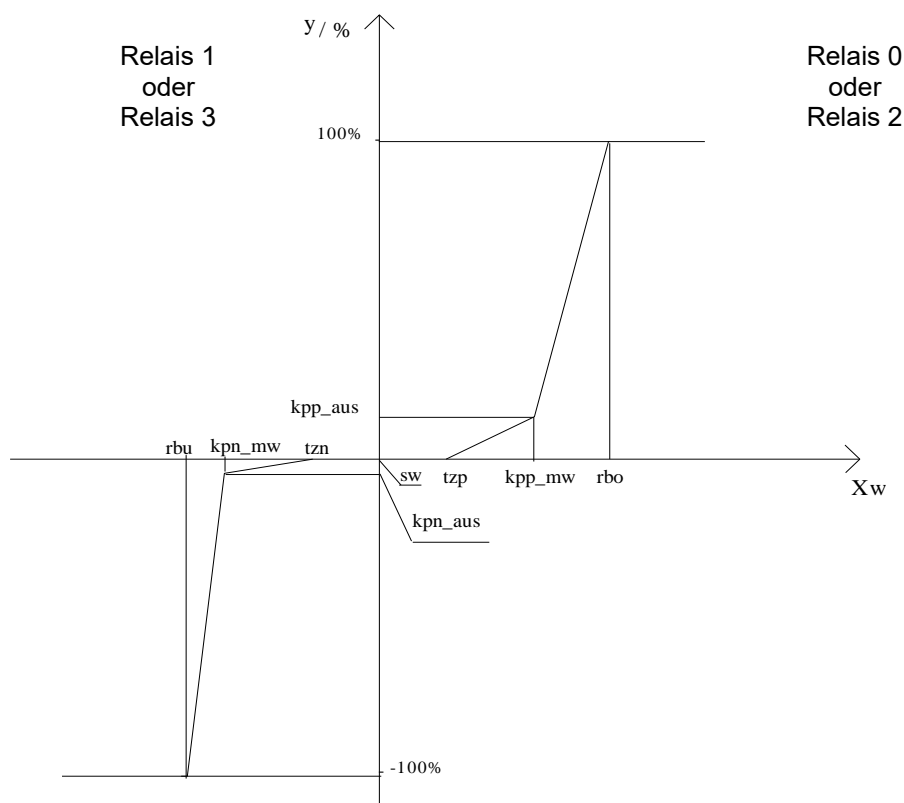
1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Regler“.



4. Nun werden Sie aufgefordert, das Passwort für die Freigabe des Reglers einzugeben. Dieses Passwort erhalten Sie von Ihrem Händler unter Angabe Ihrer Firmendaten sowie Ihrer Gerätenummer. Beachten Sie, dass jedes Gerät sein eigenes Passwort hat.
5. Ist das Passwort eingegeben, können Sie nun den Regler konfigurieren (siehe dazu Abschnitte 11.1 bis 11.4).

Regler1 ist den Relais 0 und 1 und der Regler2 den Relais 2 und 3 zugeordnet. Beide Regler sind als quasi - kontinuierlicher Regler einzusetzen. Für einfache Regelungen kann der integrierte Regler als einfacher P-Regler eingestellt werden. Es ist auch möglich, einen Regler mit Differential- und/oder Integral-Anteil einzustellen. Wird als Nachstellzeit der Wert 0 angegeben, so wird der Regler ohne Integralanteil verwendet. Gleiches gilt auch für die Vorhaltezeit.


Prozesse zur Regelung des pH-Wertes sind nichtlinear. Häufig ist die Übertragungskonstante der Strecke im Bereich des Sollwertes um Größenordnungen größer als an den Grenzen des Regelbereiches. Der Einsatz eines Reglers mit festen Einstellwerten hat entweder die Instabilität des Regelkreises in der Nähe des Sollwertes oder extrem große Ausregelzeiten (für Chargenprozesse) beziehungsweise große Regelabweichungen (bei kontinuierlichen Prozessen mit stärkeren Schwankungen der Störgrößen) zur Folge. Der im KM 3000 integrierte Regler kann an diese Besonderheiten des Prozesses angepasst werden. Nachfolgend ist die allgemeine statische Kennlinie des Reglers dargestellt. Damit ist es möglich, für Teile des Regelbereiches unterschiedliches Übertragungsverhalten zu realisieren.



- rbu - Untergrenze Regelbereich
- rbo - Obergrenze Regelbereich
- sw - Sollwert
- tzn - Totzone, negativer Bereich
- tzp - Totzone, positiver Bereich
- kpp_mw - Knickpunkt + x(Eingangswert)
- kpp_aus - Knickpunkt + y(Ausgabewert)
- kpn_mw - Knickpunkt - x(Eingangswert)
- kpn_aus - Knickpunkt - y(Ausgabewert)

11.2 Konfigurieren eines Impulslängenreglers

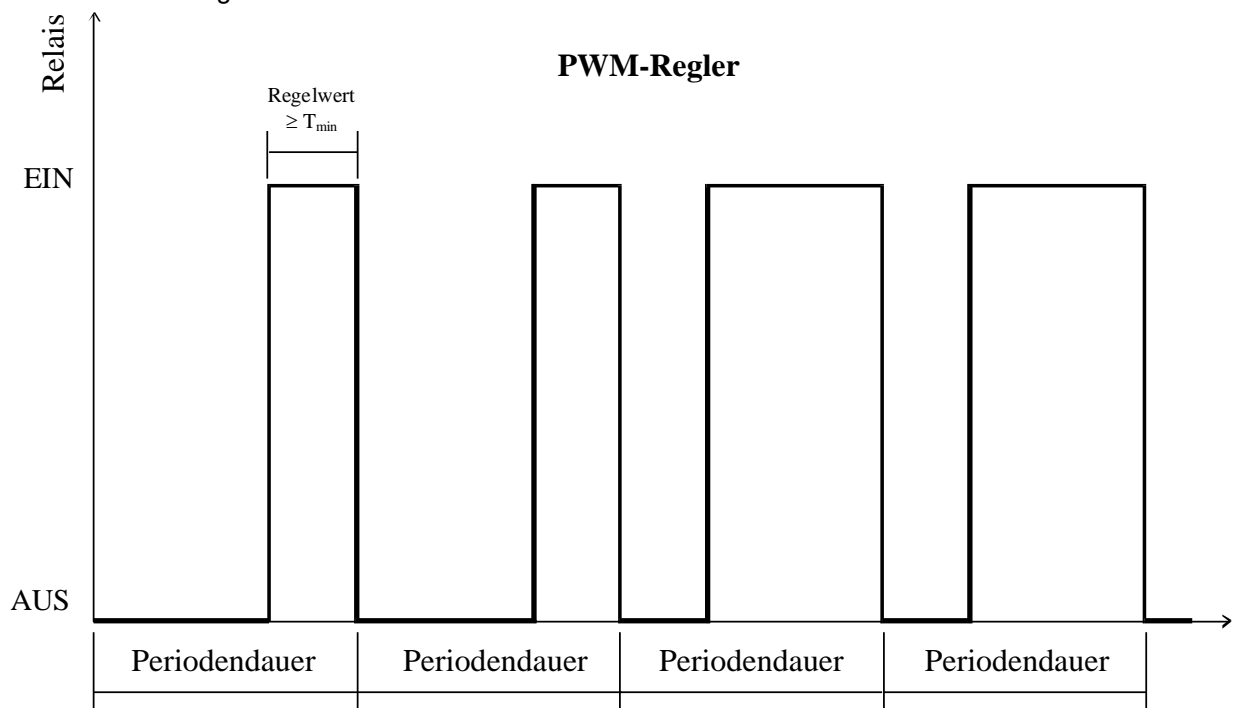Innerhalb der Periodendauer wird je nach Sollwertabweichung ein Schaltimpuls berechnet, mit dem der Eingriff in den Regelprozess erfolgt. Der Regelwert wird mit Beginn jeder Periodendauer neu berechnet. Die Minimalzeit - die kürzeste Zeitdauer eines Stelleingriffes - kann zur Anpassung an unterschiedliche Stellglieder eingestellt werden. Sie soll Schaltvorgänge, die für das Stellglied zu schnell erfolgen, verhindern. Wird sie unterschritten und ist die Regelgröße außerhalb der Totzone, so erfolgt die Ansteuerung des Stellgliedes mit der Minimalzeit. Ist die Ausschaltzeit kleiner als die Minimalzeit, so bleibt das Relais ununterbrochen eingeschaltet.



1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworтеingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Regler“.



4. Nun wählen Sie den Regler 1 oder Regler 2 durch Berühren der entsprechenden Fläche aus. Sie erhalten einen Überblick über die momentanen Einstellungen des gewählten Reglers.
5. Wählen Sie zuerst den Messwert aus, den Sie regeln wollen. Berühren Sie dazu die Schaltfläche 1.Slave. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave anzeigt, den Sie verwenden wollen. Im folgenden Dialog muss die Auswahl getroffen werden, welchen Wert des Slaves Sie ausgeben wollen. Messwert1 ist die Hauptgröße und Messwert2 die Nebengröße (siehe Abschnitt 5.2 „Anzeige“).
6. Ändern Sie nun das Zeitverhalten des Reglers durch Berühren der Schaltfläche Zeiten. Mittels der einzelnen Schaltflächen geben Sie die Werte nach Ihren Vorgaben ein. Verlassen Sie den Dialog durch Berühren des Symbols:



- Ändern Sie die Regelparameter durch Berühren der Schaltfläche **Parameter**. Mittels der einzelnen Schaltflächen geben Sie die Werte nach Ihren Vorgaben ein. Gehen Sie bei der Eingabe der Reihe nach vor, weil sich die Eingabegrenzen immer auf den vorherigen Wert beziehen und angepasst werden. Verlassen Sie den Dialog durch Berühren des Symbols:



- Stellen Sie nun die Schaltfläche **analog/PWM/Frequenz** auf **PWM** indem Sie so oft die Schaltfläche berühren, bis die entsprechende Aufschrift erfolgt.
- Zum Schluss muss der Regler noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche **Disable** bzw. **Enable** den Wert **Enable** anzeigen. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



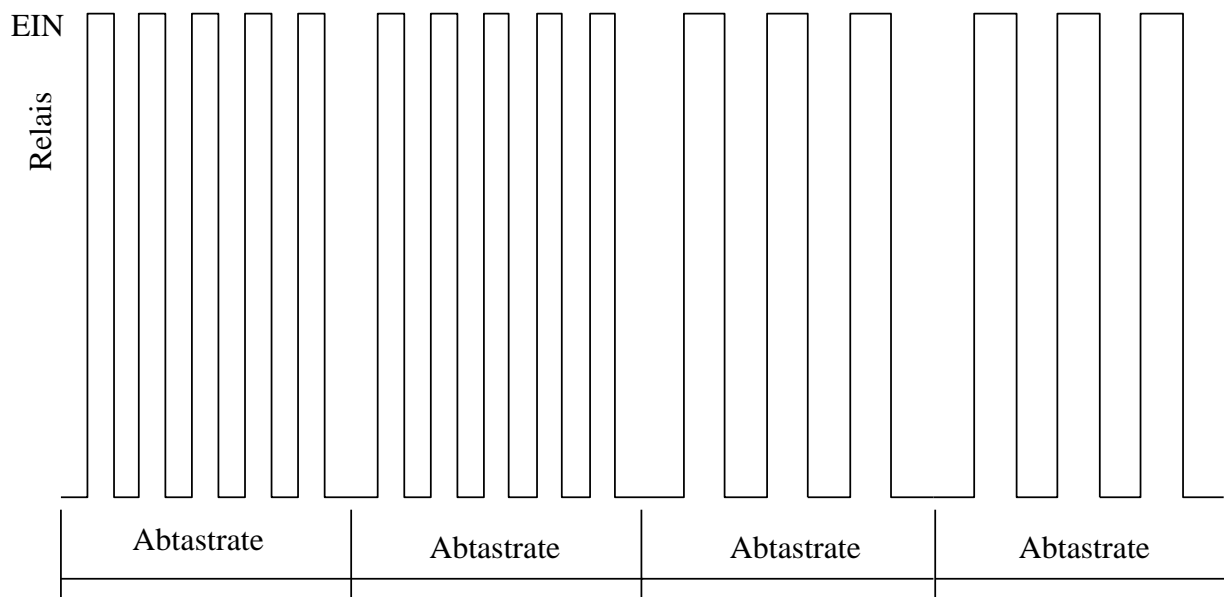
oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



11.3 Konfigurieren eines Impulsfrequenzreglers

Innerhalb der Abtastrate wird je nach Sollwertabweichung eine konstante Impulsfolge berechnet, mit welcher der Eingriff in den Regelprozess erfolgt. Der Regler wird mit Beginn jeder Abtastrate neu berechnet. Die max. Hubzahl gibt dabei an, wie viele Impulsfolgen (pro Minute) für den Stelleingriff maximal ausgeführt werden.

Frequenz-Regler



- Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworтеingabe.
- Geben Sie das richtige Passwort ein.
- Berühren Sie die Schaltfläche „Regler“.



- Nun wählen Sie den Regler 1 oder Regler 2 durch Berühren der entsprechenden Fläche aus. Sie erhalten einen Überblick über die momentanen Einstellungen des gewählten Reglers.
- Wählen Sie zuerst den Messwert aus, den Sie regeln wollen. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **1.Slave**. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave anzeigt, den Sie verwenden wollen. Im folgenden Dialog muss die Auswahl getroffen werden, welchen Wert des Slaves Sie ausgeben wollen. Messwert1 ist die Hauptgröße und Messwert2 die Nebengröße (siehe Abschnitt 5.2 „Anzeige“).

6. Ändern Sie nun das Zeitverhalten des Reglers durch Berühren der Schaltfläche **Zeiten**. Mittels der einzelnen Schaltflächen geben Sie die Werte nach Ihren Vorgaben ein. Verlassen Sie den Dialog durch Berühren des Symbols:



7. Ändern Sie die Regelparameter durch Berühren der Schaltfläche **Parameter**. Mittels der einzelnen Schaltflächen geben Sie die Werte ein. Gehen Sie bei der Eingabe der Reihe nach vor, weil sich die Eingabegrenzen immer auf den vorherigen Wert beziehen. Verlassen Sie den Dialog durch Berühren des Symbols:



8. Stellen Sie nun die Schaltfläche **analog/PWM/Frequenz** auf **Frequenz** indem Sie so oft die Schaltfläche berühren, bis die entsprechende Aufschrift erfolgt.

9. Zum Schluss muss der Regler noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche **Disable** bzw. **Enable** den Wert **Enable** anzeigen.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



11.4 Konfigurieren eines Analogreglers

Der Analogregler ist fest mit jeweils 2 Stromausgängen (siehe Kennlinie) verknüpft. Nach dem Ablauf der Abtastrate wird der Regler neu berechnet und der daraus resultierende Strom am Ausgang zur Verfügung gestellt. Dieser wird dann für die Dauer der Abtastrate konstant gehalten.

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Regler“.



4. Nun wählen Sie den Regler 1 oder Regler 2 durch Berühren der entsprechenden Fläche aus. Sie erhalten einen Überblick über die momentanen Einstellungen des gewählten Reglers.

5. Wählen Sie zuerst den Messwert aus, den Sie regeln wollen. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **1.Slave**. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave anzeigt, den Sie verwenden wollen. Im folgenden Dialog wird die Auswahl getroffen, welchen Wert des Slaves Sie ausgeben wollen. Messwert1 ist die Hauptgröße und Messwert2 die Nebengröße (siehe Abschnitt 5.2 „Anzeige“).

6. Ändern Sie nun das Zeitverhalten des Reglers durch Berühren der Schaltfläche **Zeiten**. Mittels der einzelnen Schaltflächen geben Sie die Werte nach Ihren Vorgaben ein. Verlassen Sie den Dialog durch Berühren des Symbols:



7. Ändern Sie die Regelparameter durch Berühren der Schaltfläche **Parameter**. Mittels der einzelnen Schaltflächen geben Sie die Werte nach Ihren Vorgaben ein. Gehen Sie bei der Eingabe der Reihe nach vor, weil sich die Eingabegrenzen immer auf den vorherigen Wert beziehen und angepasst werden. Verlassen Sie den Dialog durch Berühren des Symbols:



8. Stellen Sie nun die Schaltfläche `analog/PWM/Frequenz` auf `analog`, indem Sie so oft die Schaltfläche berühren, bis die entsprechende Aufschrift erfolgt.
9. Zum Schluss muss der Regler noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche `Disable` bzw. `Enable` den Wert `Enable` anzeigen.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



12 Berechnung virtueller Messwerte

Das Messsystem KM 3000 ermöglicht die Ermittlung, Anzeige und Auswertung von bis zu 4 virtuellen Messwerten. Virtuelle Messwerte entstehen aus der mathematischen Verknüpfung von zwei realen Messwerten, die mit dem KM 3000 in der aktuellen Konfiguration erfasst werden. Jeder Messkanal dessen Messwerte zu einem virtuellen Messwert verknüpft werden sollen, ist vorher entsprechend zu konfigurieren und zu kalibrieren. Auf der Anzeigeseite 5 werden die virtuellen Messwerte dargestellt. Berühren Sie die Fläche des Anzeigewertes, so gelangen Sie über eine Passworteingabe direkt in das Setup zur Einstellung der Anzeige sowie der seriellen Ausgabe und der Datenloggereinstellung. Die einzelnen Einstellungen erfolgen analog den Einstellungen eines einzelnen Messkanals. Nur für die Verknüpfung ist ein weiterer Messwert nötig, der eingegeben werden muss.

12.1 Berechnung virtueller Messwerte durch Addition/Subtraktion

Die Berechnung der Differenz von zwei Leitfähigkeits-Messstellen zur Überwachung der Wirksamkeit von Filtern für die Wasseraufbereitung oder die Berechnung der Differenz von zwei pH-Messstellen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und/oder zur Ableitung von Signalen für eine Überprüfung der Messstellen bzw. die Überwachung von Kühlkreisläufen sind herausragende Beispiele für die Berechnung virtueller Messwerte durch Addition bzw. Subtraktion. Bei Verwendung der Subtraktion steht neben der vorzeichenkorrekten Subtraktion auch die absolute Subtraktion zur Verfügung. Bei Auswahl dieser Funktion ist das Ergebnis (Differenz) immer positiv, auch wenn der 1. Wert (Minuend) kleiner ist als der 2. Wert (Subtrahend).

Ebenso wie für reale Messwerte ist es möglich, alle Ausgabeinheiten wie Stromausgänge, Grenzwertrelais, Regler, Datenlogger für den virtuellen Messwert zu verwenden. Dazu muss anstelle der Auswahl nur eines Messwertes ein zweiter über eine mathematische Verknüpfung (Addition oder Subtraktion) ausgewählt werden. Die Vorgehensweise ist immer gleich und soll anhand des Beispiels einer Grenzwertüberwachung gezeigt werden.

Ziel ist die Verknüpfung der Messwerte zweier Slaves und die Überwachung der Differenz beider Werte.

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren der Schaltfläche „Grenzwert“.



4. Berühren Sie die Schaltfläche **Setup Grenzwert**.
5. Um ein internes Relais zu konfigurieren, berühren Sie die Schaltfläche **interne Relais**.
6. Nun können Sie Ihr gewünschtes Relais durch Berühren der entsprechenden Fläche auswählen. Sie erhalten einen Überblick über die momentanen Einstellungen des gewählten Relais.
7. Wählen Sie zuerst den ersten Messwert aus, den Sie für die virtuelle Berechnung benutzen wollen. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **1.Slave x**. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave anzeigt, den Sie verwenden wollen. Im folgenden Dialog muss die Auswahl getroffen werden, welchen Wert des Slaves Sie ausgeben wollen. Messwert1 ist die Hauptgröße und Messwert2 die Nebengröße (siehe Abschnitt „5.2 Anzeigeelemente“).
8. Wählen Sie nun den zweiten Messwert aus, den Sie für die virtuelle Berechnung benutzen wollen, indem Sie die Schaltfläche **virtuell** berühren.
9. Nun berühren Sie die Schaltfläche **2.Slave x** und suchen sich den Slave und den dazugehörigen Messwert, ähnlich wie für den 1. Messwert, aus.
10. Jetzt stellen Sie die Art der virtuellen Berechnung über die Schaltfläche **disable / Operation** ein. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



11. Ändern Sie die Werte für den Grenzwert sowie für die Hysterese (siehe Abschnitt 10.1 „Konfigurieren eines Relaisausganges“). Berühren Sie die jeweilige Schaltfläche und geben Sie die Werte nach Ihren Wünschen ein.
12. Stellen Sie die Grenzwertart mit der Schaltfläche **MINIMUM** bzw. **MAXIMUM** ein.

13. Zum Schluss muss das Relais noch freigegeben werden. Dazu muss die Schaltfläche **Disable** bzw. **Enable** den Wert **Enable** anzeigen.
14. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



12.2 Berechnung freies Chlor als virtueller Messwert

Die Methode zur Bestimmung virtueller Messwerte kann vorteilhaft für die Berechnung des Gehaltes an freiem Chlor mit automatischer pH-Korrektur benutzt werden. Hierbei wird die Konzentration der unterchlorigen Säure HOCl im Messwasser erfasst und das pH-Gleichgewicht HOCl / OCl⁻ durch eine gleichzeitige pH-Messung im Messwasser als Korrektur berücksichtigt. Damit ist die direkte Anzeige des Gehaltes an freiem zur Desinfektion wirksamem Chlor in Übereinstimmung mit der photometrischen DPD-Methode gewährleistet, ohne den pH-Wert des Messwassers in engen Grenzen halten zu müssen. Diese Bestimmung des freien Chlors mit automatischer pH-Wert-Kompensation wird häufig in der Schwimmbad-Wasseraufbereitung und in der Trinkwasser-Gütemessung eingesetzt. Diese Variante der Kompensation ist jedoch nur anzuwenden, wenn die Messzelle ohne interne pH-Kompensation nur HOCl erfasst.

12.2.1 Chlormessung mit automatischer pH-Wert-Kompensation

Der zu berechnende virtuelle Messwert „freies Chlor“ wird aus der Konzentration von unterchloriger Säure HOCl und dem aktuellen pH-Wert bestimmt. Das Messgerät KM 3000 muss hierzu mit einem Messmodul zur pH-Wert-Messung (MVM 2210 oder MV 2210) sowie einem Messmodul zur Chlormessung (MVM 2260 oder MV 2260) ausgerüstet sein. Das Messsignal des Messmoduls zur Chlormessung in Verbindung mit einer Chlor-Messzelle, die nahezu ausschließlich HOCl erfasst (z. B. Messzelle Cl 4), wird in geeigneter Weise mit dem Messsignal des Messmoduls zur pH-Wert-Messung verknüpft, so dass daraus der virtuelle Messwert freies Chlor mit automatischer pH-Wert-Kompensation berechnet werden kann. Durch die automatische Temperaturkompensation von pH- und Chlor-Messung entsteht ein virtueller Messwert freies Chlor, der in vorgegebenen Bereichen hinsichtlich pH-Wert und Temperatur kompensiert ist. Konfiguration, Kalibrierung und Temperaturkompensation der zum virtuellen Messwert zu verknüpfenden Messkanäle sind für jeden Kanal vorher zu realisieren. Hinsichtlich der Einsatzbedingungen, der Funktionsweise und der Kalibrierung der Sensoren wird auf die zugehörigen Bedienungsanleitungen und Datenblätter verwiesen.

Die Kalibrierung des Messmoduls mit linearer Übertragungskennlinie zur Erfassung von HOCl (unterchlorige Säure) in Verbindung mit der entsprechenden Messzelle erfolgt durch Einpunktkalibrierung im Vergleich mit photometrisch bestimmten Labordaten (siehe Abschnitt 9.2.2 „Einpunktkalibrierung“). Hand- oder Laborphotometer bestimmen den Gehalt an freiem Chlor in einer Probe der Messlösung nach Zugabe einer DPD-Reagenz. Durch die DPD-Reagenz wird automatisch ein definierter pH-Wert in der Probe der Messlösung im Bereich pH 6,2...6,5 eingestellt, bei dem ca. 94 % des gesamten freien Chlors als unterchlorige Säure HOCl vorliegt. Für die Kalibrierung des Messkanals zur Erfassung von HOCl ist aus dem Photometer-Messwert freies Chlor in Abhängigkeit des aktuellen pH-Wertes der Messlösung die Konzentration an HOCl zu berechnen. Hierzu wird der Anzeigewert des Photometers bei bekanntem pH-Wert der Messlösung zum Zeitpunkt der Kalibrierung durch einen Faktor entsprechend korrigiert.

Der einzugebende Kalibrierwert berechnet sich zu:

$$KalWert = \text{freies Chlor}(\text{Photometer}) \bullet \text{Faktor}[\text{pHWert}]$$

pH-Wert	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
Faktor	0,92	0,90	0,87	0,85	0,81	0,78	0,73	0,69	0,63	0,58	0,52	0,47	0,41	0,35

Beispiel:

Photometer zeigt 0,8 mg/l freies Chlor an und der pH-Wert der Messlösung beträgt 7,0. Somit ergibt sich ein Wert von

$$0,8 \text{ mg/l} \bullet 0,78 = 0,624 \text{ mg/l}$$

der als Kalibrierwert für den HOCl-Messkanal verwendet werden muss.

Für die Berechnung der Konzentration an freiem Chlor als virtueller Messwert aus dem Messwert für HOCl und dem aktuellen pH-Wert wird die Abhängigkeit der Konzentration von HOCl vom pH-Wert automatisch kompensiert. Der Faktor berücksichtigt die Verhältnisse der Dissoziationskurve.

Das freie Chlor berechnet sich im Bereich von pH 6,5 – 7,8 nach folgender Gleichung:

$$\text{freies Chlor} = \frac{\text{HOCl (Messwert HOCl - Messkanal)}}{\text{Faktor[pH Wert]}}$$

Dieser Wert kann durch Einrichtung eines virtuellen Kanals angezeigt werden. Bei pH-Werten < 6,5 entspricht der Messwert des HOCl-Messkanals in etwa dem Wert des freien Chlors.

Hinsichtlich detaillierter Informationen zur Dissoziationskurve und der Wirksamkeit der Chlor-Dissoziationsprodukte wird auf die Bedienungsanleitung zur Chlor-Messzelle sowie weiterführende Literatur verwiesen.

12.2.2 Einrichten des virtuellen Kanals für freies Chlor

Sie können einen virtuellen Kanal für freies Chlor anzeigen, ausgeben (Grenzwertrelais oder Stromausgang), im Datenlogger speichern bzw. mit der seriellen Schnittstelle ausgeben oder regeln. Das folgende Beispiel soll die Einrichtung der Anzeige für den virtuellen Kanal „freies Chlor“ aufzeigen.

1. Suchen Sie mit den Tasten \ll bzw. \gg die Anzeigeseite der virtuellen Kanäle.
2. Berühren Sie die Anzeigefläche, wo der Wert angezeigt werden soll.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
4. Berühren Sie die Schaltfläche **1.Slave x** und wählen Sie den Slave aus, der als HOCl-Messkanal (Messmodul zur Chlormessung in Verbindung mit einer Chlor-Messzelle, die nahezu ausschließlich HOCl erfasst z. B. Messzelle CI 4) verwendet wird.
5. Berühren Sie nun die Schaltfläche **2.Slave x** und wählen Sie den Slave aus, der als pH-Messkanal (Messmodul zur pH-Wert-Messung in Verbindung mit einer pH-Elektrode, die sich im gleichen Messmedium wie die Chlor-Messzelle befindet) zur automatischen pH-Wert-Kompensation bei der Bestimmung des freien Chlor verwendet wird.
6. Wählen Sie nun über die Schaltfläche **disable / Operation** den Typ **freies Chlor** aus. Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Es ist unbedingt darauf zu achten, dass bei der Einrichtung des virtuellen Kanals zur Messung des freien Chlors mit automatischer pH-Wert-Kompensation zuerst der Slave des HOCl-Messkanal (Messmodul zur Chlormessung in Verbindung mit einer Chlor-Messzelle, die nahezu ausschließlich HOCl erfasst z. B. Messzelle CI 4) eingerichtet wird.

Anschließend wird der Slave des dazugehörigen pH-Messkanal zur Bestimmung und automatischen Kompensation des pH Wertes konfiguriert

12.3 Berechnung virtueller Messwerte mittels Polynom

Mit der Polynomfunktion eröffnet sich ein breites Anwendungsspektrum des KM 3000 durch die Möglichkeit, nicht-lineare Funktionen verschiedenster Parameter abzubilden. Kennlinien müssen somit nicht mehr unbedingt über die herkömmliche 2-Punkt-Kalibrierung linearisiert werden. Damit steht auch dem Anwender das nicht-lineare Messverhalten von Sensoren an den Messbereichsenden zur Verfügung. Die Abnahme der Steilheit ionenselektiver Elektroden bei niedrigen Ionenkonzentrationen oder Polarisations-effekte bei Leitfähigkeitsmessungen in höheren Konzentrationen sind Beispiele dafür. Das Polynom hat die Form $y = a + bx + cx^2 + dx^3$. Es kann ein beliebiger Sensor, der eine für das KM 3000 auswertbare Messgröße x bereitstellt, in das KM 3000 eingebunden werden. Der y -Wert wird als separater virtueller Messwert berechnet und im Display angezeigt. Die Koeffizienten $a...d$ der Sensorkennlinie müssen be-

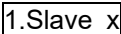
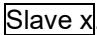
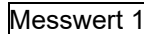
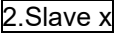

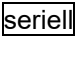
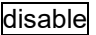
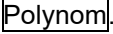
kannt sein bzw. mit Hilfe von speziellen Softwaretools (MSExcel-Regression, CurveExpert, ... etc.) bestimmt werden. Der Grad des Polynoms wird durch die Wahl der Koeffizienten festgelegt. Die Kennlinie wird z. B. linear, wenn die Koeffizienten c und d null sind.

Das Parameterspektrum des KM 3000 erweitert sich durch die Messmodule MV 2260 A oder MV 2260 B um verschiedenste Messgrößen, die innerhalb eines Sensors in eine Spannung (bis 10 V) oder einen Strom (bis 20 mA) vorher umgesetzt werden. Typische Sensoren mit nicht-linearen Kennlinien sind optische Sensoren wie Trübungs- und Feststoffsonden mit analogem Ausgang, Gassensoren, Leitwertensoren, etc.

Beispielsweise kann auch durch einfache Multiplikation mit dem Faktor b eine gemessene Größe in einen benutzerfreundlicheren Wert oder in eine andere Skala umgerechnet werden. Die folgende Vorgehensweise soll als Beispiel eine Umrechnung der Einheit mol/l in mg/l realisieren:

1. Blättern Sie mit  oder  zur Anzeigeseite der virtuellen Kanäle (virtuell 0...3).



2. Berühren Sie die Anzeigefläche, wo der Wert angezeigt werden soll.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
4. Durch Berühren der Schaltfläche  gelangen Sie zur Slave-Auswahl. Sie erhalten eine Übersicht aller am Bus befindlichen Messstellen. Berühren Sie die Fläche, die den Slave (Messwert) anzeigt, den Sie verwenden wollen.
5. Wählen Sie einen Slave durch Berühren von . Sie gelangen zur Messwertauswahl.
6. Wählen Sie durch Berühren einer Schaltfläche den richtigen Messwert . Dieser Messwert entspricht ihrer umzurechnenden Messgröße mol/l.
→ Die Schaltfläche  ist für die Funktion Polynom nicht relevant.
7. Nun können Sie auch einstellen, ob der umgerechnete virtuelle Wert seriell übertragen oder im Datenlogger gespeichert werden soll. Berühren Sie dazu die Schaltflächen  und .
8. Durch Berühren der Schaltfläche  gelangen Sie in das Auswahlfenster für die Art der Berechnung.
9. Wählen Sie . Im folgenden Fenster wird die Auswahl der Polynome 0...3 ermöglicht. Übersichtshalber sollte die Nummer des Polynoms der des virtuellen Kanals entsprechen.
10. Wählen Sie z. B. das Polynom 0 für den virtuellen Kanal 0. Nun gelangen Sie zu der Eingabe der Koeffizienten a...d.
11. Setzen Sie $b = \text{molare Masse} * 1000$ und $a, c, d = 0$.
Speichern Sie Ihre Eingabe durch zweimaliges Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



Nun ist die Eingabe abgeschlossen und eine Umrechnung der Einheiten von z. B. mol/l zu mg/l erfolgt durch ein parametrisiertes Polynom 0, das auch für die Stromausgabe, Grenzwertkontakte oder Regler genutzt werden kann. Der umgerechnete Wert wird nun im Display an der Stelle „virtuell 0“ angezeigt.

13 Systeminformationen und Servicefunktionen

13.1 Information

Im Menüpunkt „Service“ werden Informationen zum System, wie Gerätenummer, Software Version und Logbucheinträge angezeigt. Sie gelangen in das Menü wie folgt:

1. Über das Tastenfeld **MENU** auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren Sie die Schaltfläche „Service“.



Sie sehen hinter der Überschrift „Information“ die Gerätenummer und darunter die Software Version des Gerätes. Alle anderen Informationen erhalten Sie durch Auswahl der entsprechenden Menüpunkte.

13.2 Ändern der Slavenummer (ID von Mess- und Aktormodulen)

Dieser Menüpunkt dient der Einstellung bzw. Änderung einer Identifikationsnummer eines Messmoduls bzw. Aktormoduls. Diese Nummer sehen Sie in der linken oberen Ecke eines jeden Anzeige Kanals. Die Nummer ist wichtig beim Kommunizieren des KM 3000 mit den Busteilnehmern (Slaves; interne und externe Mess- und Aktormodule). Außerdem legt diese Nummer auch die Anzeigeposition fest. So wird der Slave mit der Nummer 0 auf der ersten Seite links oben angezeigt und z. B. der Slave 5 auf der 2. Seite rechts oben.

Äußerst wichtig ist, dass diese Nummer nur einmal am Bus vergeben ist, sonst kann es zu Konflikten kommen, die die korrekte Funktion des gesamten Messsystems beeinflussen. Die Nummer kann mit diesem Menüpunkt auch nur in eine noch freie Nummer geändert werden, die Änderung in eine schon vorhandene Nummer ist nicht möglich.

1. Über das Tastenfeld **MENU** auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren der Schaltfläche „INFO“.



4. Berühren Sie die Schaltfläche **ID wechseln**. Für die Aktormodule DAC3000CAN bzw. REL2000CAN verwenden Sie den Button **ID DAC/REL wechseln**.
5. Berühren Sie dazu die Schaltfläche **Slave aussuchen**.
6. Suchen Sie den Slave aus, dessen Nummer geändert werden soll.
7. Geben Sie die neue Nummer (0...15) ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.
8. Wenn diese Nummer noch nicht vergeben ist, werden Sie sicherheitshalber nochmals gefragt, ob Sie wirklich die neue Nummer speichern wollen.
9. Ist die neue Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert ein Reset durchzuführen. Bestätigen Sie mit OK. Nun werden die Slaves beim Einlesen neu sortiert und mit der geänderten Nummer angezeigt. Alle weiteren Daten sind erhalten geblieben. Beachten Sie, dass die Einstellungen die den Regler, Stromausgang, Grenzwert, Datenlogger und serielle Ausgabe betreffen, nicht automatisch angepasst werden. Diese Einstellungen müssen Sie für den geänderten Slave nun noch durchführen.

13.3 Logbuch

Im Logbuch werden alle das Messsystem betreffenden Einstellungen aufgezeichnet. Bis zu 200 solcher Einträge können gespeichert werden. Die Ausgabe dieser Einträge erfolgt mit Datum, Uhrzeit und einem Code, der die Bedienereingaben bzw. Gerätefehler darstellt.

Code	Bedeutung
CAL Slavexx	Kalibrierung eines Messmoduls
M slaveMW2	Änderung des 2. Messwerts (Widerstand oder Salinität) bei Leitfähigkeit
M SlaveLim	Änderung der Grenzwerte für den Messbereich
M SlaveOut	Änderung der Datenausgabe eines Slaves
M SlaveAnz	Änderung der Anzeige eines Slaves (Messwertausgabe, Bezeichnung)
M SlaveTmp	Änderung der Temperaturkompensation
M GrenzWer	Grenzwertrelais konfiguriert
M Regler	Regler konfiguriert
M DatenLog	Datenlogger eingestellt
M Datentr	serielle Datenausgabe eingestellt
M Stromaus	internen Stromausgang eingestellt
M Pe Strom	externen Stromausgang eingestellt
M Uhr	Uhr eingestellt
M Virtuell	virtuellen Anzeige kanal geändert
M Relais M	Relais manuell gesetzt
M Timer	Timer eingestellt
M MODBUS	Änderungen bei den Modbus Einstellungen
M Grundein	Änderungen in Grundeinstellungen des Gerätes
M Polynom	Änderungen in den Polynomeinstellungen
M Modem	Änderungen in den Modemeinstellungen
M LF MB	Messbereich beim Leitfähigkeitsmodul geändert
SMS1OUT MW	SMS Mitteilung an Rufnummer1 ist erfolgt
SMS2OUT MW	SMS Mitteilung an Rufnummer2 ist erfolgt
SMS1 Limit	Limit SMS an Rufnummer1 ist erfolgt
SMS2 Limit	Limit SMS an Rufnummer2 ist erfolgt
Setup Chan	Neue Setupdaten per Datenübertragung oder USB Stick erhalten
E SMS Err	Fehler bei einer SMS Übertragung
E CAN Init	Probleme beim Initialisieren des CAN Busses
M Hold man	Manuell angehalten (Hold-Funktion)
E1 slavexx	Fehler beim Ansprechen des Slaves xx Messverstärker nicht mehr am Bus
E1 dac xx	Fehler beim Ansprechen des externen Strom Slaves xx
Modem Reset	Neue Initialisierung des Modems
WD-RESET	Reset durch die Software
POWER ON	Unterbrechung der Netzversorgung

Einträge zu Kalibriervorgängen werden ebenfalls mit Datum und Uhrzeit protokolliert. Zusätzlich werden die neuen Kalibrierwerte im Logbuch gespeichert.

1. Über das Tastenfeld MENU auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passwordeingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren der Schaltfläche „INFO“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **Logbuch**.

Das Logbuch kann auch als Textdatei auf den USB Stick kopiert oder mit dem Programm MVremote auf den PC übertragen werden.

13.4 Allgemeine Einstellungen

In diesem Menüpunkt ist es möglich, allgemeine Geräteeinstellungen, die Auswirkungen auf verschiedene Menüpunkte haben, vorzunehmen. Sie können Ihr eigenes Passwort vergeben, festlegen, ob beim Kalibrieren eines Messmoduls nur der zu kalibrierende Kanal oder alle Messkanäle durch die Holdfunktion eingefroren werden, die Uhrzeit und das Datum einstellen und die Benutzersprache des Gerätes um-

stellen. Weiterhin ist es möglich, ein auf einem USB Stick gespeichertes Gerätesetup komplett zu übernehmen bzw. das aktuelle Setup des Gerätes auf den Stick zu speichern und evtl. mit dem Softwareprogramm MVremote zu bearbeiten.

1. Über das Tastenfeld **MENU** auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passwortheingabe
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren der Schaltfläche „Service“.



4. Berühren Sie nun die Schaltfläche **allg. Einst.**
5. Jetzt können Sie die Einstellungen zu den einzelnen Punkten vornehmen.

Setup	Kopieren der kompletten Gerätekonfiguration auf den USB Stick bzw. eine auf den Stick befindliche Konfiguration ins Gerät übernehmen.
Hold Kalibr.	Hier kann man festlegen, ob während der Kalibrierung nur der zu kalibrierende Messkanal („Kanal“ steht im Display) eingefroren wird oder ob alle Messkanäle („alle“ steht im Display) eingefroren werden.
Passwort	Eingabe eines eigenen Passwortes.
Reset	KM 3000 neu starten
Deutsch/English	Ändern der Benutzersprache.

Über die entsprechenden Schaltflächen kann die Einstellung des Datums erfolgen.

Übernehmen Sie die gemachten Einstellungen durch Berühren des Symbols:



oder verwerfen Sie die Einstellungen durch Berühren des Symbols:



13.5 Hold

Das KM 3000 realisiert den automatischen Übergang in die Hold-Funktion bei Aktivierung des Kalibrieremenüs und des Timerrelais. Nach dem Verlassen des Kalibrieremenüs und dem Ausschalten des Timerrelais beendet das Gerät automatisch die Hold-Funktion. Zusätzlich kann das Gerät manuell in den Hold-Zustand versetzt werden, um bestimmte Geräteeinstellungen zu ändern oder zu überprüfen und eine Datenübertragung oder die unkontrollierte Aktivierung von Relaisschaltungen und Reglern während dieses Vorganges zu verhindern. Mit Aktivierung der Hold-Funktion werden alle Ausgabewerte (Stromausgänge, Grenzwerte, Regler) „eingefroren“ und die Datenübertragung für die serielle Datenausgabe gestoppt. Die Ausgänge bleiben in ihrem letzten Ausgabezustand stehen, bis diese Funktion wieder freigegeben wird. Die aktuellen Messwerte werden aber in der Anzeige nach wie vor angezeigt. Ebenso werden Datenlogger und Logbuch nicht von der Hold-Funktion beeinflusst. Im Anzeigebereich der Relaisausgänge wird der Hold-Zustand durch die Information „Hold“ im Display dargestellt (siehe Abschnitt 5.2 Anzeigeelemente).

Für die automatische Aktivierung des Hold-Zustandes bei der Kalibrierung kann entsprechend dem Abschnitt 13.5 „Allgemeine Einstellungen“ festgelegt werden, ob nur der zu kalibrierende Kanal oder alle Kanäle während der Kalibrierung in den Hold-Zustand versetzt werden. Für räumlich getrennte Messstellen ist es vorteilhaft, nur den zu kalibrierenden Kanal in die Hold-Funktion zu versetzen und die Datenausgabe für die nicht betroffenen Kanäle nicht zu beeinflussen.

Während der Aktivierung des Timerrelais (Relais eingeschaltet) z. B. für die Steuerung einer automatischen Reinigung (siehe Abschnitt 10.1.3 „Konfigurieren eines Timerrelais“) werden alle Kanäle automatisch in die Hold-Funktion versetzt, da sich die Reinigungsfunktion meist auf mehrere Sensoren in einer Messstelle bezieht. Die Anzeige der aktuellen Messwerte in der Anzeige des KM 3000 ermöglicht vorteilhaft vor Ort die Überprüfung der Funktion der Reinigung und des Einflusses auf die einzelnen Kanäle. Die Zeit für die Hold-Funktion kann unter Abschnitt 13.5 „Allgemeine Einstellungen“ noch entsprechend dem Einstellverhalten der Sensoren verlängert werden.

1. Über das Tastenfeld **MENU** auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passwortheingabe.

2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Betätigen Sie den Button



Der aktuelle Zustand wird im Dialogfeld in der oberen Zeile angezeigt. Entweder „Gerät im Betriebszustand“ oder „Gerät im manuellen Hold Zustand“. Jeweils durch Berühren des Buttons „HOLD“ wechselt dieser Zustand.

Sie können während des manuellen Hold Zustandes nun alle Änderungen am Gerät vornehmen, ohne dass sich die Zustände der Ausgänge ändern. Ebenso ist die serielle Datenübertragung unterbrochen.

Um diesen Zustand zu verlassen, gehen Sie genau so vor wie oben beschrieben.

13.6 Update der Gerätesoftware

Auf Grund seiner modernen Struktur ist es möglich, die Gerätesoftware durch ein Update zu aktualisieren. Dies erfolgt sehr einfach mittels USB Stick.

Kopieren Sie dafür die aktuelle Gerätesoftware auf den USB Stick. Es ist dabei unbedingt darauf zu achten, dass die neue Firmware in dem Verzeichnis root\Update_SM\ steht. Kopieren Sie deshalb das Verzeichnis inklusive der darin enthaltenen Dateien auf Ihren USB Stick. Beginnen Sie mit dem Updateprozess. Führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus:

1. Über das Tastenfeld **MENU** auf der Messwertausgabeseite kommen Sie zur Passworteingabe.
2. Geben Sie das richtige Passwort ein.
3. Berühren der Schaltfläche „Update“.



4. Das Update Programm wird gestartet.



5. Folgen Sie der Anweisung und stecken den USB Stick mit den erforderlichen Daten auf die USB Schnittstelle.
6. Betätigen Sie den Button „Update“. Nun werden die Daten aktualisiert. Der USB Stick darf während dieser Zeit nicht entfernt werden! Wenn alle Daten erfolgreich kopiert wurden, erfolgt ein automatischer Neustart des KM 3000. Nach erfolgreicher Startprozedur kann nun der USB Stick wieder entfernt werden. Prüfen Sie das erfolgreiche Update, indem Sie die Versionsnummer der neuen Version überprüfen (siehe dazu Abschnitt 13.1).

14 Wartung, Entsorgung

Das Gerät ist weitgehend wartungsfrei. Zur Wartung und Lagerung der Sensoren sind die entsprechenden Bedienungsanleitungen zu beachten.

Eine Entsorgung der Sensortechnik Meinsberg Geräte im Hausmüll oder über kommunale Sammelstellen ist nicht erlaubt. Nicht mehr gebrauchte Geräte zur Entsorgung müssen mit bezahltem Porto eingesendet werden und mit der Kennzeichnung "ZUR ENTSORGUNG" versehen sein. Sensortechnik Meinsberg Geräte werden dann auf unsere Kosten entsorgt.

Weitere Informationen unter: <http://www.meinsberg.de/weee.pdf>

15 Technische Daten

15.1 Mehrparameter-Messgerät KM 3000

Hilfsenergie	115 / 230 V AC (-15/+10 %); 48...63 Hz, ca. 25 VA (optional 24 V DC)
Netzzuleitung für Festverkabelung:	Gummischlauchleitung vom Typ H07RN-F, 3G1.0 Kabelaußendurchmesser abhängig von der verwendeten Kabelverschraubung (Klemmbereich beachten) Der externe Leistungsschalter der Spannungsversorgung bei einer Festverkabelung sollte maximal 10 A (träge) betragen.
Umgebungstemperatur	-10...+55 °C
Anzeige	Touchscreen-Anzeige 320 x 240 Pixel, 256 Farben, hinterleuchtet
Menüsprachen	deutsch, englisch
Datenübertragung	serielle Schnittstelle RS-232 und RS-485, GSM Modem integrierbar, USB-Schnittstelle (USB-Stick FAT formatiert), Ethernet-Schnittstelle, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
Relaisausgang	4 x Wechsler max. 230 V AC, 5 A (Relais 0 bis 3) 1 x Wechsler max. 24 V AC/DC 0,3A (Störmelderelais, Relais 4) Für den Fall eines externen Kurzschlusses im Lastkreis, muss der Relaisausgang auf den maximal zulässigen Ausgangsstrom abgesichert sein. Der Leitungsquerschnitt (max. 2,5mm ²) ist auf den maximalen Ausgangsstrom anzupassen (DIN VDE 0298 Teil 4, 2013-06) und die Spannungsfestigkeit muss entsprechend der Anwendung gewählt werden!
Datenspeicherung	integrierter Datenlogger für ca. 100.000 Werte incl. Datum und Uhrzeit
Logbuch	ca. 200 Aktivitäten incl. Datum und Uhrzeit
Gehäuse	Aluminiumgehäuse mit getrenntem Anschlussraum für Wandaufbau; Schutzart IP 65; Gewicht ca. 5 kg, Abmessungen siehe Maßzeichnungen
Anschlüsse	Anschlussblock für Leiterquerschnitte 0,2 ... 2,5 mm ² Schraubklemmen (Sensor) für Leiterquerschnitte 0,2 ... 1,5 mm ² Kabelverschraubung M16x1,5 - max. Anzugsdrehmoment 7 Nm - Klemmbereich 4.5 – 10 mm Kabelverschraubung M20x1,5 - max. Anzugsdrehmoment 12 Nm - Klemmbereich 7 – 13 mm
EMV	2004/108/EG, EN 61326 Klasse B
Gerätesicherheit	EN 61010-1
Messmodule	vier interne Messmodule; beliebig kombinierbar; Eingänge galvanisch getrennt; Kalibrierdatenspeicherung; Sensorüberwachung mittels justierbarer Grenzwertbänder; manuelle und automatische Temperaturkompensation; technische Daten siehe Tabelle
Aktormodule	ein internes Normsignal-Modul DAC 3000 steckbar: vier Stromausgänge 0(4)...20 mA, skalierbar, Auflösung 10 Bit Regler-Modul PID 3000: 2 Regler mit justierbarem PID-Verhalten als Analog-, Impulslängen- oder Impulsfrequenz-Regler (Nutzung der Strom- bzw. Relaisausgänge)

15.2 Externe Mess- und Aktormodule

Hilfsenergie	12...24 V AC/DC (Versorgung über Messgerät KM 3000)
Umgebungstemperatur	-10...+55 °C
Kabelverbindung	Energie- und Datenübertragung zwischen den Modulen und zum Messgerät KM 3000 über ein geschirmtes 4-adriges Buskabel; max. 1000 m (abhängig von Knotenanzahl und -anordnung)
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse; Schutzart IP 65; Abmessungen siehe Maßzeichnungen
Anschlüsse	Schraubanschlüsse, steckbar
EMV	2004/108/EG, EN 61326 Klasse B
Gerätesicherheit	EN 61010-1
Messmodule	Messmodule beliebig kombinierbar; Eingänge galvanisch getrennt; Kalibrierdatenspeicherung; Sensorüberwachung mittels justierbarer Grenzwertbänder; manuelle und automatische Temperaturkompensation; technische Daten siehe Tabelle
Aktormodule	Normsignal-Modul DAC 3000 CAN: vier Stromausgänge 0(4)...20 mA, skalierbar, Auflösung 10 Bit Bürde $\leq 500 \Omega$, Genauigkeit $\leq 0,2 \%$ Relais-Modul REL 2000 CAN: 4 potentialfreie Relaisausgänge (Schließer) ohmsche Last $I \leq 5 \text{ A}$, $U \leq 24 \text{ V DC}$ für Grenzwert- oder Alarmfunktion

15.3 Messmodule


interne Module	externe Module	Haupt-Messgröße		Neben-Messgrößen	Temperaturmessung		Elektroden / Sensoren
		Messbereich	Auflösung		Messbereich/Auflösung		
MVM 2210	MV 2210	pH-Wert	pH 0...14 pH 0,01	Kettenspannung in mV	-10...130 °C 0,1 °C	pH-Einstabmesskette, getrennte Messkette, Temperaturfühler Pt 1000	
MVM 2215	MV 2215	Redoxpotential	-2000...+2000 mV 1 mV	Redox-Spannung bezogen auf die Standardwasserstoffelektrode	-10...130 °C 0,1 °C	Redox-Einstabmesskette, getrennte Messkette, Temperaturfühler Pt 1000	
MVM 2216	MV 2216	Ionenkonzentration	entspr. Sensorspezifikation (ISE) und Kalibrierung	Kettenspannung in mV	-10...130 °C 0,1 °C	ionenselektive Einstabmesskette (ISE), getrennte Messkette, Pt 1000	
MVM 2220	MV 2220	Leitfähigkeit (2-pol)	0...200 µS/cm 0...2 mS/cm 0...20 mS/cm 0...100 mS/cm 0,1 µS/cm 1 µS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm automatische Umschaltung	Salinität 2...42 g/kg Widerstand	-10...130 °C 0,1 °C	2-Elektroden Leitfähigkeits-Messzelle, Temperaturfühler Pt 1000	
MVM 2225	MV 2225	Leitfähigkeit (4-pol)	0...200 µS/cm 0...2 mS/cm 0...20 mS/cm 0...500 mS/cm 0,1 µS/cm 1 µS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm automatische Umschaltung	Salinität 2...42 g/kg Widerstand	-10...130 °C 0,1 °C	4-Elektroden Leitfähigkeits-Messzelle, Temperaturfühler Pt 1000	
MVM 2230	MV 2230	O ₂ -Sättigung	0...120 % 0,1 %	O ₂ -Konzentration 0...20 mg/l	-10...130 °C 0,1 °C	membranbedeckter amperometrischer O ₂ -Sensor, Temperaturfühler Pt 1000	
MVM 2260 A	MV 2260 A	Spannungs-Eingangssignal	lineare Kennlinie 0...5 V DC		-10...130 °C 0,1 °C	Messgerät oder Sensor mit Spannungsausgang	
MVM 2260 B	MV 2260 B	Strom-Eingangssignal	lineare Kennlinie 0(4)...20 mA		-10...130 °C 0,1 °C	Messgerät oder Sensor mit Stromausgang	
MVM 2260 C	MV 2260 C	Strom-Eingangssignal für passive Sensoren z. B. Konzentration (Chlor, Chlordioxid etc.)	0...2 (10) mg/l 0,01 mg/l	Sensorstrom in mA	-10...130 °C 0,1 °C	Sensor mit passivem Stromausgang (z. B. Chlor)	
MVM 2270	MV 2270	TTL-Zählermodul	0...5kHz/U _{min} =2V Überspannungsschutz	Frequenz in Hz		Flügelrad-Durchflusssensor	
		Durchfluss (Flügelradsensor)	0...100 l/h 0,1 l/h				

Die Messeingänge müssen potentialfrei sein und dürfen keine Verbindung zu netzspannungsführenden Potentialen haben.

Alle Eingänge dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Sensorenbetrieben werden. Direktes Anschließen von artfremden Signalen ist nicht erlaubt.


15.4 Gehäuse Maßzeichnungen

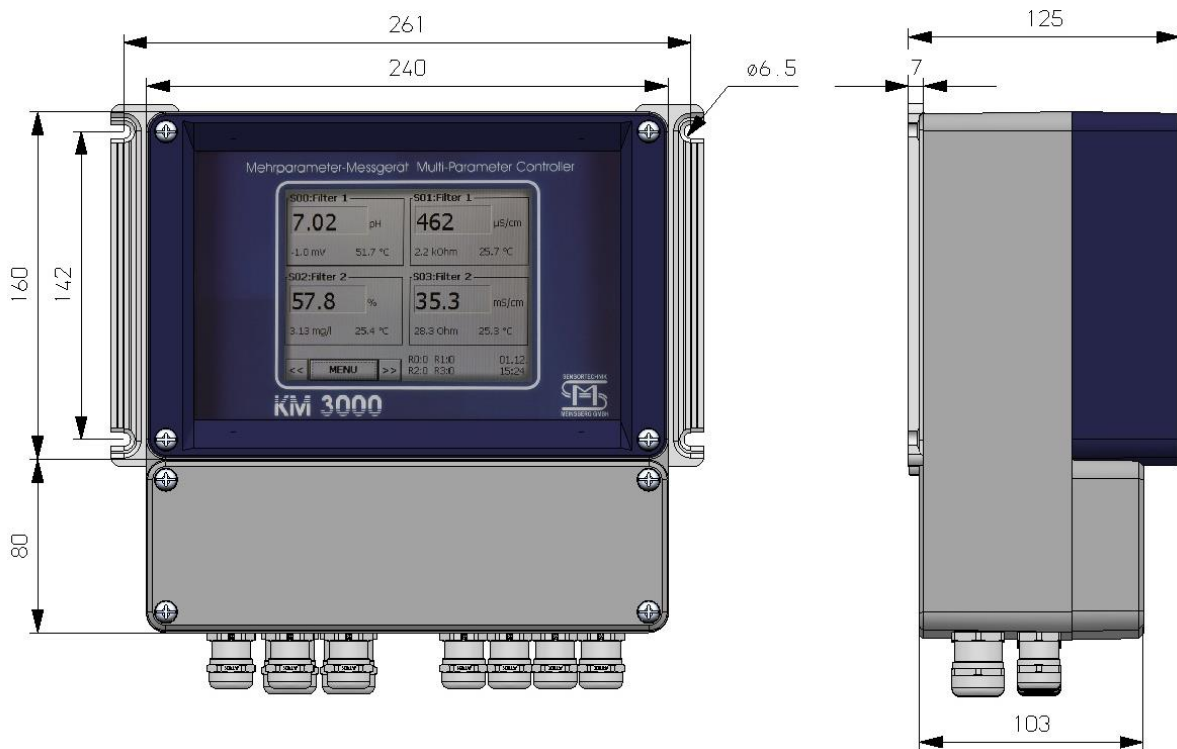Mehrparameter-Messgerät KM 3000




Gehäuse-/Deckelschrauben (max. Anzugsdrehmoment 4.0 Nm)

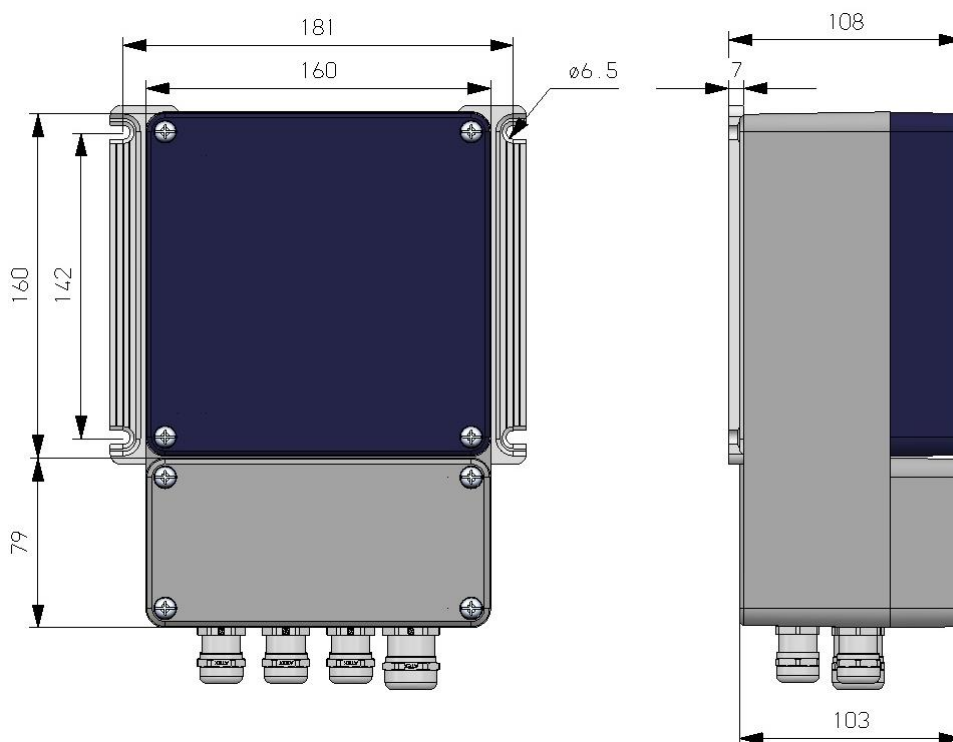Externe Mess- und Aktormodule



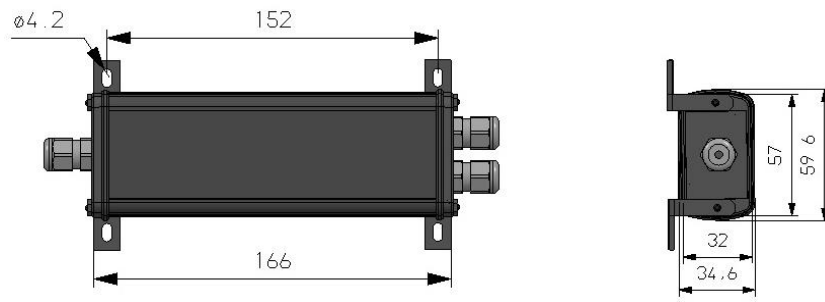Gehäuse-/Deckelschrauben (max. Anzugsdrehmoment 4.0 Nm)



Maße in mm

16 Gerätekonfiguration

Gerätenummer:
MAC-Adresse:

Datum:

Position der internen Messmodule

Position	Messgröße	Slavenummer
0		
1		
2		
3		

Grenzwertrelais

Relais	Messgröße	UGW	OGW
0			
1			
2			
3			

Regler

Regler	Messgröße
1	
2	

externe Messmodule (Slaves)

Slave-Nummer	Messgröße
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

externe Stromausgänge (DAC 3000 CAN)

	Messgröße	UGW	OGW
Slave 64			
Ausgang 0			
Ausgang 1			
Ausgang 2			
Ausgang 3			
Slave 65			
Ausgang 0			
Ausgang 1			
Ausgang 2			
Ausgang 3			
Slave 66			
Ausgang 0			
Ausgang 1			
Ausgang 2			
Ausgang 3			
Slave 67			
Ausgang 0			
Ausgang 1			
Ausgang 2			
Ausgang 3			

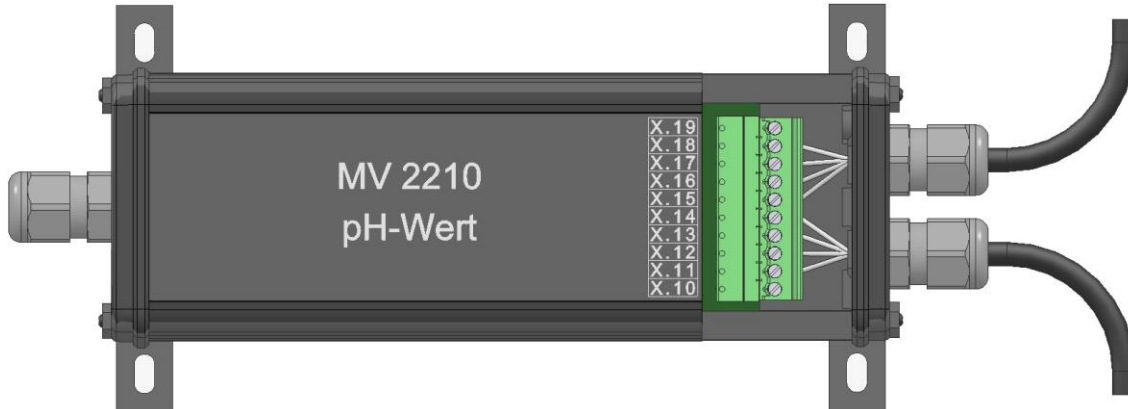
Besonderheiten:

Kabelbelegung Buskabel (CAN-Bus) von metrofunk Kabel-Union

Kabeltyp: Li2YC11Y 3x3-222


Schirm PE (wird über das Gehäuse zum nächsten Modul übergeben)
 rot/schwarz +12V
 braun/schwarz -12V
 orange CAN-L
 schwarz CAN-H

ACHTUNG: Verseilte Paare gehören zusammen, sonst ist kein fehlerfreier Datenverkehr möglich! Das Kabel enthält 3 verseilte Paare, je ein Paar (zur Verringerung des Leitungswiderstandes) wird für die Spannungsversorgung +24V und GND verwendet. Das 3. Paar dient der Datenkommunikation.



Klemme	Bezeichnung / Funktion	Kabelfarben
X.19	frei	
X.18	-12V Versorgungsspannung CAN	braun/schwarz
X.17	+12V Versorgungsspannung CAN	rot/schwarz
X.16	CAN H	schwarz
X.15	CAN L	orange
X.14	CAN H	schwarz
X.13	CAN L	orange
X.12	-12V Versorgungsspannung CAN	braun/schwarz
X.11	+12V Versorgungsspannung CAN	rot/schwarz
X.10	frei	

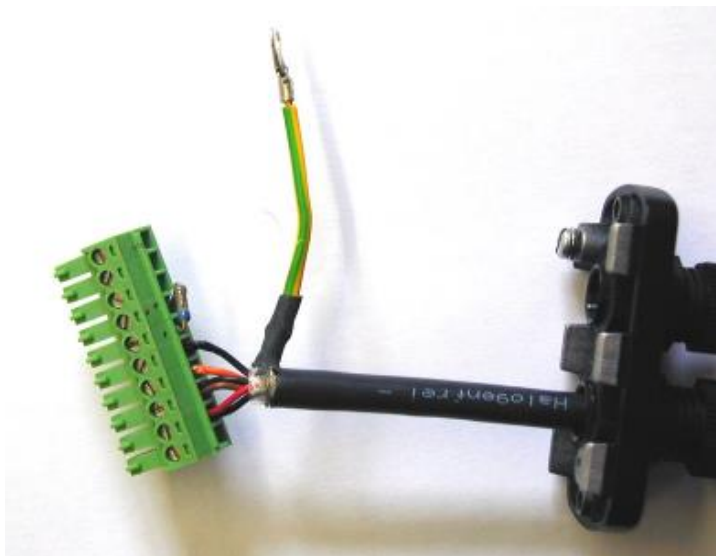
Am letzten Modul muss ein Abschlusswiderstand (120 Ohm) zwischen CAN H und CAN L.



Das Bild zeigt den CAN-Bus Steckverbinder mit Abschlusswiderstand und PE Deckelanschluss per Kabelschuh.

17 Anhang – Auszug aus der BA der Vorgängerversion

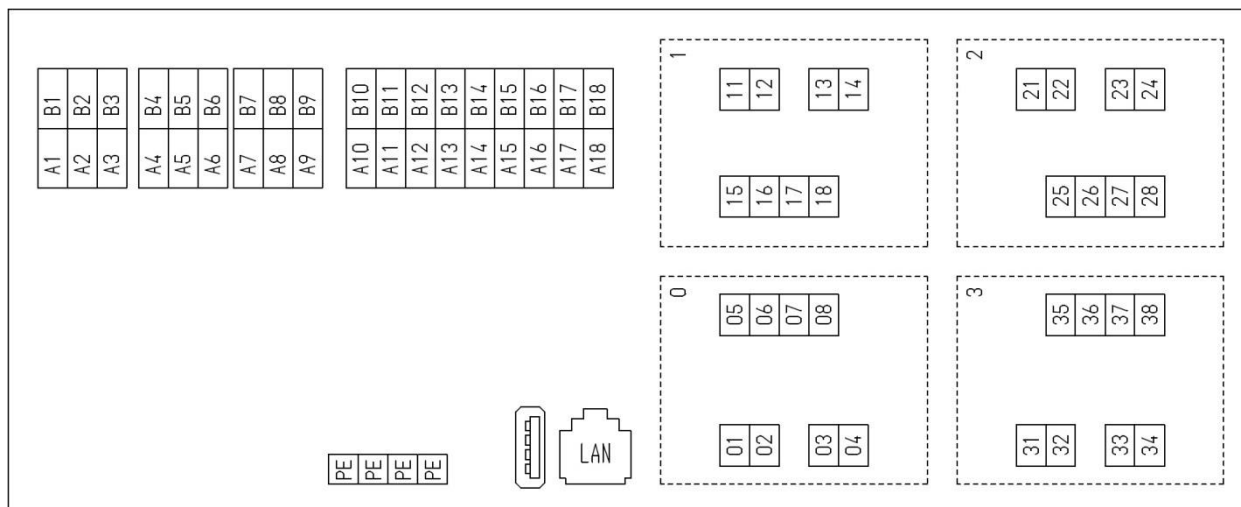Klemmkasten KM 3000 – alte Hardwareversion



Klemme	Bezeichnung	Klemme	Bezeichnung
A1	Netzversorgung L1-Leiter	B1	Netzversorgung L1-Leiter
A2	Netzversorgung PE-Leiter	B2	Netzversorgung PE-Leiter
A3	Netzversorgung L2-Leiter	B3	Netzversorgung L2-Leiter
A4	Relais 0 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)	B4	Relais 0 Öffner
A5	Relais 0 Schließer	B5	Relais 1 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)
A6	Relais 1 Öffner	B6	Relais 1 Schließer
A7	Relais 2 Öffner	B7	Relais 2 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)
A8	Relais 3 Öffner	B8	Relais 2 Schließer
A9	Relais 3 Schließer	B9	Relais 3 Wechsler (max. 230 V AC, 5 A)
A10	Masse Stromausgang 0	B10	Stromausgang 0
A11	Masse Stromausgang 1	B11	Stromausgang 1
A12	Masse Stromausgang 2	B12	Stromausgang 2
A13	Masse Stromausgang 3	B13	Stromausgang 3
A14	+12V Versorgungsspannung CAN	B14	CAN L
A15	-12V Versorgungsspannung CAN	B15	CAN H
A16	B(-) RS485	B16	Masse RS232/RS485
A17	TxD - RS232	B17	Masse RS232/RS485
A18	A(+) RS485	B18	RxD - RS232

Die Masseanschlüsse der Stromausgänge sind alle auf das gleiche Potential bezogen

18 Serviceadresse



Hersteller:

Xylem Analytics Germany GmbH

Am Achalaich 11
D-82362 Weilheim
Deutschland

Service und Rücksendungen:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG



® Sensortechnik Meinsberg
Meinsberg, Kurt-Schwabe-Straße 6
D-04736 Waldheim
Deutschland

Tel. +49(0)34327.623.0
Fax +49(0)34327.623.79
E-Mail: meinsberg@xylem.com